

Sonic Plus 1801

Manual del usuario

AQUOLAB®

Felicitaciones por su elección!

Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual del usuario para conocer sus características y notas (qué hacer y no hacer) y la mejor forma de utilizarlo.

Nota: cargue su cepillo de dientes sónico ("cepillo de dientes" para abreviar el siguiente contenido) completamente antes de usarlo por primera vez.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

ATENCIÓN: LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO

1. Siempre compruebe cuidadosamente el producto antes de usarlo. No lo use si parece dañado (cabezal del cepillo, mango, cable USB).

2. El cable de la estación de carga no se puede reemplazar. Si el cable está dañado, deséchelo y vuelva a comprarlo.

3. Este producto no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No desmonte, repare ni modifique el producto usted mismo. Solo los técnicos profesionales certificados están calificados para resolver cualquier problema. Por favor, consulte "GARANTÍA Y SOPORTE" si el producto ya no funciona correctamente o necesita reparaciones.

4. Coloque y guarde siempre el producto (cable USB) lejos de niños y personas con discapacidades mentales.

5. Guarde siempre el producto en un lugar fresco y seco lejos de la luz directa.

6. Para evitar daños al producto, no coloque el cabezal de cepillado, el mango, la almohadilla o el cable USB en el lavavajillas para la limpieza.

7. Cambie los cabezales de cepillado cada 3 meses para obtener resultados óptimos. Utilice únicamente los cabezales originales.

8. No utilice el cepillo de dientes durante la carga.

9. El producto viene con una batería recargable de iones de litio, que es autosuficiente y no puede ser reemplazada por el usuario. La batería debe desecharse correctamente cuando ya no pueda soportar la carga.

10. Siempre guarde la base de carga a una distancia segura de las fuentes de agua.

11. No intente recuperar la base de recarga si cae al agua. Desconéctela inmediatamente.

12. Nunca utilice una almohadilla de carga con un cable dañado.

13. No usar durante el baño. Aunque el producto es impermeable IPX7, no se puede proteger eficazmente del agua caliente o del vapor.

14. Este producto está diseñado únicamente para limpiar los dientes y las encías. Utilice este producto únicamente para el uso previsto, tal como se describe en este manual de instrucciones o según lo recomendado por su dentista.

15. Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o una falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

16. Los niños menores de 7 años no son aptos para el uso de este producto.

17. Este producto es un dispositivo de cuidado personal y no está destinado a ser utilizado en múltiples pacientes en una clínica o institución dental.

18. Utilice un ordenador certificado por UL, el concentrador USB o la toma duplex USB para cargar el cepillo de dientes.

19. Para cargar el cepillo de dientes con eficacia, no coloque la base de carga sobre una superficie metálica magnética.

20. Para la conexión a una fuente de alimentación fuera de su país, utilice un adaptador de la configuración correcta para la toma.

21. Consulte a su dentista antes de usar este producto si se ha sometido a una cirugía oral o gingival en los 2 meses anteriores.

22. Consulte a su dentista si tiene un sangrado excesivo después de usar este producto o si el sangrado continúa después de 1 semana de uso.

23. Deje de usar este producto y consulte a su médico/ dentista si experimenta molestias o dolor.

24. Este producto cumple con los estándares de seguridad para dispositivos electromagnéticos. Sin embargo, si tiene un marcapasos u otros dispositivos implantados, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo antes de usarlo.

25. Consulte a su médico si tiene otros problemas de salud.

26. Este cepillo de dientes se puede utilizar en implantes ortodónticos (las cabezas se desgastan antes si se utilizan en aparatos) y restauraciones dentales (obturaciones, coronas, facetas).

27. Puede experimentar picazón, entumecimiento o incluso sangrado leve si nunca ha utilizado un cepillo de dientes sónico. Las encías se acostumbrarán a la vibración sónica en aproximadamente dos días y el malestar disminuirá en una semana. Consulte a su médico si la incomodidad persiste.

CONTENIDO DEL RECIPIENTE


- 2 cabezas con capucha higiénica transparente
- 1 casación
- 1 cable USB o una almohadilla de carga
- 1 manual del usuario

Nota: el contenido del envase puede variar según el modelo comprado


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo n.	Sonic Plus 1801
Dimensión	251x30.5x29mm
Frecuencia	37,000~40,000 VPM
modo de limpieza	Clean, Sensitive, Gum care, White, Polish
Tensión	3.3~4.2V
Batería	Lithium-ion de 2000 mAh, duración de aproximadamente 90 días con una sola carga
Recarga	Aproximadamente 6 horas para una carga completa
advertencia d escarga	luz roja intermitente
Botón	Para cambiar de modo, pulse el botón de encendido dos veces en menos de 5 segundos. Para apagar el cepillo de dientes, presione de nuevo en el botón de encendido.
Indicador de carga	Carga: rojo fijo - Completamente cargado: verde fijo durante 30 segundos, luego apagado
Impermeabilidad	IPX-7
Smart memory	El modo del último uso será memorizada y activada para la siguiente.
Cabezal	Pelos Dupont alimentarios con protección
Nivel de ruido	<60dB
Peso	135g (con cabezal)

ESQUEMA DEL PRODUCTO

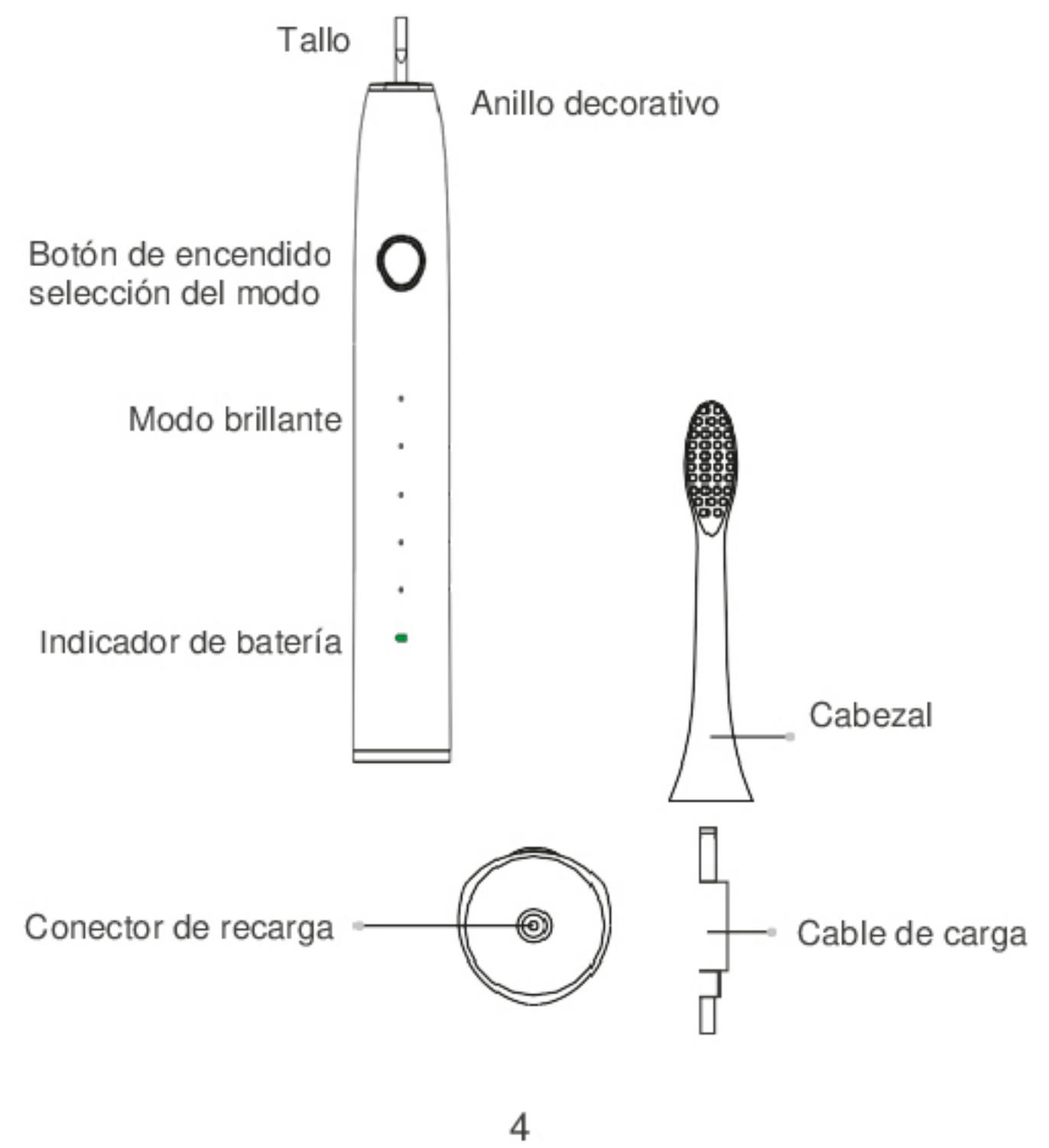


MODO DE LIMPIEZA

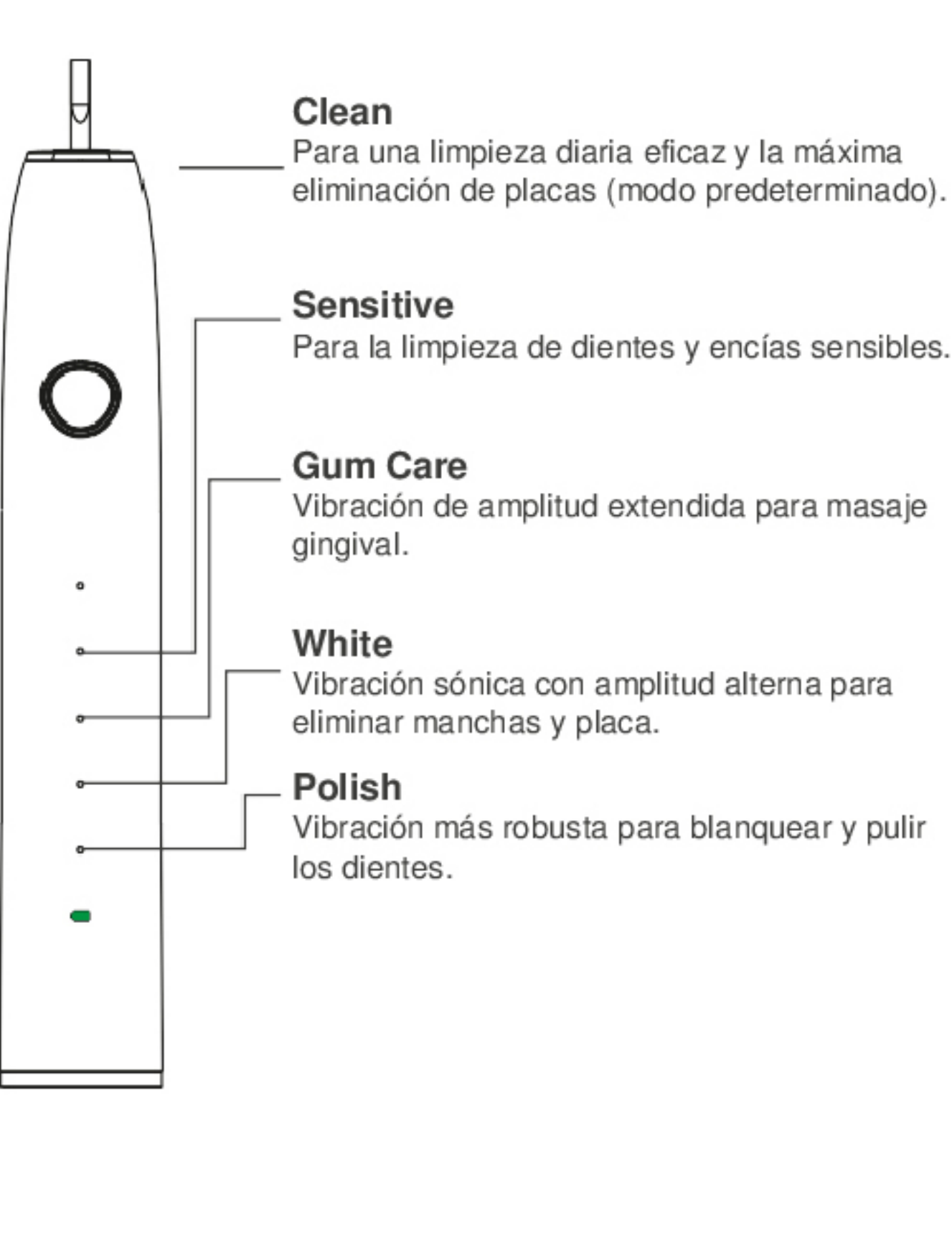

CÓMO INSTALAR LA CABEZAL



CÓMO USAR EL CEPILLO

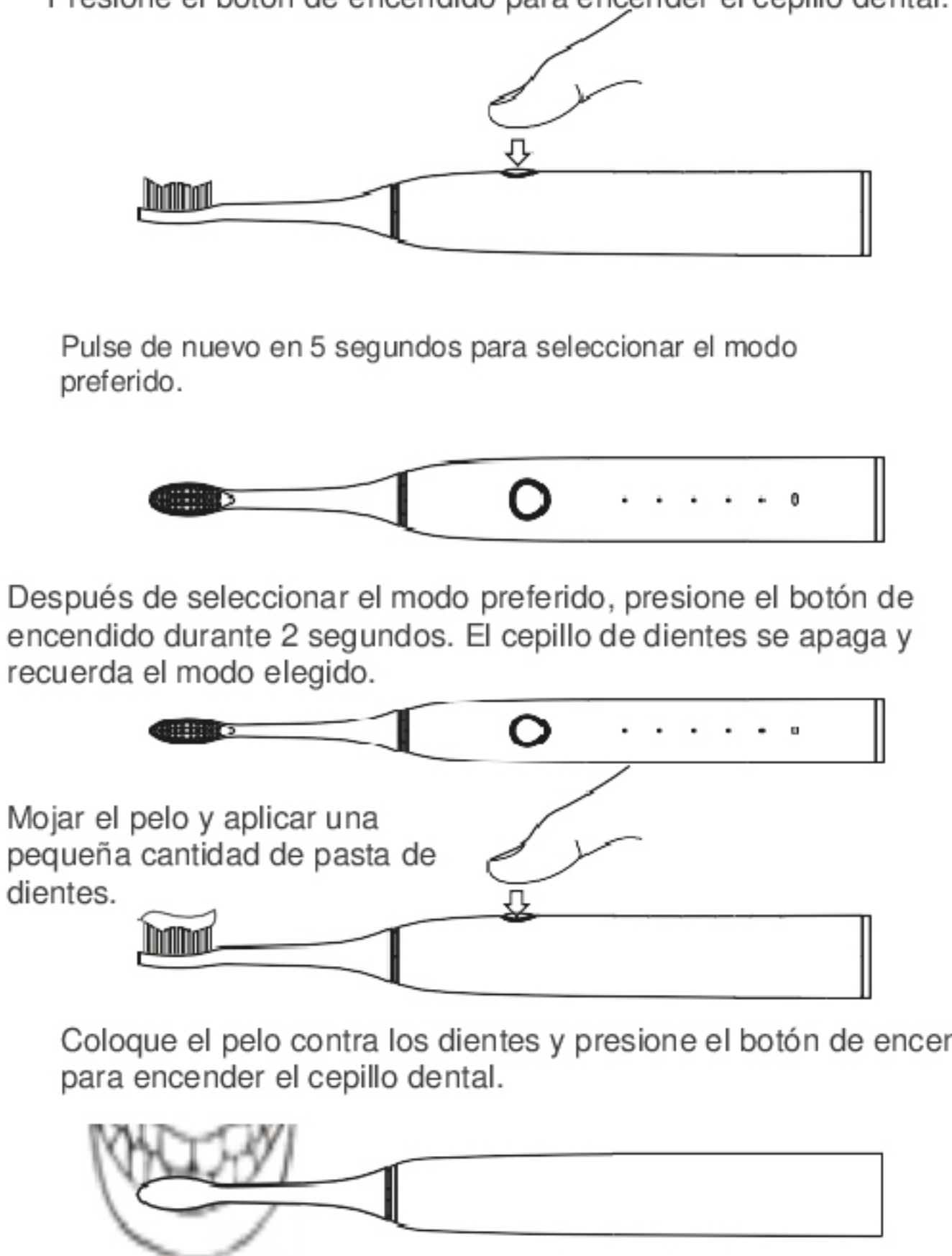


CÓMO APAGAR EL CEPILLO


Después de la limpieza (2 minutos), el cepillo dental se apaga automáticamente. Presione el botón de encendido para apagar el cepillo de dientes.

CONSEJOS DE LIMPIEZA

Cada 30 segundos, la función quadpacer le recuerda que debe cepillar cada sección de su boca. Nota: para asegurarte de cepillarte todos los dientes de manera uniforme, divide tu boca en 4 secciones usando la función quadpacer.

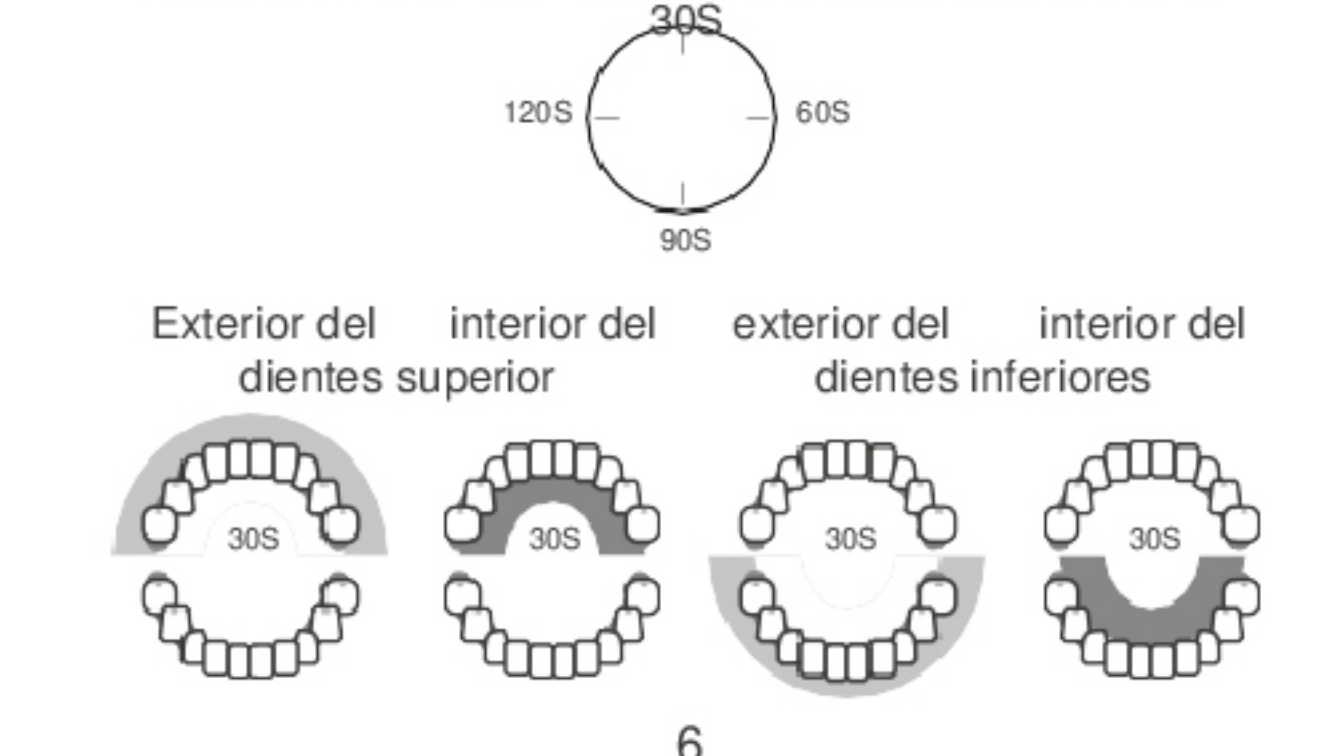

Enjuague el cabezal de cepillado con agua después de cada uso. Limpie toda la superficie del mango con un paño suave o toallas.

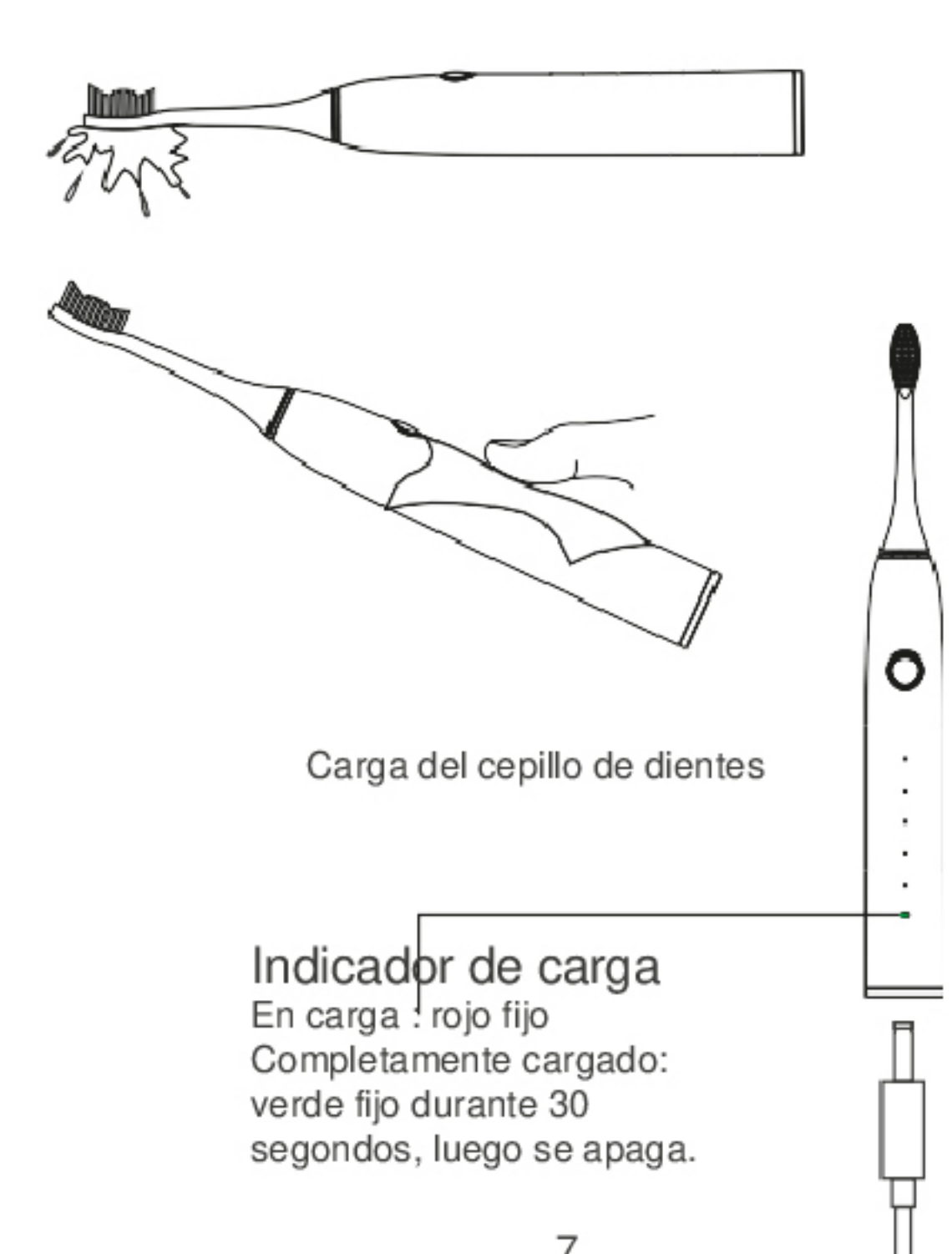

Garantía y servicio

QC Pass

Aqualab garantiza el producto durante dos años a partir de la fecha de compra. Aqualab reparará o reemplazará los defectos de materiales y mano de obra (incluidos los distribuidores y revendedores) a expensas de Aqualab, siempre que se proporcione la prueba de compra dentro del período de garantía. Aqualab recomienda usar cabezales de cepillo originales para un rendimiento óptimo. El uso de otros cabezales puede dañar el cepillo dental y limitar la protección de la garantía. Póngase en contacto con su distribuidor local o envíe un correo electrónico a

hygiene-precision.com para el servicio de garantía.

exclusiones de garant ías

Lo que no cubre la garantía:

- Cabeza de cepillo.
- Daños causados por el uso de piezas de repuesto o cabezales no autorizados.
- Daños causados por un uso indebido, abuso, negligencia, alteración o reparación no autorizada.
- Desgaste normal, incluyendo escamas, arañazos, abrasiones o decoloración.
- La prueba de compra ha sido modificada, eliminada o retirada.

Todas las garantías implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un uso particular, se limitan a la duración de esta garantía. Aqualab o cualquiera de sus filiales, o Las filiales no se hacen responsables de daños accidentales, consecuentes o de otro tipo resultantes de una violación de la garantía, un incumplimiento del contrato, una negligencia, un delito u otra situación legal. Estos daños incluyen, sin limitación, la pérdida de ahorros o ingresos, la pérdida de ganancias; la pérdida de uso; las reclamaciones de terceros, incluyendo, sin limitación, dentistas e higienistas; el costo de cualquier equipo o servicio de reemplazo

Si necesita enviar el producto al distribuidor o a Aqualab para la reparación o el reemplazo, los siguientes puntos se deben realizar para la devolución del producto:

1. Para la devolución bajo garantía, incluya una prueba de compra, comme como una copia del recibo de venta o de la factura. Asegúrese de que la fecha de compra y el número de modelo del producto sean claramente legibles. Si se envían los originales, no se pueden devolver;

2. Enviar el producto entero;

3. Empaque el producto de forma segura para evitar daños durante el transporte. Si es posible, utilice el material de embalaje original;

4. Adjuntar una descripción de lo que ha sucedido con el producto. Incluir, claramente escrito, el nombre y la dirección a la que se debe devolver el producto, junto con el número de teléfono (requerido para el envío). Por favor, rellene este formulario de información del cliente:

Modelo :	Nombre y Apellido:
Fecha de adquisición :	Tel :
Email :	
Dirección :	
Descripción del problema:	