



ESTELUX
LUXURY OF AESTHETICS





ESTELUX
LUXURY OF AESTHETICS

Rejuvenel

GLUSKIN

magicalift

WUNDERFILL

Estelux
Filler

BIOHA
LABORATORIES

ESTELUX ŞİRKƏTİ HAQQINDA

Estelux şirkəti 2018-ci ildən etibarən Azərbaycan Respublikasında rəsmi fəaliyyət göstərməkdədir. Şirkətimiz hal hazırda 6 beynəlxalq brend 59 çeşid məhsulun ekskluziv distributorudur və 1700 həkim kosmetoloqla əməkdaşlıq edir. Beynəlxalq arenada Amwc Monaco, Dubai Derma, İmcas Paris, İmcas Shanghai, Kolkhida Tblisi, Beauty İstanbul, Cosmoderma, ölkəmizdəki Baku Derma və digər yerli sərgilərdə standartlarımız mövcuddur. Distributor olduğumuz məhsulların ISO, CE, GMP sertifikatları və Səhiyyə Nazirliyinin lisenziyaları mövcuddur. Böyük Britaniya, Türkiyə, Hollandiya, Koreya, Çin dövlətlərindən ölkəmizə kosmetoloji və dermatoloji məhsulları idxal edirik.

О КОМПАНИИ ESTELUX

Компания Estelux предоставляет свои услуги в Азербайджанской Республики с 2018 года, и в настоящее время является дистрибьютором 6 международных брендов, 59 наименований продукции а а также сотрудничает с 1700 врачами - косметологами, дерматологами. У нас есть стенды на международных аренах, таких как Amwc Monaco, Dubai Derma, Imcas Paris, Imcas Shanghai, Kolkhida Tbilisi, Beauty Istanbul, Cosmoderma, а также на местных выставках в нашей стране, таких как Baku Derma и другие. Продукция, дистрибьюторами которой мы являемся, имеет сертификаты ISO, CE, GMP и лицензии Министерства здравоохранения. Мы импортируем косметологическую и дерматологическую продукцию в нашу страну из Великобритании, Турции, Голландии, Кореи и Китая.





ESTELUX
LUXURY OF AESTHETICS

Rejuvenel

GLD SKIN

magicalift

WUNDERFILL

Estelux
Filler

BIOHA
LABORATORIES

ABOUT ESTELUX COMPANY

Estelux company has been officially operating in the Republic of Azerbaijan since 2018. Our company is currently the exclusive distributor of 6 international brands and 59 product types and collaborates with 1700 cosmetologists. We have stands in the international arena at Amwc Monaco, Dubai Derma, Imcas Paris, Imcas Shanghai, Kolkhida Tbilisi, Beauty Istanbul, Cosmoderma, and at local exhibitions in our country such as Baku Derma and others. The products we distribute have ISO, CE, GMP certificates and licenses from the Ministry of Health. We import cosmetology and dermatology products to our country from United Kingdom, Turkey, Netherlands, Korea, and China.

ESTELUX ŞİRKETİ HAKKINDA

Estelux şirketi 2018 yılından itibaren estetsiyen doktorlarla Azerbaycan Cumhuriyeti'nde resmi olarak faaliyet göstermektedir. Şirketimiz şu anda 6 uluslararası markanın 59 çeşit ürününün özel distribütörüdür ve 1700 estetsiyen doktorla işbirliği yapmaktadır. Uluslararası alanda Amwc Monaco, Dubai Derma, Imcas Paris, Imcas Shanghai, Kolkhida Tiflis, Beauty İstanbul, Cosmoderma, ülkemizdeki Baku Derma ve diğer yerel fuarlarda standlarımız bulunmaktadır. Distribütörü olduğumuz ürünlerin ISO, CE, GMP sertifikaları ve Sağlık Bakanlığı lisansları mevcuttur. Birleşik krallık, Türkiye, Hollanda, Kore, Çin gibi ülkelerden ülkemize kozmetolojik ve dermatolojik ürünler ithal ediyoruz.



Estelux Azerbaijan



estelux_azerbaijan



+994 55 227 73 89



info@estelux.az



www.estelux.az





ESTELUX
LUXURY OF AESTHETICS

PROSEDUR TƏLİMATLARI

Müalicədən əvvəl dərinin təmiz olmasını təmin etmək üçün makyaj və bütün digər kosmetik vasitələr çıxarılmalıdır. Bunu üz təmizləyici losyondan istifadə etməklə aradan qaldırmaq olar. Soyuq sudan istifadə məsələlərin genişlənməməsini təmin edəcəkdir. Aspirin, Advil və s. dərmanlar müalicədən ən azı 3 gün əvvəl qəbul edilməlidir. Çünki onlar inyeksiya yerində şişkinliyi və ya qanaxmanı artırma bilər. Həmçinin müalicədən əvvəl spirt, balıq yağı, ginkgo və omega-lardan uzaq durmaq tövsiyə olunur. Kosmetoloji və Dermatoloji müalicədən sonra ilk gün ərzində hər hansı yüksək ifadəli üz hərəkətləri etməyərək və hər hansı gərgin idmandan qaçaraq üzə rahat saxlamağa çalışın. Həmçinin həddindən artıq istiyə (məsələn, sauna, solaryum və s.) məruz qalmamaq vacibdir. Çünki bu nəticələrin uzun ömürlülüyünü azalda bilər. Təlimat verilmədiyi təqdirdə, vurulan nahiyyəni masaj etməyin. Müalicədən dərhal sonra makyaj yenidən tətbiq oluna bilər. Müalicədən əvvəl və sonra aşağıdakılardan qaçınmağı xatırlamaq vacibdir: Advil, aspirin və ya digər antiinflamatuar dərmanlar, Spirt, Balıq yağı, Omegas, Güclü idman, Həddindən artıq istilik və ya soyuq.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОЦЕДУРЕ

Перед процедурой, с помощью лосьона для очищения лица, необходимо очистить кожу. Следующим этапом, смыть все холодной водой, это поможет предотвратить расширение пор кожи лица.

Таких препаратов, как аспирин, адвил и т.д., должен быть прекращен как минимум за 3 дня до процедуры. Это связано с тем, что они могут усилить отек или кровотечение в месте инъекции.

Также рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя, рыбьего жира, гинкго и омега-кислот перед процедурой.

В течение первого дня после косметологической и дерматологической процедуры старайтесь держать лицо в расслабленном состоянии, избегая любых выразительных мимических движений и напряженных физических упражнений. Важно избегать воздействия чрезмерного тепла (например, сауны, солярия и т. д.), так как это может сократить продолжительность результатов.

Не массируйте обработанную область, если нет специальных указаний. Макияж можно наносить сразу после процедуры. Важно помнить, что до и после процедуры следует избегать следующего: Адвил, аспирин или другие противовоспалительные препараты, алкоголь, рыбий жир, омега-кислоты, интенсивные физические упражнения, чрезмерное тепло или холод.





ESTELUX
LUXURY OF AESTHETICS

PROCEDURE INSTRUCTIONS

Before the treatment, makeup and all other cosmetic products must be removed to ensure the skin is clean. This can be remedied by using a facial cleansing lotion. Using cold water will ensure that pores do not expand. Medications such as Aspirin, Advil, etc. should be taken at least 3 days before the treatment. Because they can increase swelling or bleeding at the injection site. It is also recommended to stay away from alcohol, fish oil, ginkgo, and omegas before the treatment. During the first day after the cosmetology and dermatology treatment, try to keep the face relaxed by not making any highly expressive facial movements and avoiding any strenuous exercise. It is also important not to be exposed to excessive heat (e.g., sauna, solarium, etc.). Because this can reduce the longevity of the results. Do not massage the injected area unless instructed. Makeup can be reapplied immediately after the treatment. It is important to remember to avoid the following things before and after treatment: Advil, aspirin or other anti-inflammatory drugs, Alcohol, Fish oil, Omegas, Strenuous exercise, Excessive heat or cold.

PROSEDÜR TALİMATLARI

Tedaviden önce cildin temiz olmasını sağlamak için makyaj ve diğer tüm kozmetik ürünler çıkarılmalıdır. Bunu bir yüz temizleme losyonu kullanarak gidermek mümkündür. Soğuk su kullanmak gözeneklerin genişlemesini önleyecektir. Aspirin, Advil vb. ilaçlar tedaviden en az 3 gün önce bırakılmalıdır. Çünkü bunlar enjeksiyon bölgesinde şişliği veya kanamayı artırabilir. Ayrıca tedaviden önce alkol, balık yağı, ginkgo ve omega takviyelerinden kaçınılması tavsiye edilir. Kozmetolojik ve dermatolojik tedaviden sonraki ilk gün, aşırı yüz hareketlerinden ve yorucu egzersizlerden kaçınarak yüzünüzü dinlendirmeye çalışın. Ayrıca aşırı ısıya (örneğin sauna, solaryum vb.) maruz kalmamak önemlidir, çünkü bu sonuçların kalıcılığını azaltabilir. Talimat verilmedikçe enjeksiyon yapılan bölgeye masaj yapmayın. Tedaviden hemen sonra makyaj tekrar uygulanabilir. Tedaviden önce ve sonra aşağıdaki şeylerden kaçınmayı unutmamak önemlidir: Advil, aspirin veya diğer anti-inflamatuar ilaçlar.



Estelux Azerbaijan



estelux_azerbaijan



+994 55 227 73 89



info@estelux.az



www.estelux.az



Reyounger®

FINE LINES



1ML, 2ML



İŞIĞ DOLĞUSU / ЗАПОЛНЕНИЕ СВЕТОМ

Məhsulun təsviri

Funksiyası: Gözaltı işıq dolğusudur. Gözaltı və gözətrafi incə qırıqları bərpa edir.

Tərkib: Natrium Hialuronat, Natrium xlorid, Disodium hidrogen fosfat, Natrium dihidrogen fosfat, Steril inyeksiya məhlulu.

Hialuron Turşu Sıxlığı: 20 mg / ml.

Hissəcik Ölçüsü: 0.10 - 0.15 mm.

İynə Ölçüsü: 30 G.

Qalıcılıq müddəti: 6-18 ay.

Saxlanma Temperaturu: 2-30°C.

Tibbi çarpaz bağlı natrium hialuronat gel yumşaq toxuma doldurucusu.

Параметры

Функция: Легкое наполнение под глазами, раскрывает мелкие мимические морщины вокруг глаз.

Ингредиенты: Гиалуронат натрия, хлорид натрия, гидрофосфат динатрия, дигидрофосфат натрия, стерильный раствор для инъекций.

Плотность гиалуроновой кислоты: 20 мг/мл.


Размер частиц: 0.10 - 0.15 мм.

Размер иглы: 30 г.

Продолжительность: 6-18 месяцев.

Температура хранения: 2-30°C.

Медицинский гель сшитого гиалуроната натрия и наполнитель мягких тканей

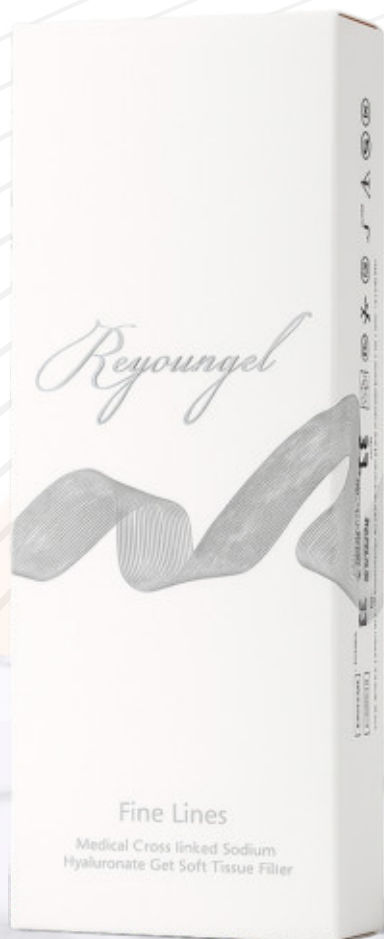

FINE LINES



1ML, 2ML



LIGHT FILLER / IŞIK DOLGUSU

Product Descriptions

Function: Under-eye light filler. It restores fine wrinkles under and around the eyes.

Composition: Sodium Hyaluronate, Sodium chloride, Disodium hydrogen phosphate, Sodium dihydrogen phosphate, Sterile injection solution.

Hyaluronic Acid Density: 20 mg / ml.

Particle Size: 0.10 - 0.15 mm.

Needle Size: 30 G.

Duration: 6-18 months.

Storage Temperature: 2-30°C.

Medical cross-linked sodium hyaluronate gel soft tissue filler.

Ürün açıklaması

İşlevi: Göz altı ışık dolgusudur. Göz altı ve göz çevresindeki ince kırışıklıkları onarır.

İçerik: Sodyum Hyaluronat, Sodyum klorür, Disodyum hidrojen fosfat, Sodyum dihidrojen fosfat, Steril enjeksiyon solüsyonu.

Hyaluronik Asit Yoğunluğu: 20 mg/ml.

Partikül Boyutu: 0.10 - 0.15 mm.

İğne Boyutu: 30 G.

Kalıcılık süresi: 6-18 ay.

Saklama Sıcaklığı: 2-30°C.

Tıbbi çapraz bağlı sodyum hyaluronat jel yumuşak doku dolgusu.



DERM



1ML, 2ML



DODAQ DOLĞUSU / НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ГУБ

Məhsulun təsviri

Funksiyası: Dodaq dolğusudur.Orta qırıqları bərpa edir.Həcmli dodaq görüntüsünü təmin edir

Tərkib: Natrium Hialuronat, Natrium xlorid, Disodium hidrogen fosfat, Natrium dihidrogen fosfat, Steril inyeksiya məhlulu

Hialuron Turşu Sıxlığı: 24 mg / ml.

Hissəcik Ölçüsü: 0.15 - 0.28 mm.

İynə Ölçüsü: 27 G.

Qalıcılıq müddəti: 6-18 ay.

Saxlanma Temperaturu: 2-30°C.

Tibbi cərpaz bağlı natrium hialuronat gel yumşaq toxuma doldurucusu.

Параметры

Функция: Придает объем губам . Раскрывает кисетные морщины.

Ингредиенты: Гиалуронат натрия, хлорид натрия, гидрофосфат динатрия, дигидрофосфат натрия, стерильный раствор для инъекций.

Плотность гиалуроновой кислоты: 24 мг/мл.


Размер частиц: 0.15 - 0.28 мм.

Размер иглы: 27 г.

Продолжительность: 6-18 месяцев.

Температура хранения: 2–30°C.

Медицинский гель сшитого гиалуроната натрия и наполнитель мягких тканей

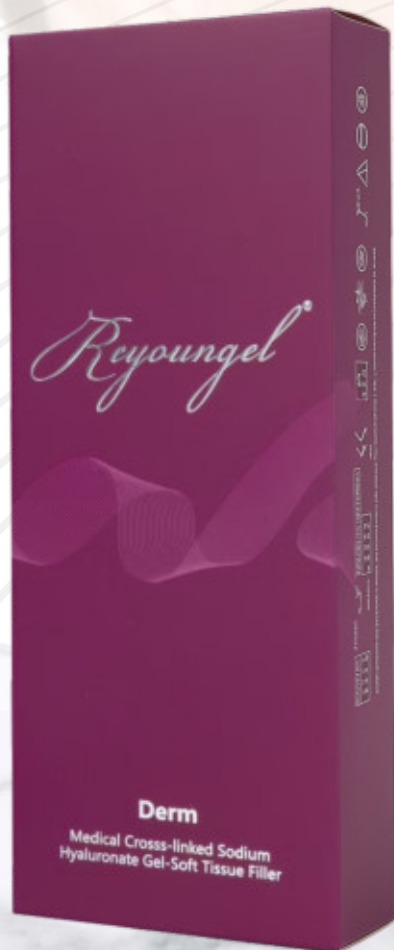

DERM



1ML, 2ML



LIP FILLER / DUDAK DOLGUSU

Product Descriptions

Function: Lip filler. Restores medium wrinkles. Provides a voluminous lip appearance.

Composition: Sodium Hyaluronate, Sodium chloride, Disodium hydrogen phosphate, Sodium dihydrogen phosphate, Sterile injection solution.

Hyaluronic Acid Density: 24 mg / ml.

Particle Size: 0.15 - 0.28 mm.

Needle Size: 27 G.

Duration: 6-18 months.

Storage Temperature: 2-30°C.

Medical cross-linked sodium hyaluronate gel soft tissue filler.

Ürün açıklaması

İşlevi: Dudak dolgusudur. Orta kırışıklıkları onarır. Hacimli dudak görünümü sağlar.

İçerik: Sodyum Hyaluronat, Sodyum klorür, Disodyum hidrojen fosfat, Sodyum dihidrojen fosfat, Steril enjeksiyon solüsyonu.

Hyaluronik Asit Yoğunluğu: 24 mg/ml.


Partikül Boyutu: 0.15 - 0.28 mm.

İğne Boyutu: 27 G.

Kalıcılık süresi: 6-18 ay.

Saklama Sıcaklığı: 2-30°C.

Tıbbi çapraz bağlı sodyum hyaluronat jel yumuşak doku dolgusu.

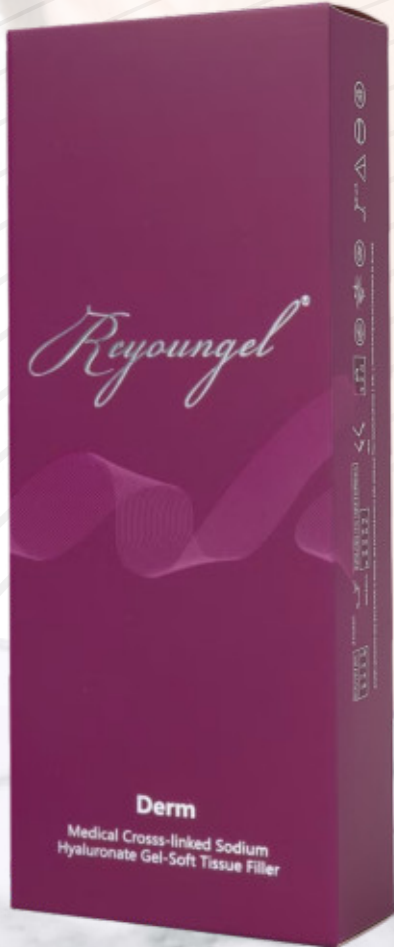

DEEP



1ML, 2ML, 10ML



ÜZ DOLĞUSU / ФИЛЛЕР ДЛЯ ЛИЦА

Məhsulun təsviri

Funksiyası: Üz dolğusudur. Orta və dərin qırıqları bərpa edir. Dodaq, yanaq, çənə, burun, ağızətrafi qırıqlar və üz ovalı nahiyyələrini bərpa edir.

Tərkib: Natrium Hialuronat, Natrium xlorid, Disodium hidrogen fosfat, Natrium dihidrogen fosfat, Steril inyeksiya məhlulu.

Hialuron Turşu Sıxlığı: 24 mg / ml.

Hissəcik Ölçüsü: 0.28 - 0.50 mm.

İynə Ölçüsü: 27 G.

Qalıcılıq müddəti: 6-18 ay.

Saxlanma Temperaturu: 2-30°C.

Tibbi çarpaz bağlı natrium hialuronat gel yumşaq toxuma doldurucusu.

Параметры

Функция: Наполнитель для лица. Раскрывает средние и глубокие морщины.

Придаёт объём губам , заполняет зоны щёк, подбородка, овала лица и коррекция носа.

Ингредиенты: Гиалуронат натрия, хлорид натрия, гидрофосфат динатрия, дигидрофосфат натрия, стерильный раствор для инъекций.

Плотность гиалуроновой кислоты: 24 мг/мл.

Размер частиц: 0.28 - 0.50 мм.

Размер иглы: 27 г.

Продолжительность: 6-18 месяцев.

Температура хранения: 2-30°C.

Медицинский гель сшитого гиалуроната натрия и наполнитель мягких тканей



DEEP



1ML, 2ML, 10ML



FACIAL FILLER / YÜZ DOLGUSU

Product Descriptions

Function: Face filler. Restores medium and deep wrinkles. Restores the lip, cheek, chin, nose, nasolabial wrinkles, and facial oval areas.

Composition: Sodium Hyaluronate, Sodium chloride, Disodium hydrogen phosphate, Sodium dihydrogen phosphate, Sterile injection solution.

Hyaluronic Acid Density: 24 mg / ml.

Particle Size: 0.28 - 0.50 mm.

Needle Size: 27 G.

Duration: 6-18 months.

Storage Temperature: 2-30°C.

Medical cross-linked sodium hyaluronate gel soft tissue filler.

Ürün açıklaması

İşlevi: Yüz dolgusudur. Orta ve derin kırışıklıkları onarır. Dudak, yanak, çene, burun, ağız çevresi kırışıklıkları ve yüz ovali bölgelerini onarır.

İçerik: Sodyum Hyaluronat, Sodyum klorür, Disodyum hidrojen fosfat, Sodyum dihidrojen fosfat, Steril enjeksiyon solüsyonu.

Hyaluronik Asit Yoğunluğu: 24 mg/ml.

Partikül Boyutu: 0.28 - 0.50 mm.

İğne Boyutu: 27 G.

Kalıcılık süresi: 6-18 ay.

Saklama Sıcaklığı: 2-30°C.

Tıbbi çapraz bağlı sodyum hyaluronat jel yumuşak doku dolgusu.



PLLA FILL



1ML



POLİLAKTİK DOLĞU / ПОЛИМОЛАКТИЧЕСКИЙ
НАПОЛНИТЕЛЬ

Məhsulun təsviri

Funksiyası: Poli-L-laktik turşudan ibarət inyeksiya üçün biostimulyatordur. Dərin dermisə və ya subkutan toxumaya inyeksiya edildikdə PLLA dərhal doldurucu effekti yaradır. Zamanla, PLLA parçalanmağa başlayır. Dəri toxuması, fibroblastları stimullaşdırır, kollageni artırır və elastik dolğunlaşdırıcı təsir göstərir.

Tərkib: Poli-L-laktik turşu mikrosferləri (PLLA) 150 mq, Çapraz bağlı hialuron turşusu (17mg/mL), Lidokain hidroxlorid (3mq/mL), Fosfat tamponu.

Hialuron Turşu Sıxlığı: 17 mg / ml.

İynə Ölçüsü: 27G.

Qalıcılıq müddəti: 18-24 ay.

Saxlanma Temperaturu: 2-30°C.

Tibbi çarpaz bağlı natrium hialuronat gel yumşaq toxuma doldurucusu.

Параметры

Функция: Это инъекционный биостимулятор, состоящий из поли-L-молочной кислоты. При введении в глубокие слои дермы или подкожную клетчатку PLLA создает немедленный эффект наполнителя. Со временем НОПЛА начинает разрушаться. Кожная ткань стимулирует фибробласты, увеличивает выработку коллагена и оказывает эластичный эффект пухлости.

Ингредиенты: Микросферы поли-L-молочной кислоты (PLLA) 150 мг сшитой гиалуроновой кислоты (17 мг/мл), лидокаина гидрохлорид (3 мг/мл), фосфатный буфер.

Плотность гиалуроновой кислоты: 17 мг/мл.

Размер иглы: 27 г.

Продолжительность: 18-24 месяцев.

Температура хранения: 2-30°C.

Медицинский гель сшитого гиалуроната натрия и наполнитель мягких тканей



PLLA FILL



POLYLACTIC ACID FILLER / POLİLAKTİK DOLGU

Product Descriptions

Function: A biostimulator for injection made of Poly-L-lactic acid. When injected into the deep dermis or subcutaneous tissue, PLLA creates an immediate filling effect. Over time, PLLA begins to break down. It stimulates skin tissue fibroblasts, increases collagen, and has an elastic plumping effect.

Composition: Poly-L-lactic acid microspheres (PLLA) 150 mg, Cross-linked hyaluronic acid (17mg/mL), Lidocaine hydrochloride (3mg/mL), Phosphate buffer.

Hyaluronic Acid Density: 17 mg / ml.

Needle Size: 27 G.

Duration: 18-24 months.

Storage Temperature: 2-30°C.

Medical cross-linked sodium hyaluronate gel soft tissue filler.

Ürün açıklaması

İşlevi: Poli-L-laktik asitten oluşan enjeksiyon için bir biyostimülatördür. Derin dermise veya subkutan dokuya enjekte edildiğinde PLLA hemen bir dolgu etkisi yaratır. Zamanla PLLA parçalanmaya başlar. Deri dokusunu, fibroblastları uyarır, kolajeni artırır ve elastik dolgunlaştırıcı bir etki gösterir.

İçerik: Poli-L-laktik asit mikrosferleri (PLLA) 150 mg, Çapraz bağlı hyaluronik asit (17mg/mL), Lidokain hidroklorür (3mg/mL), Fosfat tamponu.

Hyaluronik Asit Yoğunluğu: 17 mg/ml.

İğne Boyutu: 27G.

Kalıcılık süresi: 18-24 ay.

Saklama Sıcaklığı: 2-30°C.

Tıbbi çapraz bağlı sodyum hyaluronat jel yumuşak doku dolgusu.




CAHADERM



1ML



KALSİUM DOLĞU / КАЛЬЦИЕВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

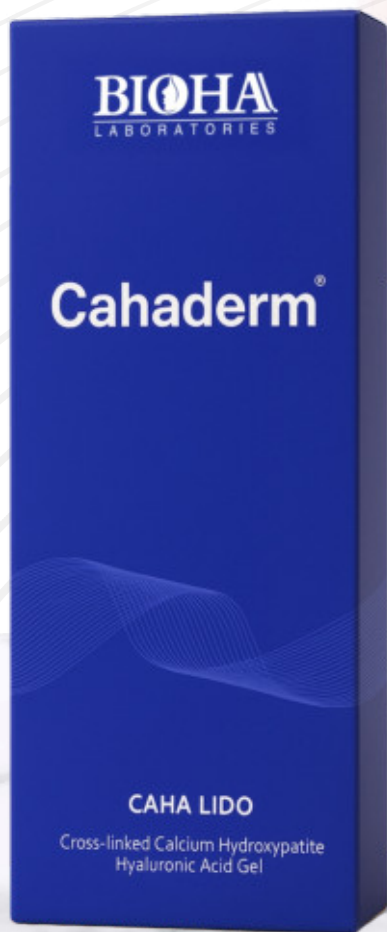

Məhsulun təsviri

Funksiyası: Kollagen və elastinin bərpasını stimullaşdırır. Üz yumşaq toxuma çatışmazlığının düzəldilməsini bərpa edir. Dərin və səthi biostimulyasiya üçün dəri altına yerləşdirilir. Çənə xəttində və pre-aurikulyar sahədə kanula ilə inyeksiya edilir.

Tərkib: 30% Kalsium hidroksiapatit mikrosferləri, 25-45 mikron diametri, 70% Çapraz bağlı natrium hialuronat gel (20mq/ml), Fosfat tamponu, Lidokain hidroxlorid (3mq/ml).

Kimyəvi Formula: $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$.

Hialuron Turşu Sıxlığı: 20 mg / ml.

İynə Ölçüsü: 27G.

Qalıcılıq müddəti: 18-24 ay.

Saxlanma Temperaturu: 2-30°C.

Tibbi çarpaz bağlı natrium hialuronat gel yumşaq toxuma doldurucusu.

Параметры

Функция: Стимулирует регенерацию коллагена и эластина. Восстанавливает дефицит мягких тканей лица. Субдермальное введение препарата с помощью конюли, даёт полную биостимуляцию клеток кожи в линии челюсти и предушной области.

Ингредиенты: 30% микросферы гидроксиапатита кальция, диаметром 25-45 микрон, 70% гель сшитого гиалуроната натрия (20 мг/мл), фосфатный буфер, гидрохлорид лидокаина (3 мг/мл).

Химическая формула: $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$.

Плотность гиалуроновой кислоты: 20 мг/мл.

Размер иглы: 27 г.

Продолжительность: 18-24 месяцев.

Температура хранения: 2-30°C.

Медицинский гель сшитого гиалуроната натрия и наполнитель мягких тканей


CAHADERM



1ML



CALCIUM FILLER / KALSİYUM DOLGU

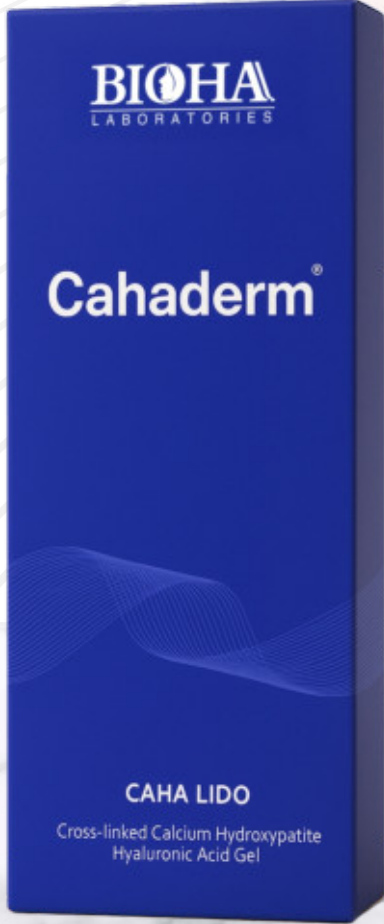

Product Descriptions

Function: Stimulates the restoration of collagen and elastin. Restores the correction of facial soft tissue deficiency. It is placed under the skin for deep and superficial biostimulation. It is injected with a cannula in the jawline and pre-auricular area.

Composition: 30% Calcium hydroxyapatite microspheres, 25-45 micron diameter, 70% Cross-linked sodium hyaluronate gel (20mg/ml), Phosphate buffer, Lidocaine hydrochloride (3mg/ml).

Chemical Formula: $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$.

Hyaluronic Acid Density: 20 mg/ml.

Needle Size: 27G.

Duration: 18-24 months.

Storage Temperature: 2-30°C.

Medical cross-linked sodium hyaluronate gel soft tissue filler.

Ürün açıklaması

İşlevi: Kolajen ve elastinin yenilenmesini uyarır. Yüzdeki yumuşak doku eksikliğinin düzeltilmesini sağlar. Derin ve yüzeysel biyostimülasyon için cilt altına yerleştirilir.

Çene hattına ve pre-auriküler bölgeye kanül ile enjekte edilir.

İçerik: %30 Kalsiyum hidroksiapatit mikrosferleri, 25-45 mikron çapında, %70 Çapraz bağlı sodyum hyaluronat jel (20mg/ml), Fosfat tamponu, Lidokain hidroklorür (3mg/ml).

Kimyasal Formül: $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$.

Hyaluronik Asit Yoğunluğu: 20 mg/ml.

İğne Boyutu: 27G.

Kalıcılık süresi: 18-24 ay.

Saklama Sıcaklığı: 2-30°C.

Tıbbi çapraz bağlı sodyum hyaluronat jel yumuşak doku dolgusu.

SUB SKIN



2ML, 10ML, 20ML



BƏDƏN DOLĞUSU / НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА

Məhsulun təsviri

Funksiyası: Bədən dolğusudur(Sərt Dolğu).Lokal depressiya, qalça böyüməsində və sərt üz ovalında istifadə olunur.

Tərkib: Natrium Hialuronat, Natrium xlorid, Disodium hidrogen fosfat, Natrium dihidrogen fosfat, Steril inyeksiya məhlulu.

Hialuron Turşu Sıxlığı: 30 mg / ml.

Hissəcik Ölçüsü: 1.25 - 2.0 mm.

Kanyula Ölçüsü: 22G-70mm , 25G-50mm.

Qalıcılıq müddəti: 9-18 ay.

Saxlanma Temperaturu: 2-30°C.

Tibbi çarpaz bağlı natrium hialuronat gel yumşaq toxuma doldurucusu.

Параметры

Функция: Филлер для тела (Плотный филлер). Используется при локальной депрессии, для увеличения ягодиц и для создания жесткого овала лица.

Состав: Гиалуронат натрия, хлорид натрия, динатрийфосфат, дигидрофосфат натрия, стерильный раствор для инъекций.

Плотность гиалуроновой кислоты: 30 мг/мл.

Размер частиц: 1.25 - 2.0 мм.

Размер канюли: 22G-70мм, 25G-50мм.

Срок действия: 9-18 месяцев.

Температура хранения: 2-30°C.

Медицинский гель сшитого гиалуроната натрия и наполнитель мягких тканей

BIOHA
LABORATORIES

Reyounger®

CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

subskin

1x20ml

SUB SKIN



2ML, 10ML, 20ML



BODY FILLER / VÜCUT DOLGUSU

Product Descriptions

Function: Body filler (Hard Filler). Used for local depression, buttock augmentation, and for a firm facial oval.

Composition: Sodium Hyaluronate, Sodium chloride, Disodium hydrogen phosphate, Sodium dihydrogen phosphate, Sterile injection solution.

Hyaluronic Acid Density: 30 mg / ml.

Particle Size: 1.25 - 2.0 mm.

Needle Size: 22G-70mm , 25G-50mm.

Duration: 9-18 months.

Storage Temperature: 2-30°C.

Medical cross-linked sodium hyaluronate gel soft tissue filler.

Ürün açıklaması

İşlevi: Vücut dolgusudur (Sert Dolgu). Lokal depresyon, kalça büyütme ve sert yüz ovalinde kullanılır.

İçerik: Sodyum Hyaluronat, Sodyum klorür, Disodyum hidrojen fosfat, Sodyum dihidrojen fosfat, Steril enjeksiyon solüsyonu.

Hyaluronik Asit Yoğunluğu: 30 mg/ml.

Partikül Boyutu: 1.25 - 2.0 mm.

Kanüle Boyutu: 22G-70mm , 25G-50mm.

Kalıcılık süresi: 9-18 ay.

Saklama Sıcaklığı: 2-30°C.

Tıbbi çapraz bağlı sodyum hyaluronat jel yumuşak doku dolgusu.

BIOHA
LABORATORIES

Reyoungel®

CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

subskin

1x20ml

PURE HA



2ML



BIOREVİTALİZASİYA / БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

Məhsulun təsviri

Funksiyası: Qırışların pigmentasiyasını azaldır, parlaqlığı bərpa edir, dərinə nəmləndirir və qidalandırır. Üz, boyun, dekolitə bölgəsi və əllərin üstünə inyeksiya edilir. Dəridə olan kiçik qırışları açır, elastiklik verir, məsamələri yığır, rəng tonunu bərabərləşdirir.

Tərkib: Qarışıq molekul hialuron turşusu (Amin turşuları ilə hialuron turşusu).

Hialuron Turşu Sıxlığı: 15 mg / ml.

İynə Ölçüsü: 27G, 30G

Qalıcılıq müddəti: 6-18 ay.

Saxlanma Temperaturu: 2-30°C.

Tibbi çarpaz bağlı natrium hialuronat gel yumşaq toxuma doldurucusu.

Параметры

Функция: Обновление кожи на клеточном уровне, раскрытие мимических морщин, эластичность, сужение пор, увлажнение и питание а так же придаёт блеск и ровный тон. Применяют препарат в зону лица, рук, шеи и декольте.

Ингредиенты: Смешанно-молекулярная гиалуроновая кислота (Гиалуроновая кислота с аминокислотами).

Плотность гиалуроновой кислоты: 15 мг/мл.

Размер иглы: 27г, 30г.

Продолжительность: 6-18 месяцев.

Температура хранения: 2-30°C.

Медицинский гель сшитого гиалуроната натрия и наполнитель мягких тканей

Reyoungel®



BIONA
LABORATORIES

MESO PURE HA

NON-CROSSLINKED HYALURONIC ACID

PURE HA



2ML



BIOREVITALIZATION / BİOREVİTALİZASYON

Product Descriptions

Function: Reduces the pigmentation of wrinkles, restores radiance, moisturizes and nourishes the skin. It is injected into the face, neck, décolleté area, and the top of the hands. It smooths small wrinkles on the skin, gives elasticity, tightens pores, and evens out the color tone.

Composition: Mixed molecule hyaluronic acid (Hyaluronic acid with Amino acids).

Hyaluronic Acid Density: 15 mg / ml.

Needle Size: 27G, 30G.

Duration: 6-18 months.

Storage Temperature: 2-30°C.

Medical cross-linked sodium hyaluronate gel soft tissue filler.

Ürün açıklaması

İşlevi: Kırışıklıkların pigmentasyonunu azaltır, parlaklığı geri kazandırır, cildi nemlendirir ve besler. Yüz, boyun, dekolte bölgesi ve ellerin üzerine enjekte edilir. Ciltteki küçük kırışıklıkları açar, elastikiyet kazandırır, gözenekleri sıkılaştırır, renk tonunu eşitler.

İçerik: Karışık molekülü hyaluronik asit (Amino asitli hyaluronik asit).

Hyaluronik Asit Yoğunluğu: 15 mg/ml.

İğne Boyutu: 27G,30G

Kalıcılık süresi: 6-18 ay.

Saklama Sıcaklığı: 2-30°C.

Tıbbi çapraz bağlı sodyum hyaluronat jel yumuşak doku dolgusu.

Reyoungel®



BIOHA
LABORATORIES

MESO PURE HA

NON-CROSSLINKED HYALURONIC ACID

REVITAL



2ML



5 NÖQTƏ LİFTİNG / 5-ТОЧЕЧНЫЙ ЛИФТИНГ

Məhsulun təsviri

Funksiyası: Dərini gücləndirir, nəmləndirir və işıqlandırır. Üz sallanmasını və boyun xəttlərini bərpa edir, yaşlanma əleyhinədir və 5 nöqtə lifting effekti verir. Toxumalararası nəmi balanslaşdırır, dəri tonunu bərabərləşdirir, həssas dəri bariyerini bərpa edir, qırıqları azaldır və ekzema sədəf kimi narahatlıqların təsirini azaldır.

Tərkib: 32mg(H-HA)+32mg(L-HA)/2ml.

Protokol: Üzün hər tərəfinə 5 nöqtədən inyeksiya edin, hər nöqtə 0,2 ml. Boyunda 10 nöqtə, hər biri nöqtə 0,2 ml; Üz və boyun üçün cəmi 4 ml.

Hialuron Turşu Sıxlığı: 32 mg / ml.

İynə Ölçüsü: 27G, 30G.

Qalıcılıq müddəti: 6-18 ay.

Saxlanma Temperaturu: 2-30°C.

Tibbi çarpaz bağlı natrium hialuronat gel yumşaq toxuma doldurucusu.

Параметры

Функция: Укрепляет, увлажняет и осветляет кожу. Восстанавливает провисание лица и линии шеи, омолаживающий, 5-ти точечный лифтинг-эффект. Балансирует межтканевую влагу, выравнивает тон кожи, восстанавливает барьер чувствительной кожи, уменьшает морщины и уменьшает последствия таких проблем, как экзема и псориаз.

Ингредиенты: 32 мг (H-HA) + 32 мг (L-HA)/2 мл.

Протокол: Ввести 5 точек с каждой стороны лица по 0,2 мл в каждую точку. 10 точек на шее, каждая точка по 0,2 мл; Всего 4 мл для лица и шеи.

Плотность гиалуроновой кислоты: 32 мг/мл

Размер иглы: 27г, 30г

Продолжительность: 6-18 месяцев

Температура хранения: 2-30°C.

Медицинский гель сшитого гиалуроната натрия и наполнитель мягких тканей

BIONA
LABORATORIES

Reyoungel®

Revital  

2ml

REVITAL



2ML



5-POINT LIFTING / 5-NOKTA LİFTİNG

Product Descriptions

Function: Strengthens, moisturizes, and brightens the skin. It restores facial sagging and neck lines, is anti-aging, and gives a 5-point lifting effect. It balances interstitial moisture, evens out skin tone, restores the sensitive skin barrier, reduces wrinkles, and lessens the effects of discomforts like eczema and psoriasis.

Composition: 32mg(H-HA) + 32mg(L-HA) / 2ml.

Protocol: Inject from 5 points on each side of the face, 0.2 ml per point. On the neck, 10 points, 0.2 ml per point ; a total of 4 ml for the face and neck.

Hyaluronic Acid Density: 32 mg / ml.

Needle Size: 27G, 30G.

Duration: 6-18 months.

Storage Temperature: 2-30°C.

Medical cross-linked sodium hyaluronate gel soft tissue filler.

Ürün açıklaması

İşlevi: Cildi güçlendirir, nemlendirir ve aydınlatır. Yüz sarkmalarını ve boyun hatlarını toparlar, yaşlanma karşıtıdır ve 5 nokta lifting etkisi sağlar. Doku arası nem dengesini düzenler, cilt tonunu eşitler, hassas cilt bariyerini onarır, kırışıklıkları azaltır ve egzama, sedef gibi rahatsızlıkların etkilerini hafifletir.

İçerik: 32mg (H-HA) + 32mg (L-HA) / 2ml

Protokol: Yüzün her iki tarafına 5 noktadan enjeksiyon yapılır, her noktaya 0,2 ml. Boyun bölgesinde 10 nokta, her birine 0,2 ml. Yüz ve boyun için toplam 4 ml.

Hyaluronik Asit Yoğunluğu: 32 mg / ml.

İğne Boyutu: 27G,30G.

Kalıcılık süresi: 6-18 ay.

Saklama Sıcaklığı: 2-30°C.

Tıbbi çapraz bağlı sodyum hyaluronat jel yumuşak doku dolgusu.

BIOHA
LABORATORIES

Reyoungel®

Revital  

2ml

HYDROPRO



2,5ML



7 NÖQTƏ LİFTİNG / 7 ТОЧЕК ЛИФТИНГ

Məhsulun təsviri

Funksiyası: Dərini gücləndirir, nəmləndirir və işıqlandırır. Üz sallanmasını və boyun xəttlərini bərpa edir, yaşlanma əleyhinədir, 7 nöqtə lifting effekti verir. Dərinin elastikliyi və parlaqlığını artırır.

Tərkib: 3,2% Yüksək və Aşağı Molekulyar Çəkili Hialuron turşusu, 7 amin turşusu (Glisin, L-Prolin, L-Leucine, L-Lizin HCL, L-Alanin, Valin, L-Arginin HCL), 3 peptid (Acetildekaeptid 3, Oligopeptid 24, Asetyl Tetrapeptid 5).

Protokol: Üzün hər iki tərəfinə 6 nöqtədən inyeksiya edin, hər nöqtə 0,2 ml. Çənə bölgəsinə 1 nöqtədən 0,1 ml; Bütün üz üçün cəmi 2,5 ml.

Hialuron Turşu Sıxlığı: 3.2 %

İynə Ölçüsü: 27G, 30G

Qalıcılıq müddəti: 6-18 ay.

Saxlanma Temperaturu: 2-30°C.

Tibbi çarpaz bağlı natrium hialuronat gel yumşaq toxuma doldurucusu.

Параметры

Функция: Укрепляет, увлажняет и осветляет кожу. Устраняет провисание кожи лица и морщины на шее, обладает антивозрастным действием, дает эффект 7-точечного лифтинга. Повышает эластичность и сияние кожи.

Состав: 3,2% высоко- и низкомолекулярная гиалуроновая кислота, 7 аминокислот (глицин, L-пролин, L-лейцин, L-лизин HCL, L-аланин, валин, L-аргинин HCL), 3 пептида (Ацетилдекаептид 3, Олигопептид 24, Ацетил Тетрапептид 5).

Протокол: Ввести По 6 Точкам На Каждой Стороне Лица По 0,2 Мл. В Область Подбородка 1 Точка - 0,1 Мл. Общий Объем На Все Лицо - 2,5 Мл.

Плотность гиалуроновой кислоты: 3.2 %.

Размер иглы: 27G, 30G.

Температура хранения: 2-30°C.

Медицинский гель сшитого гиалуроната натрия и наполнитель мягких тканей

BIOHA
LABORATORIES

Reyoungel®

3.2% HA (HMW & LMW) + 7 Amino Acids + 3 Peptides

HydroPro

HYDROPRO



2,5ML



7-POINT LIFTING / 7-NOKTA LİFTİNG

Product Descriptions

Function: Strengthens, moisturizes, and brightens the skin. It restores facial sagging and neck lines, is anti-aging, and gives a 7-point lifting effect. It increases the skin's elasticity and radiance.

Composition: 3.2% High and Low Molecular Weight Hyaluronic acid, 7 amino acids (Glycine, L-Proline, L-Leucine, L-Lysine HCL, L-Alanine, Valine, L-Arginine HCL), 3 peptides (Acetyldecapeptide 3, Oligopeptide 24, Acetyl Tetrapeptide 5).

Protocol: Inject from 6 points on each side of the face, 0.2 ml per point. 0.1 ml from 1 point to the chin area; a total of 2.5 ml for the whole face.

Hyaluronic Acid Density: 3.2 %

Needle Size: 27G, 30G

Duration: 6-18 months.

Storage Temperature: 2-30°C.

Medical cross-linked sodium hyaluronate gel soft tissue filler.

Ürün açıklaması

İşlevi: Cildi güçlendirir, nemlendirir ve aydınlatır. Yüz sarkmasını ve boyun çizgilerini onarır, yaşlanma karşıtıdır, 7 nokta lifting etkisi verir. Cildin elastikiyetini ve parlaklığını artırır.

İçerik: %3,2 Yüksek ve Düşük Moleküler Ağırlıklı Hyaluronik asit, 7 amino asit (Glisin, L-Prolin, L-Lösin, L-Lizin HCL, L-Alanin, Valin, L-Arjinin HCL), 3 peptid (Asetildekapeptid 3, Oligopeptid 24, Asetil Tetrapeptid 5).

Protokol: Yüzün her iki tarafına 6 noktadan enjeksiyon yapın, her noktaya 0,2 ml. Çene bölgesine 1 noktadan 0,1 ml; Tüm yüz için toplam 2,5 ml.

Hyaluronik Asit Yoğunluğu: 3.2 %

İğne Boyutu: 27G,30G.

Kalıcılık süresi: 6-18 ay.

Saklama Sıcaklığı: 2-30°C.

Tıbbi çapraz bağlı sodyum hyaluronat jel yumuşak doku dolgusu.

BIOHA
LABORATORIES

Reyoungel®

3.2% HA (HMW & LMW) + 7 Amino Acids + 3 Peptides

HydroPro

PURE HA



5ML



БІОРЕВІТАЛІЗАЦІЯ / БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

Мəhsulun təsviri

Funksiyası: Xüsusi həssas, quru dəriləri nəmləndirir, qidalandırır və ləkələrin həllində köməklik göstərir. Günəş yanığından sonra dəri bərpası üçün tövsiyyə edilir. Makromolekullar nəmliyi uzun müddət saxlayır, kiçik molekullar tez nəmlənir və mikro molekullar suyu nəmləndirmək və bağlamaq üçün dermisə nüfuz edir. Sərbəst radikalları aradan qaldırır və hüceyrələrin redoksunu təşviq edir, dərinin canlılığını qoruyur və yaşlanma prosesini geri qaytarmağa kömək edir.

Tərkib: Yüksək Molekullu HA, Orta Molekul HA-TUM/HA-T, Asetilləşdirilmiş HA, Aşağı Molekulyar HA-TLM, MINI Hidrolizləşdirilmiş HA.

Protokol: Bir dəfə müalicə üçün 1-2 flakon, yuxarı dermisə və ya epidermis və dermisin birləşməsinə yeridilir. 2-3 həftə inyeksiya intervalı tövsiyə olunur. Beş dəfə tam müalicə kursudur.

Birinci Mərhələ: Üç dəfə intensiv müalicə. (Dəri daralan məsamələrlə nəmlənir və parlaqlaşır.)

İkinci Mərhələ: 1 aylıq fasilə ilə iki dəfə. (Fibroblastlar bərpa olunur və dəri elastik olur.)

Üçüncü Mərhələ: Təsiri gücləndirmək üçün iki ayda bir dəfə. (Fibroblastlar dərinə parlaqlaşdırmaq və sıxlaşdırmaq, quru və incə xəttləri azaltmaq üçün kollagen və elastin ifraz etməyə davam edir.)

Meso Needle, Meso Gun, Derma Roller və Derma Pen ilə istifadə oluna bilər

Параметры

Функция: Увлажняет, питает и помогает растворить пятна, особенно чувствительную и сухую кожу. Рекомендуется для регенерации кожи после солнечных ожогов. Макромолекулы долго сохраняют влагу, мелкие молекулы быстро увлажняются, а микромолекулы проникают в дерму, увлажняя и связывая воду. Устраняет свободные радикалы и способствует окислительно-восстановительному процессу клеток, сохраняет жизнеспособность кожи и помогает обратить вспять процесс старения.

Ингредиенты: высокомолекулярная HA, средномолекулярная HA-TUM/HA-T, ацетилированная HA, низкомолекулярная HA-TLM, гидролизованная MINI HA.

Протокол: За одну процедуру вводят 1-2 флакона в верхний слой дермы или в эпидермис и дерму. Рекомендуемый интервал между инъекциями составляет 2-3 недели. Пять раз – полный курс лечения.

Первый этап: Трехкратное интенсивное лечение. (Кожа увлажняется, осветляется, поры сужаются.)

Второй этап: дважды с интервалом в 1 месяц. (Фибробласты регенерируются и кожа становится эластичной.)

Третий этап: Один раз в два месяца для усиления эффекта.

(Фибробласты продолжают выделять collagen и эластин, чтобы осветлить и подтянуть кожу, а также уменьшить сухость и морщины.)

Может использоваться с мезо-иглой, мезо-пистолетом, дермароллером и дермапеном.



PURE HA



5ML



BIOREVITALIZATION / BİOREVİTALİZASYON

Product Descriptions

Function: Moisturizes and nourishes especially sensitive, dry skin and helps in solving the problem of spots. It is recommended for skin repair after sunburn. Macromolecules retain moisture for a long time, small molecules moisturize quickly, and micro molecules penetrate the dermis to moisturize and bind water. It eliminates free radicals and promotes cell redox, preserves the vitality of the skin, and helps to reverse the aging process.

Composition: High Molecular HA, Medium Molecule HA-TUM/HA-T, Acetylated HA, Low Molecular HA-TLM, MINI Hydrolyzed HA.

Protocol: 1-2 vials for one treatment, injected into the upper dermis or at the junction of the epidermis and dermis. A 2-3 week injection interval is recommended. A full course of treatment is five times.

Phase One: Three intensive treatments (The skin becomes moisturized and radiant with tightened pores.).

Phase Two: Twice with a 1-month interval (Fibroblasts are restored and the skin becomes elastic.).

Phase Three: Once every two months to enhance the effect (Fibroblasts continue to secrete collagen and elastin to make the skin shiny and firm, reducing dry and fine lines.).

Can be used with Meso Needle, Meso Gun, Derma Roller, and Derma Pen.

Ürün açıklaması

İşlevi: Özellikle hassas, kuru ciltleri nemlendirir, besler ve lekelerin çözümüne yardımcı olur. Güneş yanığı sonrası cilt onarımı için tavsiye edilir. Makromoleküller nemi uzun süre tutar, küçük moleküller hızla nemlenir ve mikro moleküller nemi dermise nüfuz eder. Serbest radikalleri ortadan kaldırır ve hücrelerin redoksunu teşvik eder, cildin canlılığını korur ve yaşlanma sürecini geri döndürmeye yardımcı olur.

İçerik: Yüksek Moleküllü HA, Orta Moleküllü HA-TUM/HA-T, Asetillenmiş HA, Düşük Moleküllü HA-TLM, MINI Hidrolize HA.

Protokol: Bir seanslık tedavi için 1-2 flakon, üst dermise veya epidermis ile dermisin birleşim yerine enjekte edilir. 2-3 hafta enjeksiyon aralığı tavsiye edilir. Beş seanslık tam bir tedavi kurdür.

Birinci Aşama: Üç seans yoğun tedavi. (Cilt sıkılaştıran gözeneklerle nemlenir ve parlar.)

İkinci Aşama: 1 ay ara ile iki seans. (Fibroblastlar onarılır ve cilt elastik hale gelir.)

Üçüncü Aşama: Etkiyi güçlendirmek için iki ayda bir seans. (Fibroblastlar cildi parlatmak ve sıkılaştırmak, kuru ve ince çizgileri azaltmak için kolajen ve elastin salgılamaya devam eder.)

Meso Needle, Meso Gun, Derma Roller ve Derma Pen ile kullanılabilir.

Reyoungel®
PURE HA
SKIN REJUVENATION SOLUTION

5ml x 10 units



ANTI-AGING



4ML



KOLLAGEN BƏRPASI / РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЛЛАГЕНА

Məhsulun təsviri

Funksiyası: Amin turşusu kollagenlə birlikdə bütün üz üçün yaşlanma əleyhinə, xüsusən də qaranlıq göz çevrəsi üçün iki qat təsir edir. Yaşlanmaya qarşı kollagen tərkibli məhluldur və gözaltı qaralmaların həllində köməklik göstərir.

Tərkib: Orta Molekul HA-THM/HA-T, Aşağı Molekulyar HA-TLM, Mini Hidrolizləşdirilmiş HA, Prolin, Leysin, Metionin, Histidin, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, K+, Hidrolizə edilmiş kollagen

Protokol: Bir dəfə müalicə üçün 1-2 flakon, yuxarı dermisə və ya epidermis və dermisin birləşməsinə yeridilir. 2-3 həftə inyeksiya intervalı tövsiyə olunur. Beş dəfə tam müalicə kursudur.

Birinci Mərhələ: Üç dəfə intensiv müalicə. (Dəri daralan məsamələrlə nəmlənir və parlaqlaşır.)

İkinci Mərhələ: 1 aylıq fasilə ilə iki dəfə. (Fibroblastlar bərpa olunur və dəri elastik olur.)

Üçüncü Mərhələ: Təsiri gücləndirmək üçün iki ayda bir dəfə. (Fibroblastlar dərinə parlaqlaşdırmaq və sıxlaşdırmaq, quru və incə xəttləri azaltmaq üçün kollagen və elastin ifraz etməyə davam edir.)

Meso Needle, Meso Gun, Derma Roller və Derma Pen ilə istifadə oluna bilər.

Параметры

Функция: Аминокислота вместе с коллагеном оказывает двойной антивозрастной эффект на все лицо, особенно на темные круги под глазами. Это антивозрастной коллагенсодержащий раствор, помогающий избавиться от темных кругов под глазами.

Ингредиенты: среднечисленный HA-THM/HA-T, низкочисленный HA-TLM, мини-гидролизованная ГК, пролин, лейцин, метионин, гистидин, витамин А, витамин В1, витамин В2, К+, гидролизованный коллаген.

Протокол: За одну процедуру вводят 1-2 флакона в верхний слой дермы или в эпидермис и дерму. Рекомендуемый интервал между инъекциями составляет 2-3 недели. Пять раз – полный курс лечения.

Первый этап: Трехкратное интенсивное лечение. (Кожа увлажняется, осветляется, поры сужаются.)

Второй этап: дважды с интервалом 1 месяц. (Фибробласты регенерируются и кожа становится эластичной.)

Третий этап: Один раз в два месяца для усиления эффекта. (Фибробласты продолжают выделять коллаген и эластин, чтобы осветлить и подтянуть кожу, а также уменьшить сухость и морщины.)

Может использоваться с мезо-иглой, мезо-пистолетом, дермароллером и дермапеном.

Reyoungel®

MESO ANTI-AGING

SKIN REJUVENATION SOLUTION

4ml x 10 units



ANTI-AGING



4ML



COLLAGEN RESTORATION / KOLLAJEN REJENERASYONU

Product Descriptions

Function: Moisturizes and nourishes especially sensitive, dry skin and helps in solving the problem of spots. It is recommended for skin repair after sunburn. Macromolecules retain moisture for a long time, small molecules moisturize quickly, and micro molecules penetrate the dermis to moisturize and bind water. It eliminates free radicals and promotes cell redox, preserves the vitality of the skin, and helps to reverse the aging process.

Composition: High Molecular HA, Medium Molecule HA-TUM/HA-T, Acetylated HA, Low Molecular HA-TLM, MINI Hydrolyzed HA.

Protocol: 1-2 vials for one treatment, injected into the upper dermis or at the junction of the epidermis and dermis. A 2-3 week injection interval is recommended. A full course of treatment is five times.

Phase One: Three intensive treatments (The skin becomes moisturized and radiant with tightened pores.).

Phase Two: Twice with a 1-month interval (Fibroblasts are restored and the skin becomes elastic.).

Phase Three: Once every two months to enhance the effect (Fibroblasts continue to secrete collagen and elastin to make the skin shiny and firm, reducing dry and fine lines.).

Can be used with Meso Needle, Meso Gun, Derma Roller, and Derma Pen.

Ürün açıklaması

İşlevi: Amino asit, kolajen ile birlikte tüm yüz için yaşlanma karşıtı, özellikle de koyu göz çevresi için çift etki gösterir. Yaşlanmaya karşı kolajen içeren bir solüsyondur ve göz altı morluklarının giderilmesine yardımcı olur.

İçerik: Orta Moleküllü HA-THM/HA-T, Düşük Moleküllü HA-TLM, Mini Hidrolize HA, Prolin, Lösin, Metionin, Histidin, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, K+, Hidrolize kolajen.

Protokol: Bir seanslık tedavi için 1-2 flakon, üst dermise veya epidermis ile dermisin birleşim yerine enjekte edilir. 2-3 hafta enjeksiyon aralığı tavsiye edilir. Beş seanslık tam bir tedavi kürüdür.

Birinci Aşama: Üç seans yoğun tedavi. (Cilt sıkılaştıran gözeneklerle nemlenir ve parlar.)

İkinci Aşama: 1 ay ara ile iki seans. (Fibroblastlar onarılır ve cilt elastik hale gelir.)

Üçüncü Aşama: Etkiyi güçlendirmek için iki ayda bir seans. (Fibroblastlar cildi parlatmak ve sıkılaştırmak, kuru ve ince çizgileri azaltmak için kolajen ve elastin salgılamaya devam eder.)

Meso Needle, Meso Gun, Derma Roller ve Derma Pen ile kullanılabilir.



BRIGHTENING



4ML



AĞARDICI MEZO / ОТБЕЛИВАЮЩИЙ МЕЗО

Məhsulun təsviri

Funksiyası: Dərini ağardır, parlaqlaşdırır və pigmentasiyanı bərpa edir. Melaninin təsirli bir şəkildə qarşısını alır. Xarici mühitin səbəb olduğu dəri yaşlanmasını aradan qaldırır. Dəriyə fərahlıq gətirir.

Tərkib: Orta Molekul HA-THM/HA-T, Aşağı Molekullu HA-TLM, Mini Hidrolizləşdirilmiş HA, Prolin, Taurin, Lösin, Metionin, Lizin, Traneksamik turşu, Kojik turşusu, 5% Arbutin, Sistein hidroxlorid, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, K+.

Protokol: Bir dəfə müalicə üçün 1-2 flakon, yuxarı dermisə və ya epidermis və dermisin birləşməsinə yeridilir. 2-3 həftə inyeksiya intervalı tövsiyə olunur. Beş dəfə tam müalicə kursudur.

Birinci Mərhələ: Üç dəfə intensiv müalicə. (Dəri daralan məsamələrlə nəmlənir və parlaqlaşır.)

İkinci Mərhələ: 1 aylıq fasilə ilə iki dəfə. (Fibroblastlar bərpa olunur və dəri elastik olur.)

Üçüncü Mərhələ: Təsiri gücləndirmək üçün iki ayda bir dəfə. (Fibroblastlar dərini parlaqlaşdırmaq və sıxlaşdırmaq, quru və incə xəttləri azaltmaq üçün kollagen və elastin ifraz etməyə davam edir.)

Meso Needle, Meso Gun, Derma Roller və Derma Pen ilə istifadə oluna bilər

Параметры

Функция: Отбеливает, осветляет и восстанавливает пигментацию. Эффективно предотвращает появление меланина. Устраняет старение кожи, вызванное внешней средой. Придает коже свежесть.

Ингредиенты: среднемолекулярный HA-THM/HA-T, низкомолекулярный HA-TLM, мини-гидролизированный HA, пролин, таурин, лейцин, метионин, лизин, транексамовая кислота, койевая кислота, 5% арбутин, гидрохлорид цистеина, витамин А, витамин В1, витамин В2, К+.

Протокол: За одну процедуру вводят 1-2 флакона в верхний слой дермы или в эпидермис и дерму. Рекомендуемый интервал между инъекциями составляет 2-3 недели. Пять раз – полный курс лечения.

Первый этап: Трехкратное интенсивное лечение. (Кожа увлажняется, осветляется, поры сужаются.)

Второй этап: дважды с интервалом 1 месяц. (Фибробласты регенерируются и кожа становится эластичной.)

Третий этап: Один раз в два месяца для усиления эффекта. (Фибробласты продолжают выделять collagen и эластин, чтобы осветлить и подтянуть кожу, а также уменьшить сухость и морщины.)

Может использоваться с мезо-иглой, мезо-пистолетом, дермароллером и дермапеном.



BRIGHTENING



4ML



WHITENING MESOTHERAPY / BEYAZLATICI
MEZO

Product Descriptions

Function: The amino acid together with collagen has a double anti-aging effect for the whole face, especially for dark eye circles. It is an anti-aging solution containing collagen and helps to solve under-eye darkening.

Composition: Medium Molecule HA-THM/HA-T, Low Molecular HA-TLM, Mini Hydrolyzed HA, Proline, Leucine, Methionine, Histidine, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, K+, Hydrolyzed collagen.

Protocol: 1-2 vials for one treatment, injected into the upper dermis or at the junction of the epidermis and dermis. A 2-3 week injection interval is recommended. A full course of treatment is five times.

Phase One: Three intensive treatments (The skin becomes moisturized and radiant with tightened pores.).

Phase Two: Twice with a 1-month interval (Fibroblasts are restored and the skin becomes elastic.).

Phase Three: Once every two months to enhance the effect (Fibroblasts continue to secrete collagen and elastin to make the skin shiny and firm, reducing dry and fine lines.).

Can be used with Meso Needle, Meso Gun, Derma Roller, and Derma Pen.

Ürün açıklaması

İşlevi: Cildi beyazlatır, parlatır ve pigmentasyonu onarır. Melanin oluşumunu etkili bir şekilde engeller. Dış etkenlerin neden olduğu cilt yaşlanmasını giderir. Cilde ferahlık verir.

İçerik: Orta Moleküllü HA-THM/HA-T, Düşük Moleküllü HA-TLM, Mini Hidrolize HA, Prolin, Taurin, Lösin, Metionin, Lizin, Traneksamik asit, Kojik asit, %5 Arbutin, Sistein hidroklorür, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, K+.

Protokol: Bir seanslık tedavi için 1-2 flakon, üst dermise veya epidermis ile derminin birleşim yerine enjekte edilir. 2-3 hafta enjeksiyon aralığı tavsiye edilir. Beş seanslık tam bir tedavi kürüdür.

Birinci Aşama: Üç seans yoğun tedavi. (Cilt sıkılaştıran gözeneklerle nemlenir ve parlar.)

İkinci Aşama: 1 ay ara ile iki seans. (Fibroblastlar onarılır ve cilt elastik hale gelir.)

Üçüncü Aşama: Etkiyi güçlendirmek için iki ayda bir seans. (Fibroblastlar cildi parlatmak ve sıkılaştırmak, kuru ve ince çizgileri azaltmak için kolajen ve elastin salgılamaya devam eder.)

Meso Needle, Meso Gun, Derma Roller ve Derma Pen ile kullanılabilir.



LIFTING



4ML



LIFTİNG MEZO / ЛИФТИНГ МЕЗО

Məhsulun təsviri

Funksiyası: Dərini qaldırır yeni lifting effekti verir,nəmləndirir,oksidləşmə və məsəmələri kiçildir, müxtəlif amin turşuları ilə kollagenin bərpasını təşvik edir,dəri toxumasını yaxşılaşdırır və elastikliyi artırır.

Tərkib: Yüksək/Orta Molekullu HA-THM/HA-T,Aşağı Molekullu HA-TLM,Mini Hidrolizləşdirilmiş HA, Prolin, Tryptofan, Alanin, izolösin, leysin, Aspartik turşu, Tirozin, Glutamik turşu, Fenilalanin, Arginin HCl, Lizin HCl, Valin, Treonin, Histidin HCl, Serine, Metionin, Sistin, Glisin, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Na+.

Protokol: Bir dəfə müalicə üçün 1-2 flakon, yuxarı dermisə və ya epidermis və dermisin birləşməsinə yeridilir. 2-3 həftə inyeksiya intervalı tövsiyə olunur. Beş dəfə tam müalicə kursudur.

Birinci Mərhələ: Üç dəfə intensiv müalicə. (Dəri daralan məsəmələrlə nəmlənir və parlaqlaşır.)

İkinci Mərhələ: 1 aylıq fasilə ilə iki dəfə. (Fibroblastlar bərpa olunur və dəri elastik olur.)

Üçüncü Mərhələ: Təsiri gücləndirmək üçün iki ayda bir dəfə. (Fibroblastlar dərini parlaqlaşdırmaq və sıxlaşdırmaq, quru və incə xəttləri azaltmaq üçün kollagen və elastin ifraz etməyə davam edir.)

Meso Needle,Meso Gun,Derma Roller və Derma Pen ilə istifadə oluna bilər.

Параметры

Функция: Подтягивает кожу, т.е. дает эффект лифтинга, увлажняет, уменьшает окисление и поры, стимулирует регенерацию коллагена различными аминокислотами, улучшает текстуру кожи и повышает эластичность.

Ингредиенты: Высоко/среднемoleкулярный HA-THM/HA-T, низкомолекулярный HA-TLM, мини-гидролизированный HA, пролин, триптофан, аланин, изолейцин, лейцин, аспарагиновая кислота, тирозин, глутаминовая кислота, фенилаланин, аргинин гидрохлорид, лизин гидрохлорид, валин, треонин, гистидин гидрохлорид, серин, Метионин, цистин, глицин, витамин А, витамин В1, витамин В2, Na+.

Протокол: За одну процедуру вводят 1-2 флакона в верхний слой дермы или в эпидермис и дерму. Рекомендуемый интервал между инъекциями составляет 2-3 недели. Пять раз – полный курс лечения.

Первый этап: Трехкратное интенсивное лечение. (Кожа увлажняется, осветляется, поры сужаются.)

Второй этап: дважды с интервалом 1 месяц. (Фибробласты регенерируются и кожа становится эластичной.)

Третий этап: Один раз в два месяца для усиления эффекта. (Фибробласты продолжают выделять коллаген и эластин, чтобы осветлить и подтянуть кожу, а также уменьшить сухость и морщины.)

Может использоваться с мезо-иглой, мезо-пистолетом, дермароллером и дермапеном.



LIFTING



4ML



LIFTING MESOTHERAPY / LİFTİNG MEZO

Product Descriptions

Function: The amino acid together with collagen has a double anti-aging effect for the whole face, especially for dark eye circles. It is an anti-aging solution containing collagen and helps to solve under-eye darkening.

Composition: Medium Molecule HA-THM/HA-T, Low Molecular HA-TLM, Mini Hydrolyzed HA, Proline, Leucine, Methionine, Histidine, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, K+, Hydrolyzed collagen.

Protocol: 1-2 vials for one treatment, injected into the upper dermis or at the junction of the epidermis and dermis. A 2-3 week injection interval is recommended. A full course of treatment is five times.

Phase One: Three intensive treatments (The skin becomes moisturized and radiant with tightened pores.).

Phase Two: Twice with a 1-month interval (Fibroblasts are restored and the skin becomes elastic.).

Phase Three: Once every two months to enhance the effect (Fibroblasts continue to secrete collagen and elastin to make the skin shiny and firm, reducing dry and fine lines.).

Can be used with Meso Needle, Meso Gun, Derma Roller, and Derma Pen.

Ürün açıklaması

İşlevi: Cildi kaldırır yani lifting etkisi yaratır, nemlendirir, oksidasyonu ve gözenekleri küçültür, çeşitli amino asitlerle kolajen yenilenmesini teşvik eder, cilt dokusunu iyileştirir ve elastikiyeti artırır.

İçerik: Yüksek/Orta Moleküllü HA-THM/HA-T, Düşük Moleküllü HA-TLM, Mini Hidrolize HA, Prolin, Triptofan, Alanin, izolösin, lösin, Aspartik asit, Tirozin, Glutamik asit, Fenilalanin, Arjinin HCl, Lizin HCl, Valin, Treonin, Histidin HCl, Serin, Metionin, Sistin, Glisin, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Na+.

Protokol: Bir seanslık tedavi için 1-2 flakon, üst dermise veya epidermis ile dermisin birleşim yerine enjekte edilir. 2-3 hafta enjeksiyon aralığı tavsiye edilir. Beş seanslık tam bir tedavi kürüdür.

Birinci Aşama: Üç seans yoğun tedavi. (Cilt sıkılaştıran gözeneklerle nemlenir ve parlar.)

İkinci Aşama: 1 ay ara ile iki seans. (Fibroblastlar onarılır ve cilt elastik hale gelir.)

Üçüncü Aşama: Etkiyi güçlendirmek için iki ayda bir seans. (Fibroblastlar cildi parlatmak ve sıkılaştırmak, kuru ve ince çizgileri azaltmak için kolajen ve elastin salgılamaya devam eder.)

Meso Needle, Meso Gun, Derma Roller ve Derma Pen ile kullanılabilir.

Reyoungel®
MESO LIFTING
SKIN REJUVENATION SOLUTION

4ml x 10 units



LIPOLYTIC



5ML



LİPOLİTİK / ЛИПОЛИТИК

Məhsulun təsviri

Funksiyası: Artıq yağların əridilməsində köməklik göstərir. Məhlul selülitin formalaşmasını azaldır və piylərin yandırılmasını təşviq edir. Yağ toxumasına vurula bilər. Üz, bütün, buxaq, boyun, çənə, qarın, bel, kürək, qollar, əllər, ayaqlara inyeksiya edilə bilər. DMAE tərkibidir.

Tərkib: Hialuron turşusu, Nikotinamid, Deoksixolik turşu, DMAE 5 mg.

Protokol: Yanaq, çənə, boyun: birdəfəlik müalicə 3-4ml, hər inyeksiya sahəsi üçün 0.2-0.4ml. İnyeksiya sahəsinin məsafəsi 1 sm-dən az, dərinliyi isə 0,5 sm-dən çox ola bilməz. 2 həftə inyeksiya intervalı tövsiyə edilir. Qarın, bel, qollar, ayaqlar, qalçalar: birdəfəlik müalicə 5ml. hər İnyeksiya sahəsi üçün 0,5-0,8 ml. İnyeksiya sahəsinin məsafəsi 1 sm-dən az, dərinliyi isə 1 sm-dən çox ola bilməz. 1 həftə inyeksiya intervalı tövsiyə edilir. 4-6 dəfə müalicənin nəticəsini görə bilərsiniz. Pasiyentlərə görə müalicəni izləmək lazımdır.

Параметры

Функция: помогает растворить лишний жир. Раствор уменьшает образование целлюлита и способствует сжиганию жира. Его можно вводить в жировую ткань. Его можно вводить в лицо, бедра, лодыжки, шею, подбородок, живот, спину, руки, кисти, стопы. Он содержит ДМАЭ.

Ингредиенты: гиалуроновая кислота, никотинамид, дезоксихолеваая кислота, ДМАЭ 5 мг.

Протокол: Щека, подбородок, шея: однократно по 3-4 мл, 0,2-0,4 мл на каждое место инъекции. Расстояние от места инъекции не может быть менее 1 см, а глубина - более 0,5 см. Рекомендованный интервал между инъекциями составляет 2 недели. Живот, спина, руки, ноги, ягодицы: разовая обработка 5мл. 0,5-0,8 мл на место инъекции. Расстояние от места инъекции не может быть менее 1 см, а его глубина - более 1 см. Рекомендуемый интервал между инъекциями составляет 1 неделю. Результат лечения можно увидеть 4-6 раз. Необходимо контролировать ход лечения со слов пациентов.

Reyoungel®

MESO LIPOLYTIC SOLUTION

5ml x 10 units



LIPOLYTIC



5ML



LIPOLYTIC / LİPOLİTİK

Product Descriptions

Function: Helps in dissolving excess fats. The solution reduces the formation of cellulite and promotes the burning of fats. It can be injected into fat tissue. It can be injected into the face, buttocks, double chin, neck, chin, abdomen, waist, back, arms, hands, legs. Contains DMAE.

Composition: Hyaluronic acid, Nicotinamide, Deoxycholic acid, DMAE 5 mg.

Protocol: Cheeks, chin, neck: one-time treatment 3-4ml, 0.2-0.4ml for each injection site. The distance of the injection site cannot be less than 1 cm, and the depth cannot be more than 0.5 cm. A 2-week injection interval is recommended. Abdomen, waist, arms, legs, hips: one-time treatment 5ml, 0.5-0.8 ml for each injection site. The distance of the injection site cannot be less than 1 cm, and the depth cannot be more than 1 cm. A 1-week injection interval is recommended. You can see the result of the treatment after 4-6 times. It is necessary to monitor the treatment according to the patients.

Reyoungel®

MESO LIPOLYTIC SOLUTION



Ürün açıklaması

İşlevi: Fazla yağların eritilmesine yardımcı olur. Solüsyon selülit oluşumunu azaltır ve yağ yakımını teşvik eder. Yağ dokusuna enjekte edilebilir. Yüz, kalça, gıdı, boyun, çene, karın, bel, sırt, kollar, eller, bacaklara enjekte edilebilir. DMAE içerir.

İçerik: Hyaluronik asit, Nikotinamid, Deoksikolik asit, DMAE 5 mg.

Protokol: Yanak, çene, boyun: tek seanslık tedavi 3-4 ml, her enjeksiyon bölgesi için 0.2-0.4 ml. Enjeksiyon bölgeleri arasındaki mesafe 1 cm'den az, derinliği ise 0,5 cm'den fazla olamaz. 2 hafta enjeksiyon aralığı tavsiye edilir.

Karın, bel, kollar, bacaklar, kalçalar: tek seanslık tedavi 5 ml, her enjeksiyon bölgesi için 0,5-0,8 ml. Enjeksiyon bölgeleri arasındaki mesafe 1 cm'den az, derinliği ise 1 cm'den fazla olamaz. 1 hafta enjeksiyon aralığı tavsiye edilir. 4-6 seans sonra tedavinin sonucunu görebilirsiniz. Hastalara göre tedaviyi takip etmek gerekir.



SHINING TOUCH



5ML



PARİS İŞİLTİSİ / ПАРИЖСКИЙ ШАЙН



Məhsulun təsviri

Funksiyası: Paris işıltısı mezoterapiyasıdır. Dərini nəmləndirir, məsamələri sıxlaşdırır, hamarlaşdırır, kollagenə dəstək olur. Möhtəşəm parlaqlıq və canlılıq yaradır. Dərinin elastikliyinə gücləndirir, dəri balansını, parlaqlığını itirmiş quru və həssas dərinin bərpasını təmin edir. Cildin stresini azaldır, keyfiyyətini yüksəldir. İltihab önleyicidir. Hüceyrə metabolizmasını sürətləndirir.

Tərkib: Hialuron Turşusu, Mannitol, Argininasetly Hexapeptide-8, Panthenol

Protokol: Dərini bioloji cəhətdən canlandırmaq üçün: Micropomfus texnikası, hər pomfus üçün 0,05-0,1 ml. Dərinin müalicəyə reaksiyasından asılı olaraq seansların sayı hər 21 gündən bir müəyyən edilir. Qoruma üçün hər 6 ayda 1 seans tövsiyə olunur. Tək seansda tövsiyə olunan maksimum doza 2,5 ml-dir. 30G 13mm – 4mm iynəyə bərkidilmiş kilidli 1ml şprisdən istifadə etmək tövsiyə olunur.

Gloskin mezoterapiyaları yeni nəsil damping texnologiyası ilə istehsal edildiyi üçün inyeksiya zamanı heç bir ağrı, yandırma, göynəmə hiss olunmur.

Параметры

Функция: Парижское сияние – мезотерапия. Увлажняет кожу, сужает поры, разглаживает, поддерживает коллаген. Создает удивительную яркость и жизненную силу. Укрепляет эластичность кожи, восстанавливает баланс сухой и чувствительной кожи, потерявшей яркость. Снижает стресс кожи, улучшает ее качество. Противовоспалительное средство. Ускоряет клеточный метаболизм.

Ингредиенты: Гиалуроновая Кислота, Маннитол, Аргинин Ацетли Гексапетит-8, Пантенол.

Протокол: Для биологического оживления кожи: техника микропомфуса, по 0,05-0,1 мл на каждый помфус. Количество сеансов определяется каждые 21 день в зависимости от реакции кожи на лечение. Для защиты рекомендуется 1 сеанс каждые 6 месяцев. Максимальная рекомендуемая доза за один прием — 2,5 мл. Рекомендуется использовать шприц объемом 1 мл с фиксатором, прикрепленным к игле 30G диаметром 13–4 мм.

Поскольку средства для мезотерапии Gloskin производятся по демпфирующей технологии нового поколения, во время инъекции не ощущается боли, жжения или синяков.

SHINING TOUCH



5ML



PARIS GLOW / PARİS İŞİLTİSİ



Product Descriptions

Function: It is a "Paris glow" mesotherapy. It moisturizes the skin, tightens pores, smooths, and supports collagen. It creates a magnificent radiance and vitality. It strengthens the skin's elasticity, and ensures the restoration of dry and sensitive skin that has lost its balance and radiance. It reduces skin stress and increases its quality. It is an anti-inflammatory. It accelerates cell metabolism.

Composition: Hyaluronic Acid, Mannitol, Arginine Acetyl Hexapeptide-8, Panthenol.

Protocol: To biologically rejuvenate the skin: Micropomfus technique, 0.05-0.1 ml for each pomfus. The number of sessions is determined every 21 days depending on the skin's reaction to the treatment. For maintenance, 1 session every 6 months is recommended. The maximum recommended dose in a single session is 2.5 ml. It is recommended to use a 1ml locked syringe attached to a 30G 13mm – 4mm needle.

Since Gloskin mesotherapies are produced with new generation damping technology, no pain, burning, or stinging is felt during the injection.

Ürün açıklaması

İşlevi: Paris ışıltısı mezoterapisidir. Cildi nemlendirir, gözenekleri sıkılaştırır, pürüzsüzleştirir, kolajeni destekler. Muhteşem bir parlaklık ve canlılık yaratır. Cildin elastikiyetini güçlendirir, cilt dengesini, parlaklığını kaybetmiş kuru ve hassas cildin onarımını sağlar. Cildin stresini azaltır, kalitesini yükseltir. Enflamasyon önleyicidir. Hücre metabolizmasını hızlandırır.

İçerik: Hyaluronik Asit, Mannitol, Arjinin Asetil Hegzapeptid-8, Pantenol.

Protokol: Cildi biyolojik olarak canlandırmak için Micropomfus tekniği kullanılır, her pomfus için 0,05-0,1 ml. Cildin tedaviye reaksiyonuna bağlı olarak seans sayısı her 21 günde bir belirlenir. Koruma için her 6 ayda 1 seans tavsiye edilir. Tek seansta tavsiye edilen maksimum doz 2,5 ml'dir. 30G 13mm-4mm iğneye takılı kilitli 1 ml'lik bir şırınga kullanılması tavsiye edilir.

Gloskin mezoterapileri yeni nesil damping teknolojisi ile üretildiği için enjeksiyon sırasında hiçbir ağrı, yanma, sızlama hissedilmez.

SIX POINT



10ML



6 NÖQTƏ LİFTİNG / 6 ТОЧЕЧНЫЙ ЛИФТИНГ



Məhsulun təsviri

Funksiyası: Six point 6 nöqtə lifting möcüzəsidir. Dərinin nəm balansını formalaşdırır və möhtəşəm lifting effekti verir. Elastin və kollagen liflərinin yenilənməsi hesabına lifting effektivliyini artırır. Dəridə rəng tonu açılır və bütün üzdə bərabərləşir.

Tərkib: Hialuron Turşusu, Süksinik Turşusu, Qlutation, Argiline, Sistin, Qlisin, Qlutamik Turşusu, Tryptofan, Oligopeptid, Aspartik Turşusu, Piridoks, Sianokobolamin, Askorbin Turşusu, Tokoferil Asetat, Pantenol, Timinbiotin.

Protokol: Bioloji lifting məhlulu 6 nöqtə texnika ilə dəriyə vurulur. Pasiyent üçün xüsusi olaraq üzün hər iki tərəfində, cəmi 12 olmaqla müəyyən edilmiş 6 fərqli nöqtəyə iynə vurulmaqla həyata keçirilir. Hər nöqtəyə 0,2 ml. Qısa müddət ərzində lifting effekti görülür. Dərinin müalicəyə reaksiyasından asılı olaraq seansların sayı hər 21 gündən bir müəyyən edilir. Qoruma üçün hər 6 ayda 1 seans tövsiyə olunur. Tək seansda tövsiyə olunan maksimum doza 2,4 ml-dir.

30G 13mm – 4mm iynəyə bərkidilmiş kilidli 1ml şprisdən istifadə etmək tövsiyə olunur.

Gloskin mezoterapiyaları yeni nəsil damping texnologiyası ilə istehsal edildiyi üçün inyeksiya zamanı heç bir ağrı, yandırma, göynəmə hiss olunmur.

Параметры

Функция: Шесть точек – это чудо подъема на 6 точек. Формирует водный баланс кожи и дает отличный лифтинг-эффект. Усиливает лифтинг-эффект за счет обновления волокон эластина и коллагена.

Ингредиенты: Гиалуроновая Кислота, Янтарная Кислота, Глутатион, Аргинин, Цистеин, Глицин, Глутаминовая Кислота, Триптофан, Олигопептид, Аспарагиновая Кислота, Пиридокс, Цианокобаламин, Аскорбиновая Кислота, Токоферилацетат, Пантенол, Тиминбиотин.

Протокол: Биологический лифтинг-раствор вводится в кожу 6-точечной техникой. Проводится путем введения иглы в 6 специально определенных для пациента точек с обеих сторон лица в общей сложности по 12,0,2 мл в каждую точку. Эффект лифтинга виден в течение короткого периода времени. Количество сеансов определяется каждые 21 день в зависимости от реакции кожи на лечение. Для защиты рекомендуется 1 сеанс каждые 6 месяцев. Максимальная рекомендуемая доза за один сеанс составляет 2,4 мл. Рекомендуется использовать шприц объемом 1 мл с фиксатором, прикрепленным к игле 30G диаметром 13–4 мм.

Поскольку средства для мезотерапии Gloskin производятся по демпфирующей технологии нового поколения, во время инъекции не ощущается боли, жжения или синяков.

SIX POINT



10ML



6-POINT LIFTING / 6-NOKTA LİFTİNG



Product Descriptions

Function: It is a six-point lifting miracle. It forms the skin's moisture balance and gives a magnificent lifting effect. It increases the effectiveness of the lifting by renewing elastin and collagen fibers. The skin tone is lightened and evened out over the entire face.

Composition: Hyaluronic Acid, Succinic Acid, Glutathione, Arginine, Cystine, Glycine, Glutamic Acid, Tryptophan, Oligopeptide, Aspartic Acid, Pyridoxine, Cyanocobalamin, Ascorbic Acid, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Thiaminbiotin.

Protocol: The biological lifting solution is injected into the skin with a 6-point technique. It is carried out by injecting into 6 different points determined specifically for the patient on both sides of the face, for a total of 12. 0.2 ml per point. A lifting effect is seen in a short time. The number of sessions is determined every 21 days depending on the skin's reaction to the treatment. For maintenance, 1 session every 6 months is recommended. The maximum recommended dose in a single session is 2.4 ml. It is recommended to use a 1ml locked syringe attached to a 30G 13mm – 4mm needle.

Since Gloskin mesotherapies are produced with new generation damping technology, no pain, burning, or stinging is felt during the injection.

Ürün açıklaması

İşlevi: Six point 6 nokta lifting mucizesidir. Cildin nem dengesini oluşturur ve muhteşem bir lifting etkisi verir. Elastin ve kolajen liflerinin yenilenmesi sayesinde lifting etkinliğini artırır. Ciltte renk tonu açılır ve tüm yüzde eşitlenir.

İçerik: Hyaluronik Asit, Süksinik Asit, Glutatyon, Arjilin, Sistin, Glisin, Glutamik Asit, Triptofan, Oligopeptid, Aspartik Asit, Piridoksin, Siyanokobalamin, Askorbik Asit, Tokoferil Asetat, Pantenol, Timinbiotin.

Protokol: Biyolojik lifting solüsyonu 6 nokta tekniği ile cilde enjekte edilir. Hasta için özel olarak yüzün her iki tarafında, toplamda 12 olmak üzere belirlenmiş 6 farklı noktaya iğne enjekte edilerek gerçekleştirilir. Her noktaya 0,2 ml. Kısa süre içinde lifting etkisi görülür. Cildin tedaviye reaksiyonuna bağlı olarak seans sayısı her 21 günde bir belirlenir. Koruma için her 6 ayda 1 seans tavsiye edilir. Tek seansta tavsiye edilen maksimum doz 2,4 ml'dir.

30G 13mm-4mm iğneye takılı kilitli 1 ml'lik bir şırınga kullanılması tavsiye edilir.

Gloskin mezoterapileri yeni nesil damping teknolojisi ile üretildiği için enjeksiyon sırasında hiçbir ağrı, yanma, sızlama hissedilmez.

EYE SHIMMER



5ML



ÇÖZƏTRAFI QIRIŞLAR / МОРЩИНЫ ВОКРУГ
ГЛАЗ



Məhsulun təsviri

Funksiyası: Gözətrafı və gözaltı qırışları aradan qaldırır. Morluqlar, göyərmələr və digər xoşagəlməz görünümlərin aradan qaldırılmasına köməklik göstərir. 8 müxtəlif B kompleksi vitaminlərindən ibarətdir. Güclü anti oksidant xüsusiyyətlərə malikdir və qırmızı qan hüceyrələrini artırır. İncə qırışları aradan qaldırmaq üçün Hexapeptit mövcudur.

Tərkib: Hialuron Turşusu, Tiamin, Askorbin Turşusu, B-kompleks, Süksinik Turşusu, Vitamin K, Kobalamin, Mannitol, Pantenol, L-argiline, Acetyl Hexapeptide-8, Qlutation, Riboflavin.

Protokol: Göz altında 1-1,5 mm və göz ətrafında 1,5-2 mm dərinlikdə Micropomfus texnikası ilə inyeksiya edilir. Hər bir pomfus üçün 0,1 ml. 15-21 gündə bir seans olmaqla tətbiq olunmalıdır. Qoruma üçün hər 6 ayda 1 seans tövsiyə olunur. Tək seansda tövsiyə olunan maksimum doza 1,5 ml-dir. (cəmi 2 göz və onların ətrafı üçün) hər gözün altına 0,3 ml və ətrafına 0,2 ml. 30 G 4 mm iynəyə qoşulmuş kilidli 1 ml şprisdən istifadə etmək tövsiyə olunur.

Gloskin mezoterapiyaları yeni nəsil damping texnologiyası ilə istehsal edildiyi üçün inyeksiya zamanı heç bir ağrı, yandırma, göynəmə hiss olunmur.

Параметры

Функция: Раскрывает морщины вокруг глаз. Он помогает избавиться от синяков и других неприятных явлений. Это один из 8 различных витаминов комплекса В. Он обладает сильными антиоксидантными свойствами и увеличивает количество эритроцитов. Он содержит гексапептид, который удаляет тонкие линии.

Ингредиенты: Гиалуроновая Кислота, Тиамин, Аскорбиновая Кислота, В-комплекс, Янртовая Кислота, Витамин К, Кобаламин, Маннитол, Пантенол, L-аргиллин, Ацетил Гексапептид-8, Глутатион, Рибофлавин.

Протокол: 1-1,5 мм под глазом и 1,5-2 мм вокруг глаза вводят методом Micropomfus. По 0,1 мл на каждый помфус. Его следует применять за один сеанс каждые 15-21 день. Для защиты рекомендуется 1 сеанс каждые 6 месяцев. Максимальная рекомендуемая доза за один сеанс — 1,5 мл. (всего на 2 глаза и область вокруг них) по 0,3 мл под каждый глаз и 0,2 мл вокруг него. Рекомендуется использовать шприц объемом 1 мл с фиксатором, прикрепленным к игле 30 G диаметром 4 мм.

Поскольку средства для мезотерапии Gloskin производятся по демпфирующей технологии нового поколения, во время инъекции не ощущается боли, жжения или синяков.

EYE SHIMMER



5ML



EYE AREA WRINKLE / GÖZ ÇEVRESİ KIRIŞLAR
TREATMENT



Product Descriptions

Function: Removes periorbital and under-eye wrinkles. It helps to eliminate bruises, dark circles, and other unpleasant appearances. It consists of 8 different B complex vitamins. It has strong antioxidant properties and increases red blood cells. It contains Hexapeptide to remove fine wrinkles.

Composition: Hyaluronic Acid, Thiamine, Ascorbic Acid, B-complex, Succinic Acid, Vitamin K, Cobalamin, Mannitol, Panthenol, L-arginine, Acetyl Hexapeptide-8, Glutathione, Riboflavin.

Protocol: It is injected with the Micropomfus technique at a depth of 1-1.5 mm under the eye and 1.5-2 mm around the eye. 0.1 ml for each pomfus. It should be applied in sessions every 15-21 days. For maintenance, 1 session every 6 months is recommended. The maximum recommended dose in a single session is 1.5 ml. (for a total of 2 eyes and their surroundings) 0.3 ml under each eye and 0.2 ml around it. It is recommended to use a 1 ml locked syringe attached to a 30 G 4 mm needle.

Since Gloskin mesotherapies are produced with new generation damping technology, no pain, burning, or stinging is felt during the injection.

Ürün açıklaması

İşlevi: Göz çevresi ve göz altı kırışıklıklarını giderir. Morluklar ve diğer hoş olmayan görünümlerin giderilmesine yardımcı olur. 8 farklı B kompleks vitamininden oluşur. Güçlü antioksidan özelliklere sahiptir ve kırmızı kan hücrelerini artırır. İnce kırışıklıkları gidermek için Hekzapeptit mevcuttur.

İçerik: Hyaluronik Asit, Tiamin, Askorbik Asit, B-kompleks, Süksinik Asit, Vitamin K, Kobalamin, Mannitol, Pantenol, L-arjinin, Asetil Hekzapeptid-8, Glutasyon, Riboflavin.

Protokol: Göz altında 1-1,5 mm ve göz çevresinde 1,5-2 mm derinliğe Micropomfus tekniği ile enjekte edilir. Her bir pomfus için 0,1 ml. 15-21 günde bir seans olmak üzere uygulanmalıdır. Koruma için her 6 ayda 1 seans tavsiye edilir. Tek seansta tavsiye edilen maksimum doz 1,5 ml'dir (toplam 2 göz ve çevresi için), her gözün altına 0,3 ml ve çevresine 0,2 ml. 30 G 4 mm iğneye takılı kilitli 1 ml'lik bir şırınga kullanılması tavsiye edilir.

Gloskin mezoterapileri yeni nesil damping teknolojisi ile üretildiği için enjeksiyon sırasında hiçbir ağrı, yanma, sızlama hissedilmez.

ANTI HAIR LOSS



5ML, 10ML



SAÇ MEZOSU / МЕЗО ДЛЯ ВОЛОС



Məhsulun təsviri

Funksiyası: Saç tökülməsinin qarşısını alır, kiçik saçları uzadır, saç diblərindəki vitaminlərə dəstək verir, saçları yumşaldır və canlılıq verir. Saç köklərini bərkidir. Biotin və pantenol tərkibli olduğu üçün yağlanmanın qarşısını alır.

Tərkib: Hialuron Turşusu, Biotin, Askorbin Turşusu, Niasinamid, Panthenol, Tokoferil Asetat, Piridoksin.

Protokol: Baş dərisini bioloji cəhətdən canlandırmaq üçün Micropomfus texnikası ilə inyeksiya edilir. Hər pomfus üçün 0,1 ml. Seansların sayı baş dərisinin müalicəyə reaksiyasından asılı olaraq hər 10-15 gündən bir müəyyən edilir. 3 seansa nəticə əldə etmək olur. Qoruma üçün hər 6 ayda 1 seans tövsiyə olunur. Təkcə seansda bütün baş sahəsi üçün tövsiyə olunan maksimum doza 5 ml-dir. 30 G 4 mm iynəyə qoşulmuş kilidli 1 ml şprisdən istifadə etmək tövsiyə olunur.

Gloskin mezoterapiyaları yeni nəsil damping texnologiyası ilə istehsal edildiyi üçün inyeksiya zamanı heç bir ağrı, yandırma, göynəmə hiss olunmur.

Параметры

Функция: Предотвращает выпадение волос, удлиняет небольшие волосы, поддерживает витамины в корнях волос, смягчает и придает жизненную силу волосам. Укрепляет корни волос. Предотвращает жирность благодаря наличию биотина и пантенола.

Ингредиенты: Гиалуроновая Кислота, Биотин, Аскорбиновая Кислота, Ниацинамид, Пантенол, Токоферилацетат, Пиридоксин.

Протокол: Чтобы биологически оживить кожу головы, в нее вводят технику Micropomfus. По 0,1 мл на каждый помфус. Количество сеансов определяют каждые 10-15 дней в зависимости от реакции кожи головы на лечение. Результат можно получить за 3 сеанса. Для защиты рекомендуется 1 сеанс каждые 6 месяцев. Максимальная рекомендуемая доза для всей кожи головы за один сеанс — 5 мл. Рекомендуется использовать шприц объемом 1 мл с фиксатором, прикрепленным к игле 30 G диаметром 4 мм.

Поскольку средства для мезотерапии Gloskin производятся по демпфирующей технологии нового поколения, во время инъекции не ощущается боли, жжения или синяков.

ANTI HAIR LOSS



5ML, 10ML



HAIR MESOTHERAPY / SAÇ MEZOSU



Product Descriptions

Function: Prevents hair loss, lengthens small hairs, supports vitamins at the hair roots, softens the hair, and gives it vitality. It strengthens the hair roots. Since it contains biotin and panthenol, it prevents oiliness.

Composition: Hyaluronic Acid, Biotin, Ascorbic Acid, Niacinamide, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Pyridoxine.

Protocol: It is injected with the Micropomfus technique to biologically rejuvenate the scalp. 0.1 ml for each pomfus. The number of sessions is determined every 10-15 days depending on the scalp's reaction to the treatment. Results can be achieved in 3 sessions. For maintenance, 1 session every 6 months is recommended. The maximum recommended dose for the entire head area in a single session is 5 ml. It is recommended to use a 1 ml locked syringe attached to a 30 G 4 mm needle.

Since Gloskin mesotherapies are produced with new generation damping technology, no pain, burning, or stinging is felt during the injection.

Ürün açıklaması

İşlevi: Saç dökülmesini önler, küçük saçları uzatır, saç köklerindeki vitaminleri destekler, saçları yumuşatır ve canlılık verir. Saç köklerini güçlendirir. Biotin ve pantenol içerdiği için yağlanmayı önler.

İçerik: Hyaluronik Asit, Biotin, Askorbik Asit, Niasinamid, Pantenol, Tokoferil Asetat, Piridoksin.

Protokol: Saç derisini biyolojik olarak canlandırmak için Micropomfus tekniği ile enjekte edilir.

Her pomfus için 0,1 ml. Seans sayısı saç derisinin tedaviye reaksiyonuna bağlı olarak her 10-15 günde bir belirlenir. 3 seansta sonuç alınabilir. Koruma için her 6 ayda 1 seans tavsiye edilir.

Tek seansta tüm baş bölgesi için tavsiye edilen maksimum doz 5 ml'dir.

30 G 4 mm iğneye takılı kilitli 1 ml'lik bir şırınga kullanılması tavsiye edilir.

Gloskin mezoterapileri yeni nesil damping teknolojisi ile üretildiği için enjeksiyon sırasında hiçbir ağrı, yanma, sızlama hissedilmez.

WHITENING



5ML, 10ML



LƏKƏ MEZOSU / ПЯТНО МЕЗО

Məhsulun təsviri

Funksiyası: Günəş, lazer, hamiləlik, doğuş və digər spesifik ləkələrin aradan qaldırılmasını təmin edir. Akne sonrası dəri bərpa edir. Dəridəki pigmentasiyanı təmin edir. Tizorinaz fermentini azaldaraq ləkə əmələ gəlməsinin qarşısını alır.

Tərkib: Hialuron Turşusu, Pantenol, Askorbin Turşusu, Qlutation, Niasinamid, Riboflavin, Tiamin, Sianokobolamin, Retinol, Süksinik Turşusu, Arbutin, Traneksamik Turşu, Mannitol, Rutin.

Protokol: Fərqli dəri rəngi olan nahiyələrə və bütün üzə Micropomfus texnikası ilə inyeksiya edilir. Hər pomfus üçün 0,1 ml. Dərinin müalicəyə reaksiyasından asılı olaraq seansların sayı hər 15 gündən bir müəyyən edilir. Bir seansda tətbiq ediləcək maksimum doza 2,5 ml-dir.

30G 13mm – 4mm iynəyə bərkidilmiş kilidli 1ml şprisdən istifadə etmək tövsiyə olunur.

Gloskin mezoterapiyalari yeni nəsəl damping texnologiyası ilə istehsal edildiyi üçün inyeksiya zamanı heç bir ağrı, yandırma, göynəmə hiss olunmur.



Параметры

Функция: удаляет пятна от солнца, лазера, беременности, родов и других специфических пятен. Восстанавливает кожу после прыщей. Обеспечивает пигментацию кожи.

Предотвращает образование пятен за счет снижения тизориназы.

Ингредиенты: Гиалуроновая Кислота, Пантенол, Аскорбиновая Кислота, Глутатион, Ниацинамид, Рибофлавин, Тиамин, Цианокоболамин, Ретинол, Янтарная Кислота, Арбутин, Транексамовая Кислота, Маннитол, Рутин.

Протокол: Вводится в участки с разным цветом кожи и на все лицо методом Micropomfus. По 0,1 мл на каждый помфус. Количество сеансов определяется каждые 15 дней в зависимости от реакции кожи на лечение. Максимальная доза, применяемая за один сеанс, составляет 2,5 мл. Рекомендуется использовать шприц объемом 1 мл с фиксатором, прикрепленным к игле 30G диаметром 13–4 мм.

Поскольку средства для мезотерапии Gloskin производятся по демпфирующей технологии нового поколения, во время инъекции не ощущается боли, жжения или синяков.

WHITENING



5ML, 10ML



SPOT MESOTHERAPY / LEKE MEZOSU

Product Descriptions

Function: Ensures the removal of sun, laser, pregnancy, childbirth, and other specific spots. It restores the skin after acne. It ensures the pigmentation in the skin. It prevents the formation of spots by reducing the tyrosinase enzyme.

Composition: Hyaluronic Acid, Panthenol, Ascorbic Acid, Glutathione, Niacinamide, Riboflavin, Thiamine, Cyanocobalamin, Retinol, Succinic Acid, Arbutin, Tranexamic Acid, Mannitol, Rutin.

Protocol: It is injected with the Micropomfus technique into areas with different skin color and all over the face. 0.1 ml for each pomfus. The number of sessions is determined every 15 days depending on the skin's reaction to the treatment. The maximum dose to be applied in one session is 2.5 ml. It is recommended to use a 1ml locked syringe attached to a 30G 13mm – 4mm needle.

Since Gloskin mesotherapies are produced with new generation damping technology, no pain, burning, or stinging is felt during the injection.

Ürün açıklaması

İşlevi: Güneş, lazer, hamilelik, doğum ve diğer spesifik lekelerin giderilmesini sağlar. Akne sonrası cildi onarır. Ciltteki pigmentasyonu sağlar. Tirozinaz enzimini azaltarak leke oluşumunu önler.

İçerik: Hyaluronik Asit, Pantenol, Askorbik Asit, Glutasyon, Niasinamid, Riboflavin, Tiamin, Siyanokobalamin, Retinol, Süksinik Asit, Arbutin, Traneksamik Asit, Mannitol, Rutin.

Protokol: Farklı cilt rengine sahip bölgelere ve tüm yüze Micropomfus tekniği ile enjekte edilir. Her pomfus için 0,1 ml. Cildin tedaviye reaksiyonuna bağlı olarak seans sayısı her 15 günde bir belirlenir. Bir seansta uygulanacak maksimum doz 2,5 ml'dir. 30G 13mm-4mm iğneye takılı kilitli 1 ml'lik bir şırınga kullanılması tavsiye edilir.

Gloskin mezoterapileri yeni nesil damping teknolojisi ile üretildiği için enjeksiyon sırasında hiçbir ağrı, yanma, sızlama hissedilmez.



HYALURONICA



10ML



NƏMLƏNDİRİCİ / УВЛАЖНЯЮЩИЙ



Məhsulun təsviri

Funksiyası: Hialuron turşusu dəriyə maqnit kimi nəmi cəlb edir və onu dəridə saxlayır. Dərinin təbii qoruyucu maniyəsini dəstəkləyir və gücləndirir. Quru dərini yumşaldır, hamarlaşdırır, nəmləndirir, elastiklik və parlaqlıq verir. Qırışları hamarlayır və yeni kollagenin istehsalını artırır. Hüceyrələrarası matrisin əsas komponentlərindədir.

Tərkib: Saflaşdırılmış Hialuron Turşusu.

Protokol: Dərini bioloji canlandırmaq və nəmləndirmək üçün Micropomfus texnikası ilə inyeksiya edilir. Hər pomfus üçün 0,05-0,1 ml. Doldurucu qırışlar üçün: Xətti texnika, hər qırışa 0,1 ml – 0,2 ml. Dərinin müalicəyə necə reaksiya verməsindən asılı olaraq seansların sayı hər 21 gündən bir müəyyən edilir. Qoruma üçün hər 6 ayda 1 seans tövsiyə olunur. Tək seansda tövsiyə olunan maksimum doza 2,5 ml-dir. 30G 13mm – 4mm iynəyə bərkidilmiş kilidli 1ml şprisdən istifadə etmək tövsiyə olunur.

Gloskin mezoterapiyaları yeni nəsil damping texnologiyası ilə istehsal edildiyi üçün inyeksiya zamanı heç bir ağrı, yandırma, göynəmə hiss olunmur.

Параметры

Функция: Гиалуроновая кислота притягивает влагу к коже, как магнит, и удерживает ее в коже. Поддерживает и укрепляет естественный защитный барьер кожи. Смягчает, разглаживает, увлажняет, придает эластичность и блеск сухой коже. Он разглаживает морщины и увеличивает выработку нового коллагена. Это основной компонент межклеточного матрикса.

Ингредиенты: очищенная гиалуроновая кислота.

Протокол: Вводится методом Micropomfus для биологического оживления и увлажнения кожи. По 0,05-0,1 мл на каждый помфус. Для заполнения морщин: Линейная техника, 0,1 мл – 0,2 мл на каждую морщинку. В зависимости от того, как кожа реагирует на лечение, количество сеансов определяется каждые 21 день. Для защиты рекомендуется 1 сеанс каждые 6 месяцев. Максимальная рекомендуемая доза за один прием — 2,5 мл. Рекомендуется использовать шприц объемом 1 мл с фиксатором, прикрепленным к игле 30G диаметром 13–4 мм.

Поскольку средства для мезотерапии Gloskin производятся по демпфирующей технологии нового поколения, во время инъекции не ощущается боли, жжения или синяков.

HYALURONICA



10ML



MOISTURIZING TREATMENT / NEMLENDİRİCİ



Product Descriptions

Function: Hyaluronic acid attracts moisture to the skin like a magnet and retains it. It supports and strengthens the skin's natural protective barrier. It softens, smooths, moisturizes dry skin, and gives it elasticity and radiance. It smooths wrinkles and increases the production of new collagen. It is the main component of the intercellular matrix.

Composition: Purified Hyaluronic Acid.

Protocol: It is injected with the Micropomfus technique to biologically rejuvenate and moisturize the skin. 0.05-0.1 ml for each pomfus. For filling wrinkles: Linear technique, 0.1 ml – 0.2 ml per wrinkle. The number of sessions is determined every 21 days depending on how the skin reacts to the treatment. For maintenance, 1 session every 6 months is recommended. The maximum recommended dose in a single session is 2.5 ml. It is recommended to use a 1ml locked syringe attached to a 30G 13mm – 4mm needle.

Since Gloskin mesotherapies are produced with new generation damping technology, no pain, burning, or stinging is felt during the injection.

Ürün açıklaması

İşlevi: Hyaluronik asit cilde bir mıknatıs gibi nemi çeker ve ciltte tutar. Cildin doğal koruyucu bariyerini destekler ve güçlendirir. Kuru cildi yumuşatır, pürüzsüzleştirir, nemlendirir, elastikiyet ve parlaklık verir. Kırışıklıkları pürüzsüzleştirir ve yeni kolajen üretimini artırır. Hücrelerarası matrisin temel bileşenleridir.

İçerik: Saf Hyaluronik Asit.

Protokol: Cildi biyolojik olarak canlandırmak ve nemlendirmek için Micropomfus tekniği ile enjekte edilir. Her pomfus için 0,05-0,1 ml. Dolgu kırışıklıkları için: Lineer teknik, her kırışıklığa 0,1 ml - 0,2 ml. Cildin tedaviye nasıl tepki verdiğine bağlı olarak seans sayısı her 21 günde bir belirlenir. Koruma için her 6 ayda 1 seans tavsiye edilir. Tek seansta tavsiye edilen maksimum doz 2,5 ml'dir. 30G 13mm-4mm iğneye takılı kilitli 1 ml'lik bir şırınga kullanılması tavsiye edilir.

Gloskin mezoterapileri yeni nesil damping teknolojisi ile üretildiği için enjeksiyon sırasında hiçbir ağrı, yanma, sızlama hissedilmez.

COLLAGEN



10ML



KOLLAGEN BƏRPASI / РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЛЛАГЕНА



Məhsulun təsviri

Funksiyası: Collagen dermis və bağ toxumalarını yeniləyir. Dərinin elastikliyini artırır, yaşlanma əlamətlərini və qırıqları azaldır. Çapıqları, sızanaq izlərini aradan qaldırır. Dəridəki elastikliyi bərpa edir və vitaminləri gücləndirir. Collagen mükəmməl şəkildə təmin edilir.

Tərkib: Saflaşdırılmış Collagen.

Protokol: Dərini bioloji canlandırmaq və kollageni bərpa etmək üçün Micropomfus texnikası ilə inyeksiya edilir. Hər pomfus üçün 0,05-0,1 ml. Doldurucu qırıqlar üçün: Xətti texnika, hər qırığa 0,1 ml – 0,2 ml. Dərinin müalicəyə necə reaksiya verməsindən asılı olaraq seansların sayı hər 21 gündən bir müəyyən edilir. Qoruma üçün hər 6 ayda 1 seans tövsiyə olunur. Tək seansda tövsiyə olunan maksimum doza 2,5 ml-dir. 30G 13mm – 4mm iynəyə bərkidilmiş kilidli 1ml şprisdən istifadə etmək tövsiyə olunur.

Gloskin mezoterapiyaları yeni nəsil damping texnologiyası ilə istehsal edildiyi üçün inyeksiya zamanı heç bir ağrı, yandırma, göynəmə hiss olunmur.

Параметры

Функция: Коллаген обновляет дерму и соединительные ткани. Повышает эластичность кожи, уменьшает признаки старения и морщины. Устраняет шрамы, шрамы от прыщей. Восстанавливает эластичность кожи и укрепляет витамины. Коллаген прекрасно поставляется.

Ингредиенты: очищенный коллаген.

Протокол: Вводится методом Micropomfus для биологического оживления кожи и восстановления коллагена. По 0,05-0,1 мл на каждый помфус. Для морщин-филлеров: Линейная техника, 0,1–0,2 мл на каждую морщину. В зависимости от того, как кожа реагирует на лечение, количество сеансов определяется каждые 21 день. Для защиты рекомендуется 1 сеанс каждые 6 месяцев. Максимальная рекомендуемая доза за один прием — 2,5 мл. Рекомендуется использовать шприц объемом 1 мл с фиксатором, прикрепленным к игле 30G диаметром 13–4 мм.

Поскольку средства для мезотерапии Gloskin производятся по демпфирующей технологии нового поколения, во время инъекции не ощущается боли, жжения или синяков.

COLLAGEN



10ML



COLLAGEN REGENERATION / KOLLAJEN
REJENERASYONU

Product Descriptions

Function: Collagen renews the dermis and connective tissues. It increases the skin's elasticity, reduces the signs of aging and wrinkles. It removes scars and acne marks. It restores the elasticity in the skin and enhances vitamins. Collagen is perfectly provided.

Composition: Purified Collagen.

Protocol: It is injected with the Micropomfus technique to biologically rejuvenate the skin and restore collagen. 0.05-0.1 ml for each pomfus. For filling wrinkles: Linear technique, 0.1 ml – 0.2 ml per wrinkle. The number of sessions is determined every 21 days depending on how the skin reacts to the treatment. For maintenance, 1 session every 6 months is recommended. The maximum recommended dose in a single session is 2.5 ml.

It is recommended to use a 1ml locked syringe attached to a 30G 13mm – 4mm needle.

Since Gloskin mesotherapies are produced with new generation damping technology, no pain, burning, or stinging is felt during the injection.

Ürün açıklaması

İşlevi: Kollajen, dermisi ve bağ dokularını yeniler. Cildin elastikiyetini artırır, yaşlanma belirtilerini ve kırışıklıkları azaltır. Yara izlerini, sivilce izlerini giderir. Ciltteki elastikiyeti geri kazandırır ve vitaminleri güçlendirir. Kollajen mükemmel bir şekilde sağlanır.

İçerik: Saf Kollajen.

Protokol: Cildi biyolojik olarak canlandırmak ve kolajeni yenilemek için Micropomfus tekniği ile enjekte edilir. Her pomfus için 0,05-0,1 ml. Dolgu kırışıklıkları için: Lineer teknik, her kırışıklığa 0,1 ml - 0,2 ml. Cildin tedaviye nasıl tepki verdiğiğine bağlı olarak seans sayısı her 21 günde bir belirlenir. Koruma için her 6 ayda 1 seans tavsiye edilir. Tek seansta tavsiye edilen maksimum doz 2,5 ml'dir. 30G 13mm-4mm iğneye takılı kilitli 1 ml'lik bir şırınga kullanılması tavsiye edilir.

Gloskin mezoterapileri yeni nesil damping teknolojisi ile üretildiği için enjeksiyon sırasında hiçbir ağrı, yanma, sızlama hissedilmez.



BLUE SHINE



5ML



GÜCLƏNDİRİCİ / УКРЕПЛЕНИЕ МЕЗО



Məhsulun təsviri

Funksiyası: Dəri gücləndirici mezoterpiyadır. Cildin alt təbəqəsini nəmləndirir, fərqli vitaminlər olduğu üçün cildin sağlamlığını dəstəkləyir və hüceyrələrin fəaliyyətini aktivləşdirir. Cildi bəsləyir və peptidlərin effektivliyini artırır. Aminoasitlər cildin elastikliyini artırır, sallanma və qırıqları azaldır, cildi bəsləyir. Məsamələri sıxlaşdırır, kollagenə dəstək verir və nəmləndirir. Möhtəşəm parlaqlığı təmin edərək dəridəki incə qırıqları aradan qaldırır.

Tərkib: Hialuron Turşusu, Aspartik Turşu, Arginin, Lizinniasinamid, Sistin, Qlutation, Qlisin, Mannitol, Oliqopeptid-3, Traneksamik Turşu, L-triptofan, Natrium Süksinat, Qlutamik Turşu, Solmon Dnt, 24 Aminoasit, 14 Vitamin.

Protokol: Dərini bioloji cəhətdən canlandırmaq üçün Micropomfus texnikası ilə inyeksiya olunur. Hər pomfus üçün 0,1 ml. Dərinin müalicəyə reaksiyasından asılı olaraq seansların sayı hər 15 gündən bir müəyyən edilir. Qoruma üçün hər 3 ayda 1 seans tövsiyə olunur.

Bir seansda tətbiq ediləcək maksimum doza 2,5 ml-dir. 30G 13mm – 4mm iynəyə bərkidilmiş kilidli 1ml şprisdən istifadə etmək tövsiyə olunur.

Gloskin mezoterapiyaları yeni nəsil damping texnologiyası ilə istehsal edildiyi üçün inyeksiya zamanı heç bir ağrı, yandırma, göynəmə hiss olunmur.

Параметры

Функция: Мезотерапия, укрепляющая кожу. Увлажняет нижний слой кожи, поддерживает здоровье кожи и активизирует деятельность клеток, поскольку содержит различные витамины. Питает кожу и повышает эффективность пептидов. Аминокислоты повышают эластичность кожи, уменьшают провисание и морщины, питают кожу. Сужает поры, поддерживает коллаген и увлажняет.

Ингредиенты: Гиалуроновая Кислота, Аспариновая Кислота, Аргинин, Лизинниацинамид, Цистеин, Глутатион, Глицин, Маннитол, Олигопептид-3. Транексаминовая Кислота, L-триптофан, Натрия Сукцинат, Глутаминовая Кислота, Днк Лосося, 24 Аминокислоты, 14 Витаминов.

Протокол: Для биологического оживления кожи ей вводят технику Micropomfus. По 0,1 мл на каждый помфус. Количество сеансов определяют каждые 15 дней в зависимости от реакции кожи на лечение. Для защиты рекомендуется 1 сеанс каждые 3 месяца.

Максимальная доза, которую следует ввести за один сеанс, составляет 2,5 мл.

Рекомендуется использовать шприц объемом 1 мл с замком, прикрепленным к игле 30G диаметром 13–4 мм.

Поскольку средства для мезотерапии Gloskin производятся по демпфирующей технологии нового поколения, во время инъекции не ощущается боли, жжения или синяков.

BLUE SHINE



5ML



STRENGTHENING TREATMENT / GÜÇLENDİRİCİ



Product Descriptions

Function: It is a skin-strengthening mesotherapy. It moisturizes the lower layer of the skin, supports skin health because there are different vitamins, and activates the activity of cells. It nourishes the skin and increases the effectiveness of peptides. Amino acids increase the elasticity of the skin, reduce sagging and wrinkles, and nourish the skin. It tightens pores, supports collagen, and moisturizes. It removes fine wrinkles in the skin, providing a magnificent radiance.

Composition: Hyaluronic Acid, Aspartic Acid, Arginine, Lysine, Niacinamide, Cystine, Glutathione, Glycine, Mannitol, Oligopeptide-3, Tranexamic Acid, L-tryptophan, Sodium Succinate, Glutamic Acid, Salmon Dna, 24 Amino Acids, 14 Vitamins.

Protocol: It is injected with the Micropomfus technique to biologically rejuvenate the skin. 0.1 ml for each pomfus. The number of sessions is determined every 15 days depending on the skin's reaction to the treatment. For maintenance, 1 session every 3 months is recommended. The maximum dose to be applied in one session is 2.5 ml. It is recommended to use a 1ml locked syringe attached to a 30G 13mm – 4mm needle.

Since Gloskin mesotherapies are produced with new generation damping technology, no pain, burning, or stinging is felt during the injection.

Ürün açıklaması

İşlevi: Cilt güçlendirici mezoterapidir. Cildin alt tabakasını nemlendirir, farklı vitaminler içerdiği için cildin sağlığını destekler ve hücrelerin faaliyetini aktive eder. Cildi besler ve peptitlerin etkinliğini artırır. Amino asitler cildin elastikiyetini artırır, sarkma ve kırışıklıkları azaltır, cildi besler. Gözenekleri sıkılaştırır, kolajeni destekler ve nemlendirir. Muhteşem parlaklık sağlayarak ciltteki ince kırışıklıkları giderir.

İçerik: Hyaluronik Asit, Aspartik Asit, Arjinin, Lizin Niasinamid, Sistin, Glutatyon, Glisin, Mannitol, Oligopeptid-3, Traneksamik Asit, L-triptofan, Sodyum Süksinat, Glutamik Asit, Somon Dna, 24 Amino Asit, 14 Vitamin.

Protokol: Cildi biyolojik olarak canlandırmak için Micropomfus tekniği ile enjekte edilir. Her pomfus için 0,1 ml. Cildin tedaviye reaksiyonuna bağlı olarak seans sayısı her 15 günde bir belirlenir. Koruma için her 3 ayda 1 seans tavsiye edilir. Bir seansta uygulanacak maksimum doz 2,5 ml'dir. 30G 13mm-4mm iğneye takılı kilitli 1 ml'lik bir şırınga kullanılması tavsiye edilir.

Gloskin mezoterapileri yeni nesil damping teknolojisi ile üretildiği için enjeksiyon sırasında hiçbir ağrı, yanma, sızlama hissedilmez.

ANTIAGING 30+



10ML



ÇƏHRAYI KOKTEYL / РОЗОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ



Məhsulun təsviri

Funksiyası: Dəriyə anında lifting və parlaqlıq verir. Dərini nəmləndirir və qidalandırır. Yaşlanma əleyhinə güclü təsirdir. Vitamin kompleksi ilə zənginləşdirilmiş çəhrayı kokteyldir. Qırmızı qan hüceyrələrinin istehsalında rol oynayır, beləliklə dərinin solğun və sarı görünüşünü aradan qaldırır. Dərini qoruyur və sebum istehsalını balanslaşdıraraq qırışların yaranmasının qarşısını alır. Gənc görünümü qorumağa kömək edir.

Tərkib: Hialuron Turşusu, Sianokobalamin, Niasinamid, Askorbin Turşusu, Arginin, Sistin, Qlisin, Qlutamik Turşusu, Triptofan, Qlutation, Vitaminlər, Somon Dna.

Protokol: Dərini bioloji canlandırmaq və nəmləndirmək üçün Micropomfus texnikası ilə inyeksiya edilir. Hər pomfus üçün 0,05-0,1 ml. Seansların sayı dərinin müalicəyə necə reaksiya verməsindən asılı olaraq hər 15-21 gündə müəyyən edilir. Qoruma üçün hər 6 ayda 1 seans tövsiyə olunur. Tək seansda tövsiyə olunan maksimum doza 5 ml-dir. 30G 13mm – 4mm iynəyə bərkidilmiş kilidli 1ml şprisdən istifadə etmək tövsiyə olunur.

Gloskin mezoterapiyalari yeni nəsil damping texnologiyasi ilə istehsal edildiyi üçün inyeksiya zamanı heç bir ağrı, yandırma, göynəmə hiss olunmur.

Параметры

Функция: Мгновенно подтягивает и осветляет кожу. Увлажняет и питает кожу. Сильный антивозрастной эффект. Розовый коктейль, обогащенный витаминным комплексом. Играет роль в выработке эритроцитов, устраняя тем самым бледность и желтизну кожи. Защищает кожу и предотвращает появление морщин, балансируя выработку кожного сала. Помогает сохранить молодой внешний вид.

Ингредиенты: Гиалуроновая Кислота, Цианокобаламин, Ниацинамид, Аскорбиновая Кислота, Аргинин, Цистин, Глицин, Глутаминовая Кислота, Триптофан, Глутатион, Витамины, Днк Лосося.

Протокол: вводится методом Micropomfus для биологического оживления и увлажнения кожи. По 0,05-0,1 мл на каждый помфус. Количество сеансов определяется каждые 15-21 день в зависимости от того, как кожа реагирует на лечение. Для защиты рекомендуется 1 сеанс каждые 6 месяцев. Максимальная рекомендуемая доза за один сеанс — 5 мл. Рекомендуется использовать шприц объемом 1 мл с замком, прикрепленным к игле 30G диаметром 13–4 мм.

Поскольку средства для мезотерапии Gloskin производятся по демпфирующей технологии нового поколения, во время инъекции не ощущается боли, жжения или синяков.

ANTIAGING 30+



10ML



PINK COCKTAIL / PEMBE KOKTEYL



Product Descriptions

Function: Gives the skin instant lifting and radiance. It moisturizes and nourishes the skin. It has a strong anti-aging effect. It is a pink cocktail enriched with a vitamin complex. It plays a role in the production of red blood cells, thus eliminating the pale and yellow appearance of the skin. It protects the skin and prevents the formation of wrinkles by balancing sebum production. It helps to maintain a youthful appearance.

Composition: Hyaluronic Acid, Cyanocobalamin, Niacinamide, Ascorbic Acid, Arginine, Cystine, Glycine, Glutamic Acid, Tryptophan, Glutathione, Vitamins, Salmon Dna.

Protocol: It is injected with the Micropomfus technique to biologically rejuvenate and moisturize the skin. 0.05-0.1 ml for each pomfus. The number of sessions is determined every 15-21 days depending on how the skin reacts to the treatment. For maintenance, 1 session every 6 months is recommended. The maximum recommended dose in a single session is 5 ml. It is recommended to use a 1ml locked syringe attached to a 30G 13mm – 4mm needle.

Since Gloskin mesotherapies are produced with new generation damping technology, no pain, burning, or stinging is felt during the injection.

Ürün açıklaması

İşlevi: Cilde anında lifting ve parlaklık verir. Cildi nemlendirir ve besler. Yaşlanma karşıtı güçlü bir etkiye sahiptir. Vitamin kompleksi ile zenginleştirilmiş pembe bir kokteyldir. Kırmızı kan hücrelerinin üretiminde rol oynar, böylece cildin solgun ve sarı görünümünü ortadan kaldırır. Cildi korur ve sebum üretimini dengeleyerek kırışıklıkların oluşumunu önler. Genç görünümü korumaya yardımcı olur.

İçerik: Hyaluronik Asit, Siyanokobalamin, Niasinamid, Askorbik Asit, Arjinin, Sistin, Glisin, Glutamik Asit, Triptofan, Glutasyon, Vitaminler, Somon Dna.

Protokol: Cildi biyolojik olarak canlandırmak ve nemlendirmek için Micropomfus tekniği ile enjekte edilir. Her pomfus için 0,05-0,1 ml. Seans sayısı cildin tedaviye nasıl tepki verdiğine bağlı olarak her 15-21 günde bir belirlenir. Koruma için her 6 ayda 1 seans tavsiye edilir. Tek seansta tavsiye edilen maksimum doz 5 ml'dir. 30G 13mm-4mm iğneye takılı kilitli 1 ml'lik bir şırınga kullanılması tavsiye edilir.

Gloskin mezoterapileri yeni nesil damping teknolojisi ile üretildiği için enjeksiyon sırasında hiçbir ağrı, yanma, sızlama hissedilmez.

ANTIAGING 45+



10ML



EQZOSOM / ЭКЗОСОМА



Məhsulun təsviri

Funksiyası: Mikroserkulasianı bərpa edir və hüceyrələrarası bağları möhkəmləndirir. Elastin və kollagen liflərinin sintezini stimullaşdırır. Dəridəki məsamələri nəzərə çarpacaq şəkildə azaldır. Mimik qırıqlara təsir edir. Möhtəşəm parlaqlıq verir. Kollageni bərpa edir və dərinə nəmləndirir. Ekzosom funksiyasını icra edir.

Tərkib: L-arginin, L-sistin, L-glutamik Turşu, l-triptofan, Aspartik Turşu, Askorbin Turşusu, Nasinamid, Pantetonik Turşu, Piridoksin, Kobalamin, Timin, Biotin, Toxoferol Asetat, Retinol, Hialuron Turşusu, Qlutation, Süksinik Turşusu, Mannitol, C B2 B5 B6 B12 B1 B7 E A Vitaminləri.

Protokol: Dərinə bioloji canlandırmaq və nəmləndirmək üçün Micropomfus texnikası ilə inyeksiya edilir. Hər pomfus üçün 0,05-0,1 ml. Seansların sayı dərinin müalicəyə necə reaksiya verməsindən asılı olaraq hər 15-21 gündə müəyyən edilir. Qoruma üçün hər 6 ayda 1 seans tövsiyə olunur. Tək seansda tövsiyə olunan maksimum doza 5 ml-dir. 30G 13mm – 4mm iynəyə bərkidilmiş kilidli 1ml şprisdən istifadə etmək tövsiyə olunur.

Gloskin mezoterapiyaları yeni nəsil damping texnologiyası ilə istehsal edildiyi üçün inyeksiya zamanı heç bir ağrı, yandırma, göynəmə hiss olunmur.

Параметры

Функция: Восстанавливает микроциркуляцию и укрепляет межклеточные связи. Стимулирует синтез эластиновых и коллагеновых волокон. Значительно уменьшает поры на коже. Воздействует на мимические морщины. Дает большую яркость. Восстанавливает коллаген и увлажняет кожу.

Ингредиенты: L-аргинин, L-цистеин, L-глутаминовая Кислота, L-триптофан, Аспариновая Кислота, Аскорбиновая Кислота, Назинамид, Пантетоновая Кислота, Пиридоксин, Кобаламин, Тимин, Биотин, Токсоферолацетат, Ретинол, Гиалуроновая Кислота, Глутатион, Янтарная Кислота, Маннит, C B2 B5 B6 B12 B1 B7 E A Витамины.

Протокол: вводится методом Micropomfus для биологического оживления и увлажнения кожи. По 0,05-0,1 мл на каждый помфус. Количество сеансов определяется каждые 15-21 день в зависимости от того, как кожа реагирует на лечение. Для защиты рекомендуется 1 сеанс каждые 6 месяцев. Максимальная рекомендуемая доза за один сеанс — 5 мл. Рекомендуется использовать шприц объемом 1 мл с замком, прикрепленным к игле 30G диаметром 13–4 мм.

Поскольку средства для мезотерапии Gloskin производятся по демпфирующей технологии нового поколения, во время инъекции не ощущается боли, жжения или синяков.

ANTIAGING 45+



10ML



EXOSOME THERAPY / EKZOSOM



Product Descriptions

Function: Restores microcirculation and strengthens intercellular bonds. It stimulates the synthesis of elastin and collagen fibers. It significantly reduces pores in the skin. It affects mimic wrinkles. It gives a magnificent radiance. It restores collagen and moisturizes the skin. It performs the function of an exosome.

Composition: L-arginine, L-cystine, L-glutamic Acid, L-tryptophan, Aspartic Acid, Ascorbic Acid, Niacinamide, Pantothenic Acid, Pyridoxine, Cobalamin, Thiamine, Biotin, Tocopherol Acetate, Retinol, Hyaluronic Acid, Glutathione, Succinic Acid, Mannitol, C, B2, B5, B6, B12, B1, B7, E, A Vitamins.

Protocol: It is injected with the Micropomfus technique to biologically rejuvenate and moisturize the skin. 0.05-0.1 ml for each pomfus. The number of sessions is determined every 15-21 days depending on how the skin reacts to the treatment. For maintenance, 1 session every 6 months is recommended. The maximum recommended dose in a single session is 5 ml. It is recommended to use a 1ml locked syringe attached to a 30G 13mm – 4mm needle.

Since Gloskin mesotherapies are produced with new generation damping technology, no pain, burning, or stinging is felt during the injection.

Ürün açıklaması

İşlevi: Mikrosirkülasyonu onarır ve hücrelerarası bağları güçlendirir. Elastin ve kolajen liflerinin sentezini uyarır. Ciltteki gözenekleri gözle görülür şekilde azaltır. Mimik kırışıklıkları etkiler. Muhteşem bir parlaklık verir. Kolajeni onarır ve cildi nemlendirir. Eksozom işlevini yerine getirir.

İçerik: L-arjinin, L-sistin, L-glutamik Asit, L-triptofan, Aspartik Asit, Askorbik Asit, Niasinamid, Pantotenik Asit, Piridoksin, Kobalamin, Timin, Biotin, Tokoferol Asetat, Retinol, Hyaluronik Asit, Glutasyon, Süksinik Asit, Mannitol, C B2 B5 B6 B12 B1 B7 E A Vitaminleri.

Protokol: Cildi biyolojik olarak canlandırmak ve nemlendirmek için Micropomfus tekniği ile enjekte edilir. Her pomfus için 0,05-0,1 ml. Seans sayısı cildin tedaviye nasıl tepki verdiğine bağlı olarak her 15-21 günde bir belirlenir. Koruma için her 6 ayda 1 seans tavsiye edilir. Tek seansta tavsiye edilen maksimum doz 5 ml'dir. 30G 13mm-4mm iğneye takılı kilitli 1 ml'lik bir şırınga kullanılması tavsiye edilir.

Gloskin mezoterapileri yeni nesil damping teknolojisi ile üretildiği için enjeksiyon sırasında hiçbir ağrı, yanma, sızlama hissedilmez.

ACNELESS



10ML



AKNE MEZOSU / AKHE MEZO

Məhsulun təsviri

Funksiyası: Dəridəki akneləri müalicə edir. Səpkilərin qarşısını alır, nəmləndirir, dəridə olan akne və iltihablı səpkiləri birbaşa müalicə edir. Daha parlaq və canlı dəri bariyeri yaradır.

Tərkib: Hialuron Turşusu, Qlikolik Turşusu, Salisilik Turşusu, Vitamin A

Protokol: Dəridəki akneləri müalicə üçün Micropomfus texnikası ilə inyeksiya edilir. Hər pomfus üçün 0,05-0,1 ml. Seansların sayı dərinin müalicəyə necə reaksiya verməsindən asılı olaraq hər 15-21 gündə müəyyən edilir. Qoruma üçün hər 6 ayda 1 seans tövsiyə olunur.

Tək seansda tövsiyə olunan maksimum doza 2,5 ml-dir. 30G 13mm – 4mm iynəyə bərkidilmiş kilidli 1ml şprisdən istifadə etmək tövsiyə olunur.

Gloskin mezoterapiyaları yeni nəsil damping texnologiyası ilə istehsal edildiyi üçün inyeksiya zamanı heç bir ağrı, yandırma, göynəmə hiss olunmur.

Параметры

Функция: Лечит прыщи на коже. Предотвращает высыпания, увлажняет, непосредственно лечит прыщи и воспалительные высыпания на коже. Создает более яркий и живой кожный барьер.

Ингредиенты: Гиалуроновая Кислота, Гликолевая Кислота, Салициловая Кислота, Витамин А.

Протокол: Для лечения прыщей на коже вводят технику Micropomfus. По 0,05-0,1 мл на каждый помфус. Количество сеансов определяется каждые 15-21 день в зависимости от того, как кожа реагирует на лечение. Для защиты рекомендуется 1 сеанс каждые 6 месяцев. Максимальная рекомендуемая доза за один прием — 2,5 мл. Рекомендуется использовать шприц объемом 1 мл с фиксатором, прикрепленным к игле 30G диаметром 13–4 мм.

Поскольку средства для мезотерапии Gloskin производятся по демпфирующей технологии нового поколения, во время инъекции не ощущается боли, жжения или синяков.



ACNELESS



10ML



ACNE MESOTHERAPY / AKNE MEZOSU

Product Descriptions

Function: Treats acne on the skin. It prevents breakouts, moisturizes, and directly treats acne and inflammatory breakouts on the skin. It creates a brighter and more vibrant skin barrier.

Composition: Hyaluronic Acid, Glycolic Acid, Salicylic Acid, Vitamin A.

Protocol: It is injected with the Micropomfus technique for treating acne on the skin. 0.05-0.1 ml for each pomfus. The number of sessions is determined every 15-21 days depending on how the skin reacts to the treatment. For maintenance, 1 session every 6 months is recommended. The maximum recommended dose in a single session is 2.5 ml. It is recommended to use a 1ml locked syringe attached to a 30G 13mm – 4mm needle.

Since Gloskin mesotherapies are produced with new generation damping technology, no pain, burning, or stinging is felt during the injection.

Ürün açıklaması

İşlevi: Ciltteki akneleri tedavi eder. Sivilceleri önler, nemlendirir, ciltteki akne ve iltihaplı sivilceleri doğrudan tedavi eder. Daha parlak ve canlı bir cilt bariyeri oluşturur.

İçerik: Hyaluronik Asit, Glikolik Asit, Salisilik Asit, Vitamin A.

Protokol: Ciltteki akneleri tedavi etmek için Micropomfus tekniği ile enjekte edilir. Her pomfus için 0,05-0,1 ml. Seans sayısı cildin tedaviye nasıl tepki verdiğiyle ilgili olarak her 15-21 günde bir belirlenir. Koruma için her 6 ayda 1 seans tavsiye edilir. Tek seansta tavsiye edilen maksimum doz 2,5 ml'dir. 30G 13mm-4mm iğneye takılı kilitli 1 ml'lik bir şırınga kullanılması tavsiye edilir.

Gloskin mezoterapileri yeni nesil damping teknolojisi ile üretildiği için enjeksiyon sırasında hiçbir ağrı, yanma, sızlama hissedilmez.



WONDER 9



10ML



9 NÖQTƏ LİFTİNG / 9-ТОЧЕЧНЫЙ ЛИФТИНГ



Məhsulun təsviri

Funksiyası: 9 nöqtə lifting möcüzəsidir. Dərinin nəm balansını formalaşdırır və möhtəşəm lifting effekti verir. Elastin və kollagen liflərinin yenilənməsi hesabına lifting effektivini artırır. Dəridə rəng tonu açılır və bütün üzdə bərabərləşir.

Tərkib: Hialuron turşusu, Süksinik turşu, Qlutatyon, L-arginin, Niasinamid, Glisin, Glutamik turşu, triptofan, Oligopeptid-1, D- Aspartik turşu, Piridoksin, siyanokobalamin, Askorbin turşusu, Toxoferol asetat, Tiamin HLC, biotin, sink, Kalsium xlorid, Kalium xlorid, Maqnezium xlorid

Protokol: Bioloji lifting məhlulu 9 nöqtə texnika ilə dəriyə vurulur. Pasiyent üçün xüsusi olaraq üzün hər iki tərəfində, cəmi 18 olmaqla müəyyən edilmiş 9 fərqli nöqtəyə iynə vurulmaqla həyata keçirilir. Hər nöqtəyə 0,15 ml. Qısa müddət ərzində lifting effekti görülür. Dərinin müalicəyə reaksiyasından asılı olaraq seansların sayı hər 21 gündən bir müəyyən edilir. Qoruma üçün hər 6 ayda 1 seans tövsiyə olunur. Tək seansda tövsiyə olunan maksimum doza 2,7 ml-dir. 30G 13mm – 4mm iynəyə bərkidilmiş kilidli 1ml şprisdən istifadə etmək tövsiyə olunur.

Gloskin mezoterapiyaları yeni nəsil damping texnologiyası ilə istehsal edildiyi üçün inyeksiya zamanı heç bir ağrı, yandırma, göynəmə hiss olunmur.

Параметры

Функция: чудо подъема на 9 точек. Формирует водный баланс кожи и дает отличный лифтинг-эффект. Усиливает лифтинг-эффект за счет обновления волокна эластина и коллагена.

Ингредиенты: гиалуроновая кислота, янтарная кислота, глутатион, L-аргинин, ниацинамид, глицин, глутаминовая кислота, триптофан, олигопептид-1, D-аспарагиновая кислота, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбиновая кислота, ацетат токоферола, тиамин HLC, биотин, цинк, хлорид кальция, калий. Хлорид, Хлорид магния

Протокол: Биологический лифтинг-раствор вводится в кожу 9-точечной техникой. Выполняется путем введения иглы в 9 различных точек, определенных специально для пациента с обеих сторон лица, всего по 18, 0,15 мл в каждую точку. Эффект лифтинга виден в течение короткого периода времени. Количество сеансов определяется каждые 21 день в зависимости от реакции кожи на лечение. Для защиты рекомендуется 1 сеанс каждые 6 месяцев. Максимальная рекомендуемая доза за один прием составляет 2,7 мл. Рекомендуется использовать шприц объемом 1 мл с фиксатором, прикрепленным к игле 30G диаметром 13–4 мм.

Поскольку средства для мезотерапии Gloskin производятся по демпфирующей технологии нового поколения, во время инъекции не ощущается боли, жжения или синяков.

WONDER 9



10ML



9-POINT LIFTING / 9-NOKTA LİFTİNG



Product Descriptions

Function: It is a 9-point lifting miracle. It forms the skin's moisture balance and gives a magnificent lifting effect. It increases the effectiveness of the lifting by renewing elastin and collagen fibers. The skin tone is lightened and evened out over the entire face.

Composition: Hyaluronic acid, Succinic acid, Glutathione, L-arginine, Niacinamide, Glycine, Glutamic acid, Tryptophan, Oligopeptide-1, D-Aspartic acid, Pyridoxine, Cyanocobalamin, Ascorbic acid, Tocopherol acetate, Thiamine HLC, biotin, zinc, Calcium chloride, Potassium chloride, Magnesium chloride.

Protocol: The biological lifting solution is injected into the skin with a 9-point technique. It is carried out by injecting into 9 different points determined specifically for the patient on both sides of the face, for a total of 18. 0.15 ml per point. A lifting effect is seen in a short time. The number of sessions is determined every 21 days depending on the skin's reaction to the treatment. For maintenance, 1 session every 6 months is recommended. The maximum recommended dose in a single session is 2.7 ml. It is recommended to use a 1ml locked syringe attached to a 30G 13mm – 4mm needle.

Since Gloskin mesotherapies are produced with new generation damping technology, no pain, burning, or stinging is felt during the injection.

Ürün açıklaması

İşlevi: 9 nokta lifting mucizesidir. Cildin nem dengesini oluşturur ve muhteşem bir lifting etkisi verir. Elastin ve kolajen liflerinin yenilenmesi sayesinde lifting etkinliğini artırır. Ciltte renk tonu açılır ve tüm yüzde eşitlenir.

İçerik: Hyaluronik asit, Süksinik asit, Glutasyon, L-arjinin, Niasinamid, Glisin, Glutamik asit, triptofan, Oligopeptit-1, D- Aspartik asit, Piridoksin, siyanokobalamin, Askorbik asit, Tokoferol asetat, Tiamin HLC, biotin, çinko, Kalsiyum klorür, Potasyum klorür, Magnezyum klorür.

Protokol: Biyolojik lifting solüsyonu 9 nokta tekniği ile cilde enjekte edilir. Hasta için özel olarak yüzün her iki tarafında, toplamda 18 olmak üzere belirlenmiş 9 farklı noktaya iğne enjekte edilerek gerçekleştirilir. Her noktaya 0,15 ml. Kısa süre içinde lifting etkisi görülür. Cildin tedaviye reaksiyonuna bağlı olarak seans sayısı her 21 günde bir belirlenir. Koruma için her 6 ayda 1 seans tavsiye edilir. Tek seansta tavsiye edilen maksimum doz 2,7 ml'dir. 30G 13mm-4mm iğneye takılı kilitli 1 ml'lik bir şırınga kullanılması tavsiye edilir.

Gloskin mezoterapileri yeni nesil damping teknolojisi ile üretildiği için enjeksiyon sırasında hiçbir ağrı, yanma, sızlama hissedilmez.

TEKNOLOGİYANIN ÜSTÜNLÜKLƏRİ

KROSS-BAĞLAMA TEKNOLOGİYASI

SAX-HA" texnologiyası, polimer zəncirində hidrofobikliyi olan sintetik hidrogellərə güclü hidrofobik assosiasiya vasitəsilə güclü öz-özünə assosiasiya funksiyaları əldə etməyə imkan verən yeni çarpaz əlaqə texnologiyası növüdür. Bu öz-özünə birləşmə dinamikdir və yeridilmiş gellər forma saxlamaq və bədəndə gel miqrasiyasını azaltmaq üçün bir yerdə qalmağa və yığılmağa meyllidir.

Tez-tez istifadə olunan iki çarpaz bağlama agentı var:
BDDE (butilen glikol qlisidil efir) və DVS (divinil sulfon).
Onların müəyyən qalıqları və mənfi reaksiya hesabatlari var.

crosslinking system
[Aşağı çarpaz bağlama effektivliyi]

HCXL sistemi
[Yüksək çarpaz bağlama effektivliyi]
Hialuron turşusu BDDE (çarpaz bağlayıcı)
Bağlayıcı yer Bağlayıcı olmayan yer

Reyoungel SAX-HA cross-linking texnologiyasından istifadə edir, aşağıdakı üstünlüklərə malikdir:

1. Çarpaz bağlayan agent (BDDE) qalıqlarının daha hərtərəfli çıxarılması, mənfi reaksiyaların azaldılması.
2. Daha yaxşı saxlama, yerdəyişməni azaltmaq. Formalaşdırıcı effekti daha təbii və uzunmüddətli (6-18 ay) edin.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕКРЕСТНОГО СВЯЗЫВАНИЯ

Технология SAX-NA — это новый тип технологии перекрестного связывания, который позволяет синтетическим гидрогелям с гидрофобностью в полимерной цепи достигать сильных функций самосвязывания через сильную гидрофобную ассоциацию. Это самосвязывание динамично и стремится оставаться на месте и накапливаться, чтобы сохранить форму введенных гелей и Это самосвязывание динамично, большим стремлением остаётся на месте и накапливается, чтобы сохранить форму гелем и уменьшить миграцию геля в теле.

Существует два часто используемых агента перекрестного связывания:

BDDE (бутиленгликоль глицидиловый эфир) и DVS (дивинилсульфон).

У них есть определенные остатки и отрицательные реакции.

система перекрестного связывания

[Низкая эффективность перекрестного связывания]

система HCXL

[Высокая эффективность перекрестного связывания]

Гиалуроновая кислота BDDE (агент перекрестного связывания) Связывающее место – Несвязывающее место

Reyoungel использует технологию перекрестного связывания SAX-NA, обладая следующими преимуществами:

Более тщательное удаление остатков агента перекрестного связывания (BDDE), уменьшение отрицательных реакций.

Лучшее сохранение, уменьшение смещения.
Сделайте формирующий эффект более естественным и долгосрочным (6–18 месяцев).

ADVANTAGES OF TECHNOLOGY

CROSS-LINKING TECHNOLOGY

“SAX-HA” technology is a new type of cross-linking technology that allows synthetic hydrogels with hydrophobicity in the polymer chain to achieve strong self-association functions through strong hydrophobic association. This self-association is dynamic, and the injected gels tend to stick together and aggregate to maintain shape and reduce gel migration in the body.

There are two commonly used crosslinking agents: BDDE (butylene glycol diglycidyl ether) and DVS (divinyl sulfone). They have certain residues and adverse reaction reports.

crosslinking system
[Low cross-linking efficiency]

HCXL system
[High cross-linking efficiency]
Hyaluronic acid BDDE (crosslinker) Binding site
Non-binding site

Reyoungel uses SAX-HA cross-linking technology, which has the following advantages:

1. More thorough removal of cross-linking agent (BDDE) residues, reducing adverse reactions.
2. Better retention, reduce displacement. Make the shaping effect more natural and long-lasting (6-18 months).

TEKNOLOJİNİN AVANTAJLARI

ÇARPAZ BAĞLANTI TEKNOLOJİSİ

“SAX-HA” teknolojisi, polimer zincirinde hidrofobisiteye sahip sentetik hidrojenlerin güçlü hidrofobik bağlanma yoluyla güçlü öz-birleşme işlevlerine ulaşmasını sağlayan yeni çarpaz bağlanma teknolojisidir. Bu öz-birleşme dinamiktir ve enjekte edilen jeller, şeklini korumak ve vücutta jel göçünü azaltmak için birbirine yapışma kümelenme eğilimindedir.

Yaygın olarak kullanılan iki çarpaz bağlayıcı ajan vardır:
BDDE (bütilen glikol, glisidil eter) ve DVS (divinil sülfon).
Bunların belirli kalıntı ve yan etki raporları vardır.

çarpaz bağlanma sistemi
[Düşük çarpaz bağlama verimliliği]

HCXL sistemi
[Yüksek çarpaz bağlama verimliliği]
Hyaluronik asit BDDE (çarpaz bağlayıcı)
Bağlanma yeri Bağlayıcı olmayan site

Reyoungel, aşağıdaki avantajlara sahip SAX-HA çarpaz bağlama teknolojisini kullanır:

1. Çarpaz bağlayıcı ajan (BDDE) kalıntılarının daha kapsamlı bir şekilde uzaklaştırılması, olumsuz reaksiyonların azaltılması.
2. Daha iyi tutunma, yer değiştirmeyi azaltma. Şekillendirme etkisi daha doğal ve uzunömürlü hale getirme (6-18 ay).

BEYNƏLXALQ

SERTİFİKATLAR

Avropa CE Markası CE2764 və CE0197

EC Dizayn-İmtahan Sertifikatı

EN ISO 13485: 2016

GMP



QLOBAL SATIŞ ŞƏBƏKƏSİ

Təxminən 20 ildən çoxdur
Natrium Hialuronat turşusu
geli sahəsində ixtisaslaşmışdır.




МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Европейская маркировка CE: CE2764 и Ce0197
Сертификат ЕС по дизайну и испытаниям
EN ISO 13485:2016
GMP



ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОДАЖ

Специализируется в
области геля гиалуроната
натрия более 20 лет.

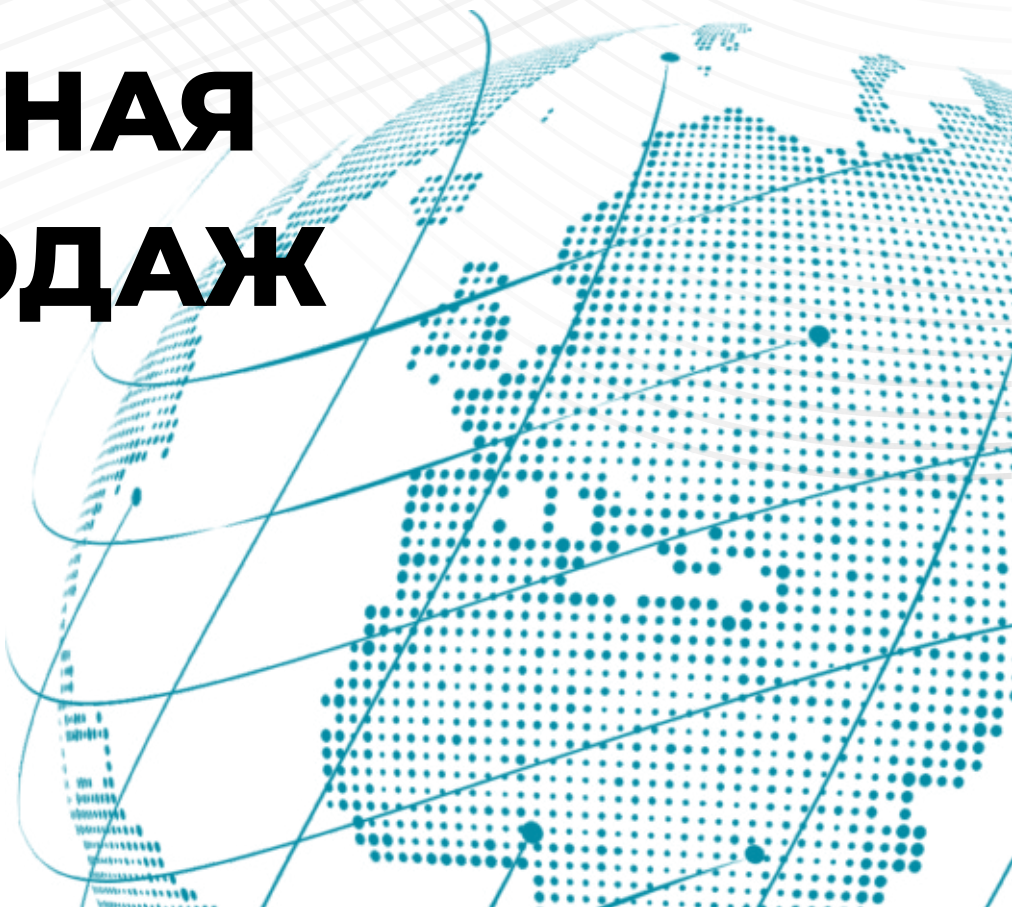

INTERNATIONAL CERTIFICATES

European CE Mark: CE2764 and CE0197
EC Design-Examination Certificate
EN ISO 13485:2016
GMP



GLOBAL SALES NETWORK

Specialized in the field of Sodium
Hyaluronate Acid Gel for nearly
20 years.



ULUSLARARASI SERTİFİKALAR

Avrupa CE işareti: CE2764 and CE0197
AB Tasarım İnceleme sertifikası
EN ISO 13485:2016
GMP



KÜRESEL SATIŞ AĞI

Yaklaşık 20 yıldır Sodyum Hyaluronat
Asit Jeli alanında uzmanlaşmıştır.






ESTELUX

LUXURY OF AESTHETICS



Bizi Instagramda izləyin

+994 55 227 73 89

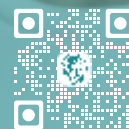

Estelux rəsmi veb sayt