

Ocluser Cera™ PDA

Referencia	Falda de retención (D) [mm]	Diámetro proximal (D1) [mm]	Diámetro distal (D2) [mm]	Longitud cintura (L)	Introduccion recom. [Fr]
*LT-PDA-0406	10	4	6	7	SFP5F
*LT-PDA-0608	12	6	8	7	SFP6F
*LT-PDA-0810	14	8	10	7	SFP7F
*LT-PDA-1012	16	10	12	7	SFP8F
LT-PDA-1214	20	12	14	7	SFP8F
LT-PDA-1416	22	14	16	8	SFP8F
LT-PDA-1618	24	16	18	8	SFP9F
LT-PDA-1820	26	18	20	9	SFP10F
LT-PDA-2022	28	20	22	9	SFP12F
LT-PDA-2224	30	22	24	10	SFP12F

*Medidas comercializadas

Medidas disponibles contra pedido



0212-2395229 / 0212-2394532

0414-3254165 / 0424-2172604



scmedicalccs@gmail.com



@scmedicalsupply



Calle Los Laboratorios, Torre Beta, piso 4, oficina 407, Urbanización Los Ruices, Caracas, Distrito Capital.

Callejón Don Bosco, Torre Leonardo Da Vinci, piso 4, oficina 4-1, Urbanización Las Acacias, Valencia, Carabobo.



Distribuido por:

SC

MEDICAL, C.A.

J-31241748-0

Cera™



Para excelentes beneficios a largo plazo



Lifetech
SCIENTIFIC



0344

La serie de ocluidores Cera™ ha demostrado sus beneficios en diseño y material, así como su eficacia y seguridad para el tratamiento de enfermedades cardíacas congénitas y estructurales a través de los más de 50.000 ocluidores implantados de manera satisfactoria.

BENEFICIOS

Excelentes beneficios a largo plazo – Gracias al recubrimiento patentado de nitrato de titanio (TiN)

- Disminuye la lixiviación de iones metálicos ⁽¹⁾.
- Acelera la endotelización, disminuye la complicación por trombos ⁽²⁾.

Eficacia y Seguridad



PET



PTFE

- Reduce el traumatismo de los vasos mediante un bajo perfil junto a una membrana de PET cosida de forma segura para los ocluidores de ASD/PFO ⁽³⁾.
- Bloqueo del flujo sanguíneo de alta presión con una membrana de PTFE cosida al dispositivo de PDA ⁽³⁾.
- Reduce la ocurrencia de bloqueo auriculoventricular de manera efectiva.

Gama completa de productos para satisfacer las necesidades clínicas


- Gran disponibilidad de medidas con una excelente adaptación anatómica para un perfecto posicionamiento.

Referencias

(1) D.Y. Zhang, W.J. Zeng, Z.J. Zi, and P.K. Chu, Fabrication of graded TiN coatings on nitinol occluders and effects on in vivo nickel release, Materials Science and Engineering C. 29 (2009), 1599-1603.


(2) Cera™ Animal Study: Compared to Nitinol occluder, the Cera™ occluder have demonstrated that faster and better growth of endothelial cell and lower risk of thrombus formation.

(3) J.W. Chen, et al., Transcatheter closure of congenital heart defect with homemade occluder: a report of 53 cases. South China Journal of Cardiovascular Diseases.(2005), 11 (6): 421-423.

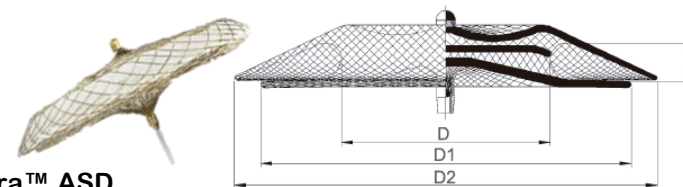

Ocluidor Cera™ ASD

Referencia	Diámetro cintura (D) [mm]	Diámetro disco derecho (D1) [mm]	Diámetro disco izq. (D2) [mm]	Longitud cintura (L) [mm]	Introduccion recom. [Fr]
LT-ASD-06	6	14	18	4	SFA7F
LT-ASD-08	8	16	20	4	SFA7F
*LT-ASD-10	10	18	22	4	SFA7F
*LT-ASD-12	12	22	26	4	SFA8F
*LT-ASD-14	14	24	28	4	SFA9F
*LT-ASD-16	16	26	30	4	SFA9F
*LT-ASD-18	18	28	32	4	SFA9F
*LT-ASD-20	20	30	34	4	SFA10F
*LT-ASD-22	22	32	36	4	SFA10F
*LT-ASD-24	24	34	38	4	SFA12F
LT-ASD-26	26	36	40	4	SFA12F
LT-ASD-28	28	38	42	4	SFA12F
LT-ASD-30	30	40	44	4	SFA12F
LT-ASD-32	32	42	46	4	SFA12F
LT-ASD-34	34	44	50	4	SFA14F
LT-ASD-36	36	46	52	4	SFA14F
LT-ASD-38	38	48	54	4	SFA14F
LT-ASD-40	40	50	56	4	SFA14F
LT-ASD-42	42	52	58	4	SFA14F

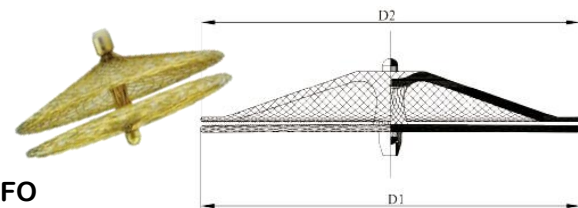

Ocluidor Cera™ PFO

Referencia	Diámetro disco derecho (D1) [mm]	Diámetro disco izquierdo (D2) [mm]	Longitud cintura (L)	Introduccion recom. [Fr]
LT-PFO-1818	18	18	3	SFA8F
LT-PFO-2518	25	18	3	SFA9F
*LT-PFO-2525	25	25	3	SFA9F
LT-PFO-3025	30	25	3	SFA10F
*LT-PFO-3030	30	30	3	SFA10F
LT-PFO-3525	35	25	3	SFA14F