


MICROFAST®

PLACAS DE CONTAGEM MICROBIANA




Em 2019, o Grupo Meizheng é incorporado à Perkin Elmer. Com isso, os produtos da Meizheng são comercializados na França, Estados Unidos, Índia, México, Rússia e mais 120 países. Um dos segmentos de atuação são placas de contagem microbiana, a linha Microfast®. As placas possuem certificado da AOAC (Association of Official Analytical Chemists).

RESULTADOS CONFIÁVEIS, APENAS 3 PASSOS

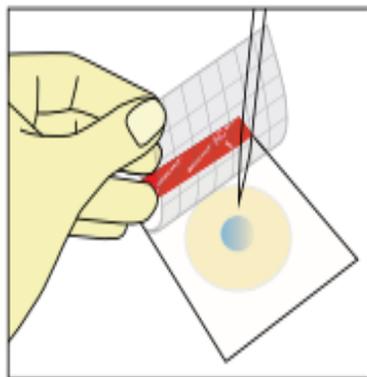

INOCULAÇÃO

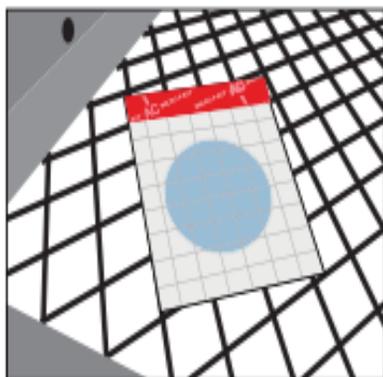

INCUBAÇÃO



INTERPRETAÇÃO

1 Reduz custos de armazenamento e descarte

2 Tecnologia de rápida difusão

3 Redução de custos gerais do laboratório

4 Não requer preparação de ágar


5 Resultados precisos e consistentes

6 De fácil operação




VIDEO DEMO



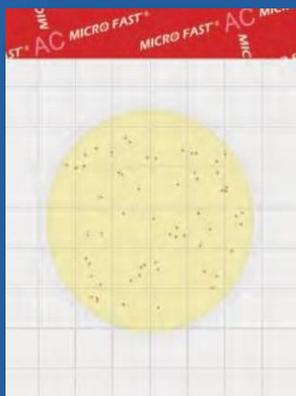


Placa de Contagem Aeróbios (AC)

Resultado: 24 - 48h
Temperatura de cultura: 36±1°C
Interpretação: Colônias vermelhas
Identificação: Quantitativo

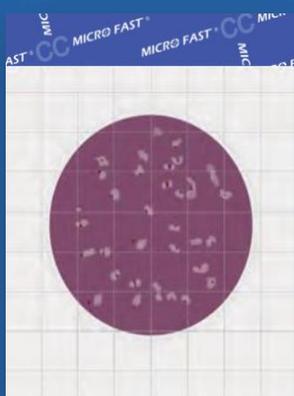

Placa de Contagem de Coliformes (CC)

Resultado: 16 - 24h
Temperatura de cultura: 36±1°C
Interpretação: Colônias vermelhas com bolha de gás
Identificação: Quantitativo

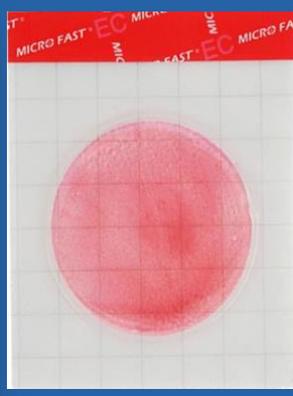

Placa de Contagem de Coliformes e E. coli (EC)

Resultado: 24 - 26h
Temperatura de cultura: 36±1°C
Interpretação: Colif. - colônias azuis e vermelhas com bolhas. E. coli - colônias azuis com bolhas.
Identificação: Quantitativo



Placa de Contagem de Bolores e Leveduras (YM)

Resultado: 48h (Levedura), 72h (fungos)
Temperatura de cultura: 28±1°C
Interpretação: Colônias vermelho-púrpura
Identificação: Quantitativo




Placa de Contagem de S. aureus (SA)

Resultado: 22 - 26h
Temperatura de cultura: 36±1°C
Interpretação: linha rosa ou pontos de colônias
Identificação: Quantitativo/qualitativo




Placa de Confirmação de S. aureus (SA)

Resultado: 1,5 - 4h
Temperatura de cultura: 36±1°C
Interpretação: linha ou pontos roxos escuros indicam positivo
Identificação: Quantitativo/qualitativo

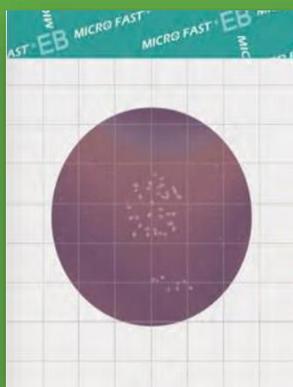

Placa de Contagem de Enterobacteriaceae (EB)

Resultado: 18 - 24h
Temperatura de cultura: 36±1°C
Interpretação: Ponto vermelho e halo amarelo, halo amarelo e bolhas de ar.
Identificação: Quantitativo

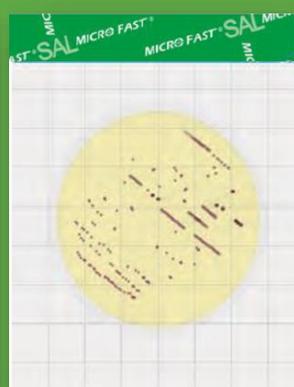

Placa de Contagem de Samonella (SAL)

Resultado: 24 - 26h
Temperatura de cultura: 36±1°C
Interpretação: Colônias cor de rosa
Identificação: Quantitativo



Forma de apresentação: pacotes com 25 placas.
Armazenamento: refrigeração 2 a 8°C
Validade: 18 meses