


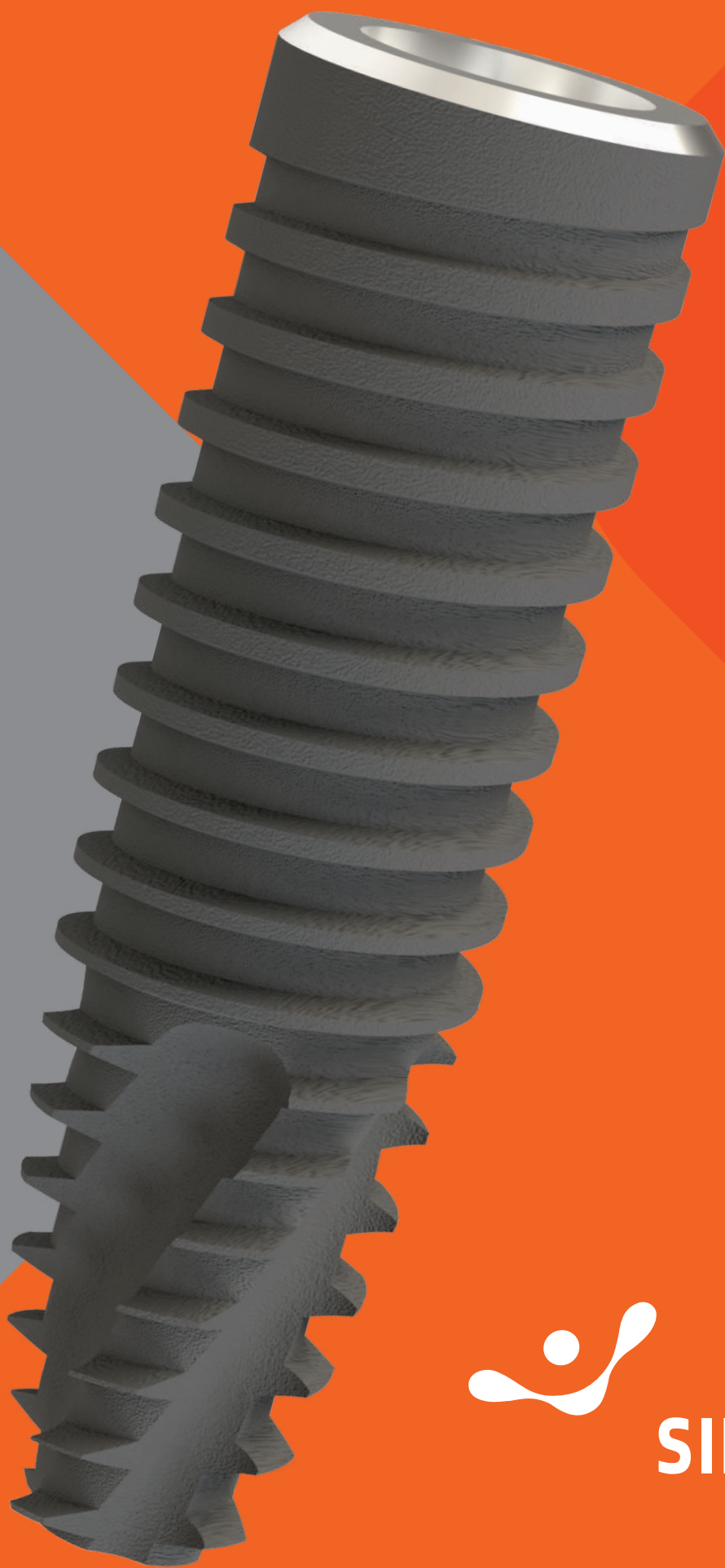

SINGULAR
Implants

ÍNDICE

03

Implantes Cone Morse

Cilíndrico	05
Cônico	08
Go Direct	11
Hybridus	14

28

Implantes Hexágono Externo

Cilíndrico	30
Cônico	33
Hybridus	36

45

Implantes GMC

Cilíndrico	46
Cônico	49
Go Direct	52

66

Linha Digital

77

Instrumentais

IMPLANTES CONE MORSE



IMPLANTES CONE MORSE

- Plataforma Switch
- Interface protética: 2,5mm
- Indexador Hexagonal
- Angulação interna de 11,5°
- Rosca interna: M1.8
- Acompanha Cover:
Parafuso de cobertura
- Instalação: 1 - 2mm infra-ósseo





IMPLANTE CILÍNDRICO CM

Descrição do implante:

- Implante cilíndrico com rosca dupla piramidais, ápice cônico e conexão Cone Morse
- Tratamento de superfície: Duplo ataque ácido.
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Instalação: 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção: Chave CM de contra-ângulo e chave torque CM para finalizar.
- Angulação interna: 11,5°
- Rosca interna: M 1.8
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

Indicações / Osteotomia:

- Indicado para ossos tipo I, II, III e IV
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência e uso de sequência de brocas
- Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm
- Velocidade de perfuração: 800-1200 rpm (ossos tipos I e II)
- Velocidade de perfuração: 500-800 rpm (ossos tipos III e IV)
- Velocidade de inserção: 30 rpm;
- Torque máximo de inserção: 60 N.cm.

IMPLANTE CILÍNDRICO CM



Diâmetro (D)	Comprimento (C)	Código
3.5	7	100.110
	9	100.111
	11	100.112
	13	100.113
	15	100.114
3.75	7	100.115
	9	100.116
	11	100.117
	13	100.319
	15	100.320
4	7	100.121
	9	100.122
	11	100.123
	13	100.124
	15	100.125
5	7	100.133
	9	100.134
	11	100.135
	13	100.136
	15	100.137


SEQUÊNCIA DE BROCAS



	150.022	150.001	150.157	150.002	150.003	150.005	150.008
	Lança	Ø2.0	Piloto*	Ø2.8	Ø3.0	Ø3.3	Ø4.3
Ø3.50	✓	✓	✓	✓			
Ø3.75	✓	✓	✓	✓	✓		
Ø4.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ø5.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Broca opcional na instrumentação

**Para montar o leito do implante cilíndrico, deve-se usar a broca compatível com o diâmetro do implante previsto, seguindo a sequência indicada, de acordo com o tipo de osso.

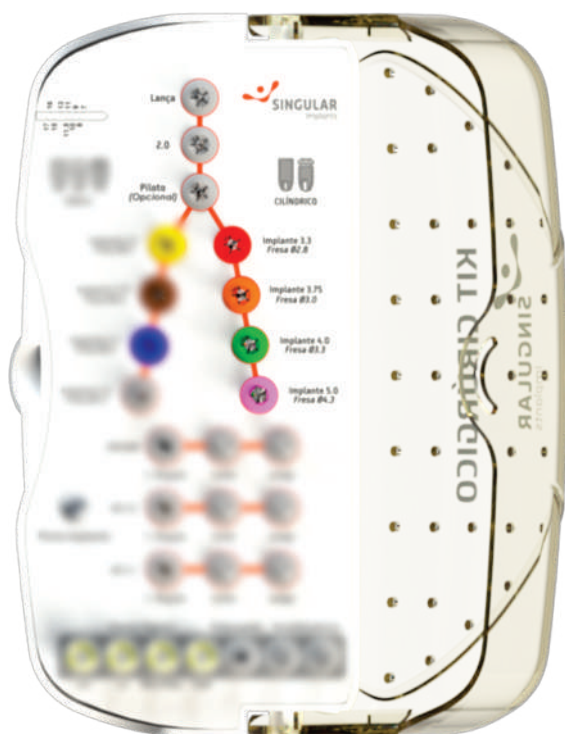


Para instalação dos implantes CM com a Chave:



Chave Montadora CM (117.144)

Torque máximo 30 N.cm

As chaves possuem indicadores de posição do hexágono

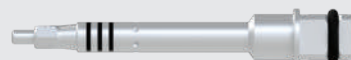


Catraca Torquímetro

Torque máximo 60 N.cm

Chave catraca longa (150.199)

Chave catraca curta (150.202)

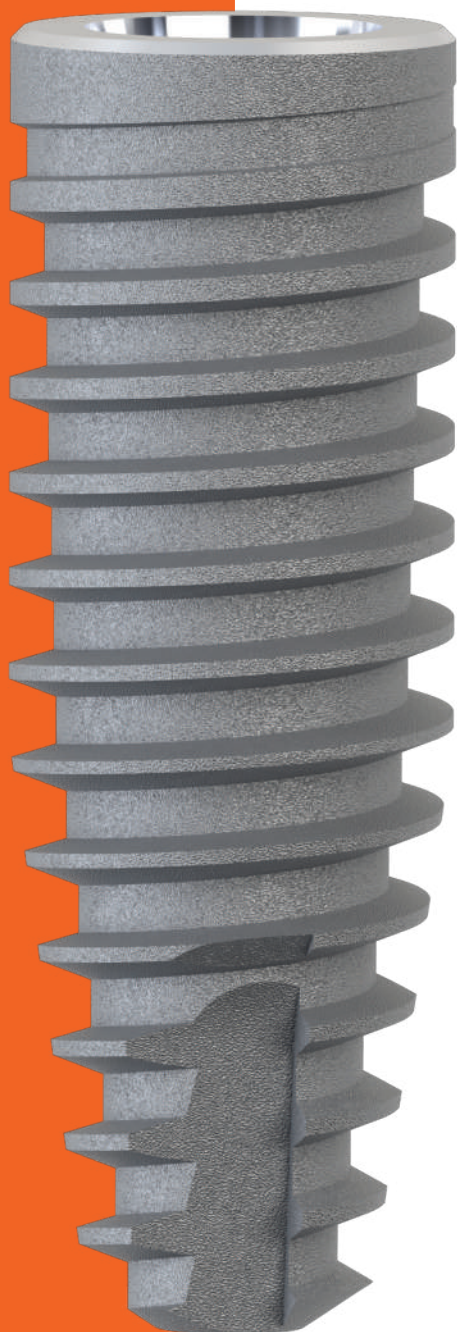

IMPLANTE CÔNICO CM

Descrição do implante:

- Implante cônico com rosca trapezoidal, ápice cônico e conexão Cone Morse
- Tratamento de superfície: Duplo ataque ácido.
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Instalação: 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção: Chave CM de contra-ângulo e chave torque CM para finalizar.
- Angulação interna: 11,5°
- Rosca interna: M 1.8
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

Indicações / Osteotomia:

- Indicado para ossos tipo III e IV
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência e uso de sequência de brocas
- Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm
- Velocidade de perfuração: 500-800 rpm (ossos tipos III e IV)
- Velocidade de inserção: 30 rpm;
- Torque máximo de inserção: 60 N.cm.

IMPLANTE CÔNICO CM



Diâmetro (D)	Comprimento (C)	Código
3.5	8	100.377
	10	100.378
	11.5	100.379
	13	100.183
	16	100.381
3.75	7	100.185
	9	100.186
	11	100.187
	13	100.188
	15	100.189
4	7	100.191
	9	100.192
	11	100.193
	13	100.194
	15	100.195
4.3	8	100.388
	10	100.389
	11.5	100.390
	13	100.391
	16	100.392
5	8	100.400
	10	100.401
	11.5	100.402
	13	100.403
	16	100.404


SEQUÊNCIA DE BROCAS

						
150.022	150.001	150.157	150.120	150.172	150.121	150.122
Lança	Ø2.0	Piloto*	Ø2.7	Ø3.0	Ø3.4	Ø4.0

Ø3.50	✓	✓	✓	✓		
Ø3.75	✓	✓	✓	✓	✓	
Ø4.0	✓	✓	✓	✓	✓	
Ø4.3	✓	✓	✓	✓	✓	
Ø5.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Broca opcional na instrumentação

**Para montar o leito do implante cônico, deve-se usar a broca compatível com o diâmetro do implante previsto, seguindo a sequência indicada, de acordo com o tipo de osso.

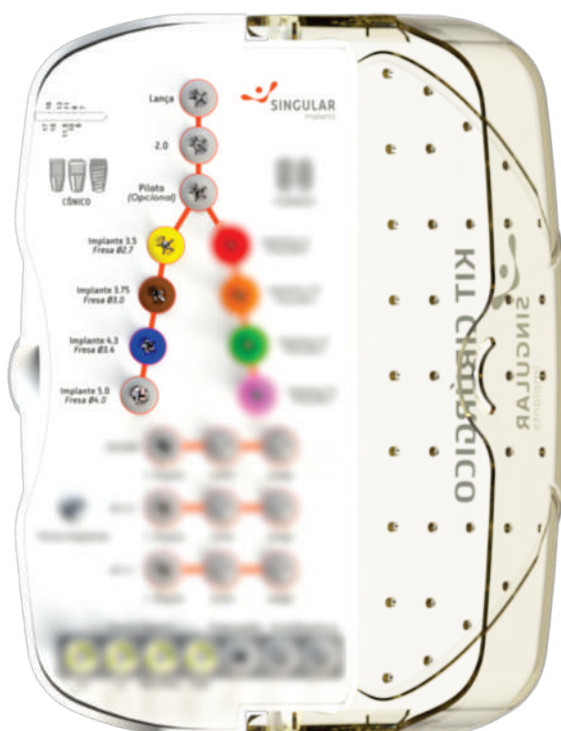

Para instalação dos implantes CM com a Chave:



Chave Montadora CM (117.144)

Torque máximo 30 N.cm

As chaves possuem indicadores de posição do hexágono




Catraca Torquímetro

Torque máximo 60 N.cm

Chave catraca longa (150.199)

Chave catraca curta (150.202)

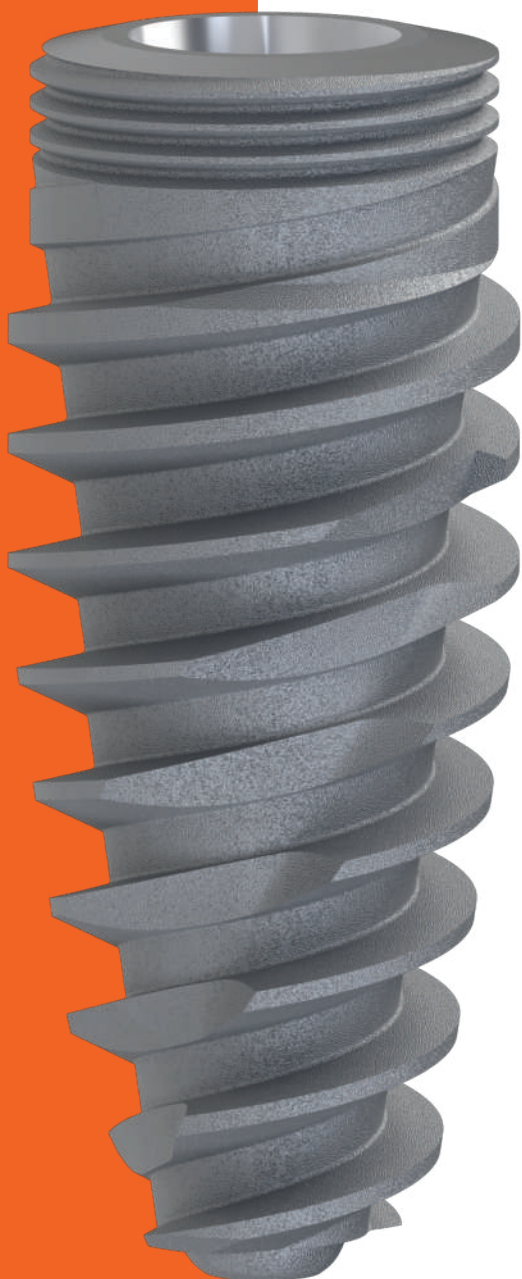

IMPLANTE GO DIRECT

Descrição do implante:

- Implante cônico com rosca dupla e conexão Cone Morse
- Tratamento de superfície: Duplo ataque ácido.
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Instalação: 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção: Chave CM de contra-ângulo e chave torque CM para finalizar.
- Angulação interna: 11,5°
- Rosca interna: M 1.8
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

Indicações / Osteotomia:

- Indicado para ossos tipo III e IV
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência e uso de sequência de brocas
- Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm
- Velocidade de perfuração: 500-800 rpm (ossos tipos III e IV)
- Velocidade de inserção: 30 rpm;
- Torque máximo de inserção: 60 N.cm.

IMPLANTE GO DIRECT




Diâmetro (D)	Comprimento (C)	Código
3.5	8	100.083
	10	100.086
	11.5	100.087
	13	100.082
	16	100.081
4.3	8	100.088
	10	100.089
	11.5	100.090
	13	100.091
	16	100.092
5	8	100.093
	10	100.094
	11.5	100.095
	13	100.096
	16	100.097

SEQUÊNCIA DE BROCAS

							
	150.022	150.001	150.157	150.120	150.172	150.121	150.122
	Lança	Ø2.0	Piloto*	Ø2.7	Ø3.0	Ø3.4	Ø4.0
Ø3.50	✓	✓	✓	✓	✓		
Ø4.3	✓	✓	✓	✓		✓	
Ø5.0	✓	✓	✓	✓		✓	✓

* Broca opcional na instrumentação

**Para montar o leito do implante Godirect, deve-se usar a broca compatível com o diâmetro do implante previsto, seguindo a sequência indicada, de acordo com o tipo de osso.

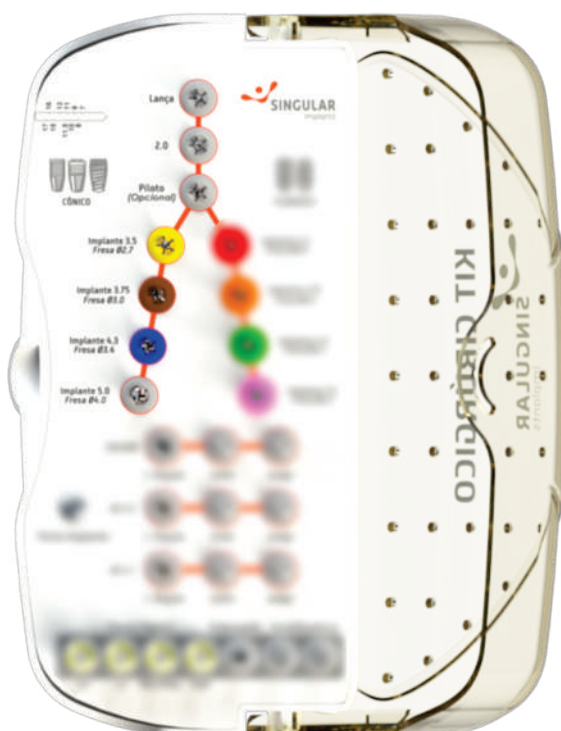

Para instalação dos implantes CM com a Chave:



Chave Montadora CM (117.144)

Torque máximo 30 N.cm

As chaves possuem indicadores de posição do hexágono




Catraca Torquímetro

Torque máximo 60 N.cm

Chave catraca longa (150.199)

Chave catraca curta (150.202)

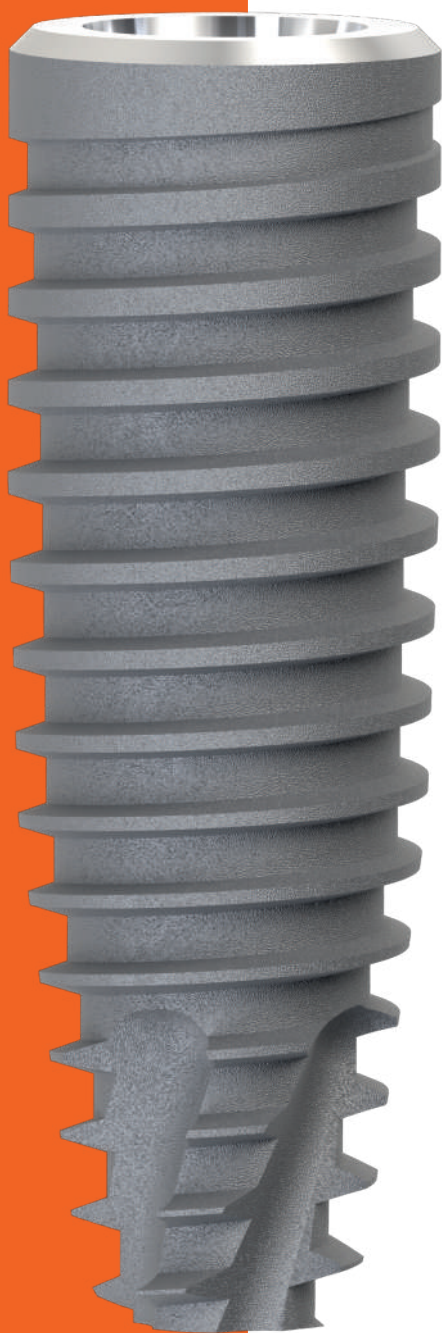

IMPLANTE HYBRIDUS® CM

Descrição do implante:

- Implante com conexão Cone Morse
- Macrogeometria desenhada para carga imediata em qualquer condição óssea
- BioFusion: Uma superfície com poder hidrofílico que promove osseointegração entre 4 e 5 semanas
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave CM de contra-ângulo e chave torque CM para finalizar
- Angulação interna 11,5°
- Rosca interna M 1.8
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

Indicações / Osteotomia:

- Indicado para todos os tipos de ossos
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência e uso de sequência de brocas
- Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm
- * Velocidade de perfuração: 800-1200 rpm; (ossos tipos I e II)
- * Velocidade de perfuração: 500-800 rpm; (ossos tipos III e IV)
- Velocidade de inserção: 30 rpm;
- Torque máximo de inserção: 60 N.cm.

IMPLANTE HYBRIDUS® CM




Diâmetro (D)	Comprimento (C)	Código
3.5	8	100.705
	10	100.706
	11.5	100.707
	13	100.708
	15	100.709
3.8	8	100.710
	10	100.711
	11.5	100.712
	13	100.713
	15	100.714
4.3	8	100.715
	10	100.716
	11.5	100.717
	13	100.718
	15	100.719

SEQUÊNCIA DE BROCAS

							
	150.022	150.001	150.157	150.120	150.172	150.121	150.122
	Lança	Ø2.0	Piloto*	Ø2.7	Ø3.0	Ø3.4	Ø4.0
Ø3.5	✓	✓	✓	✓			
Ø3.8	✓	✓	✓	✓	✓		
Ø4.3	✓	✓	✓	✓		✓	

* Broca opcional na instrumentação

**Para montar o leito do implante Hybridus, deve-se usar a broca compatível com o diâmetro do implante previsto, seguindo a sequência indicada, de acordo com o tipo de osso.

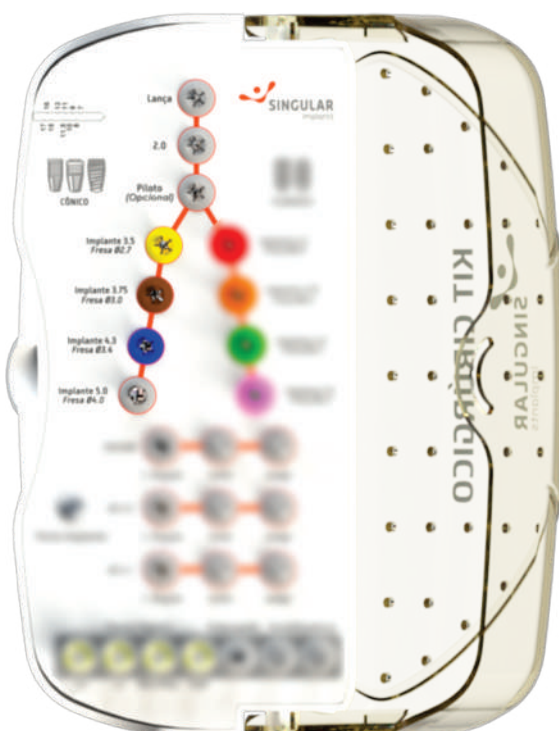

Para instalação dos implantes CM com a Chave:



Chave Montadora CM (117.144)

Torque máximo 30 N.cm

As chaves possuem indicadores de posição do hexágono



Catraca Torquímetro

Torque máximo 60 N.cm

Chave catraca longa (150.199)

Chave catraca curta (150.202)

COMPONENTES CONE MORSE

CICATRIZADORES CM:



Diâmetro (D)	Cinta (C)	Código
3.3	0.8	110.043
	1.5	110.044
	2.5	110.045
	3.5	110.046
	4.5	110.047
	5.5	110.048
4.5	0.8	110.037
	1.5	110.038
	2.5	110.039
	3.5	110.040
	4.5	110.041
	5.5	110.042

TRANSFER E ANÁLOGOS:



Descrição	Mod. Cód.
Transfer Moldeira Aberta CM	108.213
Transfer Moldeira Fechada	108.212

Chave sextavada de 1.2mm

Torque máx.: 10N.cm

Único componente para todos os diâmetros de implantes



Descrição	Mod. Cód.
Análogo CM N indexado	101.030

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO CICATRIZADORES, TRANSFER E ANÁLOGOS:

Implante	Cicatrizador / Provisório	Transfer	Análogo CM
 Implante CM 11.5° Cilíndrico Cônico GoDirect Hybridus	 Cicatrizador CM Torque 10 N.cm  Provisório Torque 32 N.cm	 Transfer Moldeira Fechada  Transfer Moldeira Aberta	 Análogo CM

UCLAS



Conexão / Tamanho	Mod. Cód.
Rotacional: 1.5mm	103.142
Rotacional: 2.5mm	103.143
Anti Rotacional: 0.8mm	103.131
Anti Rotacional: 1.5mm	103.132
Anti Rotacional: 2.5mm	103.133
Anti Rotacional: 3.5mm	103.134
Anti Rotacional: 4.5mm	103.135

Rotacional: Indicado para próteses provisórias múltiplas, pontes parafusadas e protocolos

Anti-rotacional: Indicado para próteses provisórias unitárias, parafusadas ou cimentadas

Embalagem com parafuso

Torque máximo indicado: 32 N.cm

Conexão / Tamanho	Mod. Cód.
Rotacional: 0.8mm	103.079
Anti Rotacional: 0.8mm	103.119
Anti Rotacional: 1.5mm	103.120
Anti Rotacional: 2.5mm	103.121
Anti Rotacional: 3.5mm	103.122
Anti Rotacional: 4.5mm	103.123

Rotacional: Indicado para próteses definitivas múltiplas, pontes parafusadas e protocolos

Anti-rotacional: Indicado para próteses definitivas unitárias, parafusadas ou cimentadas

Embalagem com parafuso

Torque máximo indicado: 32 N.cm

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO DE UCLAS:

Implante	Cicatrizador / Provisório	Transfer	Análogo	Componente	Instalação
 Implante CM 11.5° Cilíndrico Cônico GoDirect Hybridus	 Provisório Torque 32 N.cm	 Transfer Moldeira Fechada	 Análogo CM	 Ucla em Co-Cr CM Torque 32 N.cm	 Chave Hexagonal 1.2mm
	 Cicatrizador CM Torque 10 N.cm	 Transfer Moldeira Aberta			

MINI PILAR RETO:



Cinta	Mod. Cód.
0.8	118.001
1.5	118.002
2.5	118.003
3.5	118.004
4.5	118.005
5.5	118.006

INDICAÇÕES:

- Prótese múltipla parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo
- Instalação com Chave Mini Pilar
- Toque máximo indicado: 32Ncm

MINI PILAR ANGULADO (17° E 30°):



Âng.	Cinta	Mod. Cód.
17°	1.5	116.022
	2.5	116.023
	3.5	116.024
30°	1.5	116.090
	2.5	116.091
	5.0	116.092

INDICAÇÕES:

- Prótese múltipla parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo
- Instalação com Chave Sextava de 1.2
- Toque máximo indicado: 20Ncm

TRANSFER DO MINI PILAR:



Descrição	Mod. Cód.
Transfer Moldeira Aberta Mini Pilar	108.207
Transfer Moldeira Fechada Mini Pilar	108.208

ANÁLOGO DO MINI PILAR:



Descrição	Mod. Cód.
Análogo Mini Pilar	101.006

CILINDRO DO MINI PILAR



Descrição	Mod. Cód.
CJTO LAB Cilindro Mini Pilar Calcinável c/ Parafuso	109.045
Cilindro Mini Pilar Titânio c/ Parafuso	109.046
Cilindro Mini Pilar CO-CR c/ Parafuso	109.014

Chave sextavada de 1.2

Torque máximo indicado: 10 Ncm

CAPA DE PROTEÇÃO



Descrição	Mod. Cód.
Capa de Proteção Mini Pilar	115.001

Chave sextavada de 1.2

Torque máximo indicado: 10 Ncm

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO MINI PILAR RETO OU ANGULADO:

Implante	Mini Pilar Reto ou Angulado	Proteção / Cilindro	Transfer	Análogo	Componente	Instalação
 Implante CM 11.5° Cilíndrico Cônico GoDirect Hybridus	 Mini Pilar Reto Torque 32 N.cm	 Cilindro do Mini Pilar Titânio Torque 10 N.cm	 Moldeira Fechada Torque 10 N.cm	 Análogo Mini Pilar	 Cilindro do Mini Pilar Calcinável Torque 10 N.cm	 Chave Hexagonal 1.2mm
	 Mini Pilar Angulado Torque 20 N.cm	 Capa de Proteção Torque 10 N.cm	 Moldeira Aberta Torque 10 N.cm		 Cilindro do Mini Pilar CO-CR Torque 10 N.cm	 Chave do MP 2.0mm

PILAR TG:



Cinta	Mod. Cód.
0.8	118.058
1.5	118.059
2.5	118.018
3.5	118.019
4.5	118.020
5.5	118.021

INDICAÇÕES:

- Prótese unitária parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
- Instalação com chave sextavada de 1.6
- Torque máximo indicado: 32 Ncm

TRANSFER DO PILAR TG:



Descrição	Mod. Cód.
Transfer Moldeira Aberta Pilar TG	108.211
Transfer Moldeira Fechada Pilar TG	108.210

ANÁLOGO DO PILAR TG:



Descrição	Mod. Cód.
Análogo Pilar TG	101.023

CILINDRO DO PILAR TG



Descrição	Mod. Cód.
Cilindro TG Titânio	109.042
Cilindro Pilar TG Calcinável Anti-Rotacional	109.041
Cilindro CO-CR TG	109.043

Chave sextavada de 1.2
Torque máximo indicado: 10 Ncm



CAPA DE PROTEÇÃO



Descrição	Mod. Cód.
Capa de Proteção TG	115.002
Chave sextavada de 1.2	
Torque máximo indicado: 10 Ncm	

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO PILAR TG:

Implante	Pilar TG	Proteção / Cilindro	Transfer	Análogo	Componente	Instalação
 Implante CM 11.5º Cilíndrico Cônico GoDirect Hybridus	 Pilar TG Torque 32 N.cm	 Cilindro do Pilar TG Titânio Torque 10 N.cm  Capa de Proteção Torque 10 N.cm	 Moldeira Fechada do Pilar TG Torque 10 N.cm  Moldeira Aberta do Pilar TG Torque 10 N.cm	 Análogo do Pilar TG	 Cilindro do Pilar TG Calcinável Torque 10 N.cm  Cilindro do Pilar TG CO-CR Torque 10 N.cm	 Chave Hexagonal 1.6 TG

MICRO PILAR:



Cinta	Mod. Cód.
0.8	141.010
1.5	141.011
2.5	141.012
3.5	141.013
4.5	141.014
5.5	141.015

INDICAÇÕES:

- Prótese múltipla parafusada
 - Espaço interoclusal mínimo: 3.0mm
 - Este pilar é indicado para casos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo
 - Indicado para pequenos espaços protéticos
 - Instalação com chave Mini Pilar
- Toque máximo indicado: 32 Ncm

TRANSFER DO MICRO PILAR:



Descrição	Mod. Cód.
Transfer Moldeira Aberta Micro Pilar	108.209

ANÁLOGO DO MICRO PILAR:



Descrição	Mod. Cód.
Análogo Micro Pilar	101.097

CILINDRO DO MICRO PILAR:



Descrição	Mod. Cód.
Cilindro Micro Pilar Titânio	109.131
Cilindro Micro Pilar Calcinável	109.132
Cilindro CO-CR Micro Pilar	109.133

Chave sextavada de 1.2
Torque máximo indicado: 10 Ncm

CAPA DE PROTEÇÃO



Descrição	Mod. Cód.
Capa de Proteção Micro Pilar	115.020

Chave sextavada de 1.2
Torque máximo indicado: 10 Ncm

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO MICRO PILAR:

Implante	Micro Pilar	Proteção / Cilindro	Transfer	Análogo	Componente	Instalação
 Implante CM 11.5º Cilíndrico Cônico GoDirect Hybridus	 Micro Pilar Torque 32 N.cm	 Cilindro do Micro Pilar Titânio Torque 10 N.cm  Capa de Proteção Torque 10 N.cm	 Moldeira Aberta Torque 10 N.cm	 Análogo Micro Pilar	 Cilindro do Micro Pilar Calcinável Torque 10 N.cm  Cilindro do Micro Pilar CO-CR Torque 10 N.cm	 Chave Hexagonal 1.2mm  Chave do MP 2.0mm

PILAR UNIVERSAL RETO:



INDICAÇÕES:

- Prótese cimentadas unitárias
- Instalação com chave sextavada 1.2
- Torque máximo indicado: 32 Ncm

Tamanhos	Mod. Cód.	Tamanhos	Mod. Cód.
3.3 x 4 - 0.8mm	119.013	4.5 x 4 - 0.8mm	119.001
3.3 x 4 - 1.5mm	119.014	4.5 x 4 - 1.5mm	119.002
3.3 x 4 - 2.5mm	119.015	4.5 x 4 - 2.5mm	119.003
3.3 x 4 - 3.5mm	119.016	4.5 x 4 - 3.5mm	119.004
3.3 x 4 - 4.5mm	119.017	4.5 x 4 - 4.5mm	119.005
3.3 x 4 - 5.5mm	119.018	4.5 x 4 - 5.5mm	119.006
3.3 x 6 - 0.8mm	119.019	4.5 x 6 - 0.8mm	119.007
3.3 x 6 - 1.5mm	119.020	4.5 x 6 - 1.5mm	119.008
3.3 x 6 - 2.5mm	119.021	4.5 x 6 - 2.5mm	119.009
3.3 x 6 - 3.5mm	119.022	4.5 x 6 - 3.5mm	119.010
3.3 x 6 - 4.5mm	119.023	4.5 x 6 - 4.5mm	119.011
3.3 x 6 - 5.5mm	119.024	4.5 x 6 - 5.5mm	119.012

PILAR UNIVERSAL ANGULADO (17° E 30°):



INDICAÇÕES:

- Prótese unitária cimentada
- Instalação com chave protética de 1.2
- Torque máximo indicado: 20 Ncm

Âng.	Tamanhos	Mod. Cód.
17°	3.3 x 4.0 - 1.5mm	119.070
	3.3 x 4.0 - 2.5mm	119.401
	3.3 x 4.0 - 3.5mm	119.402
	3.3 x 6.0 - 1.5mm	119.072
	3.3 x 6.0 - 2.5mm	119.073
	3.3 x 6.0 - 3.5mm	119.071
	4.5 x 4.0 - 1.5mm	119.076
	4.5 x 4.0 - 2.5mm	119.074
	4.5 x 4.0 - 3.5mm	119.075
	4.5 x 6.0 - 1.5mm	119.078
	4.5 x 6.0 - 2.5mm	119.080
	4.5 x 6.0 - 3.5mm	119.077

Âng.	Tamanhos	Mod. Cód.
30°	3.3 x 4.0 - 1.5mm	119.082
	3.3 x 4.0 - 2.5mm	119.083
	3.3 x 4.0 - 3.5mm	119.081
	3.3 x 6.0 - 1.5mm	119.135
	3.3 x 6.0 - 2.5mm	119.134
	3.3 x 6.0 - 3.5mm	119.133
	4.5 x 4.0 - 1.5mm	119.137
	4.5 x 4.0 - 2.5mm	119.138
	4.5 x 4.0 - 3.5mm	119.136
	4.5 x 6.0 - 1.5mm	119.139
	4.5 x 6.0 - 2.5mm	119.140
	4.5 x 6.0 - 3.5mm	119.425

CONJUNTO MUNHÃO UNIVERSAL



Tamanhos	Mod. Cód.
3.3 x 4.0	103.214
3.3 x 6.0	103.215
4.5 x 4.0	103.216
4.5 x 6.0	103.217

ANÁLOGO DO PILAR UNIVERSAL



Tamanhos	Mod. Cód.
3.3 x 4.0	101.017
3.3 x 6.0	101.018
4.5 x 4.0	101.019
4.5 x 6.0	101.020

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO PILAR UNIVERSAL:

Implante	Pilar Universal Reto / Angulado	Cilindro Provisório	Transfer	Análogo	Componente
 Implante CM 11.5° Cilíndrico Cônico GoDirect Hybridus	 Pilar Universal Reto Torque 32 N.cm  Pilar Universal Angulado Torque 32 N.cm	 Cilindro do Pilar Universal	 Transfer do Pilar Universal Encaixe Clic	 Análogo do Pilar Universal	 Cilindro do Pilar Universal Cimentado

IMPLANTES HEXÁGONO EXTERNO



IMPLANTES HEXÁGONO EXTERNO

- Implante com encaixe Hexagonal Externo
- Interface protética
Plataformas HE 3.3, 4.1 e 5.0 Switch
- Indexador Hexagonal
- Conexões
- Rosca interna: M 1.8
para implantes HE 3.3
- Rosca interna: M 2.0
para implantes HE 4.1 e 5.0 Switch
- Acompanha
Cover | Parafuso de cobertura.
- Instalação: Nível ósseo





IMPLANTE CILÍNDRICO HE

Descrição do implante:

- Implante cilíndrico com rosca dupla piramidais, ápice cônico e conexão de hexágono externo.
- Tratamento de superfície: Duplo ataque ácido.
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Instalação: Nível ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção: Chave HE de contra-ângulo e chave torque HE para finalizar.
- Rosca interna: M 1.8 Para implantes HE 3.3
- Rosca Interna: M 2.0 Para implantes HE 4.1
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

Indicações / Osteotomia:

- Indicado para ossos tipo I, II, III e IV
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência e uso de sequência de brocas
- Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm
- Velocidade de perfuração: 800-1200 rpm (ossos tipos I e II)
- Velocidade de perfuração: 500-800 rpm (ossos tipos III e IV)
- Velocidade de inserção: 30 rpm;
- Torque máximo de inserção: 60 N.cm.

IMPLANTE CILÍNDRICO HE



Plataforma	Diâmetro (D)	Comprimento (C)	Código
HEX 2.36	3.3	7	100.139
		9	100.140
		11	100.141
		13	100.142
		15	100.143
4.1 UNIV.	3.75	7	100.151
		9	100.152
		11	100.153
		13	100.154
		15	100.155
	4	7	100.157
		9	100.158
		11	100.159
		13	100.160
		15	100.161
	5	7	100.169
		9	100.170
		11	100.171
		13	100.172
		15	100.173

HE Plataforma 3.3
Hexágono externo 2.36mm
Rosca interna: M 1.8

HE Plataforma 4.1
Hexágono externo: 2.70mm
Rosca interna: M 2.0


SEQUÊNCIA DE BROCAS



	150.022	150.001	150.157	150.002	150.003	150.005	150.008
	Lança	Ø2.0	Piloto*	Ø2.8	Ø3.0	Ø3.3	Ø4.3
Ø3.50	✓	✓	✓	✓			
Ø3.75	✓	✓	✓	✓	✓		
Ø4.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ø5.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Broca opcional na instrumentação

**“Para montar o leito do implante cilíndrico, deve-se usar a broca compatível com o diâmetro do implante previsto, seguindo a sequência indicada, de acordo com o tipo de osso.

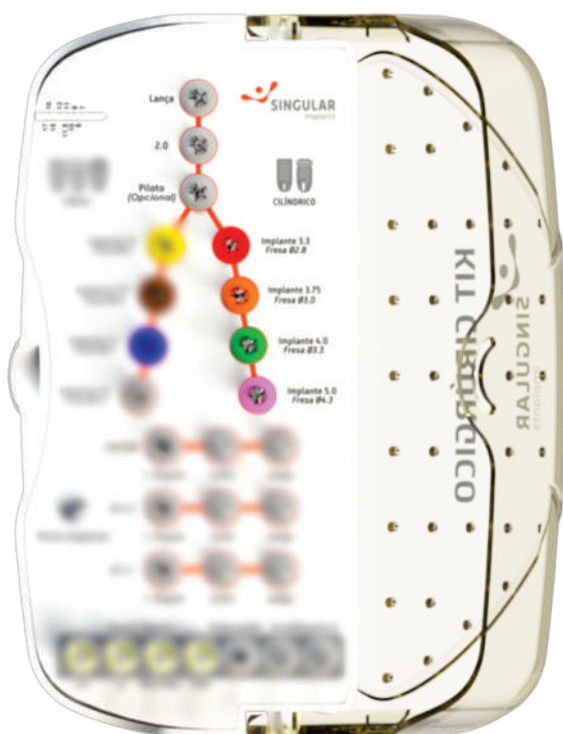

Para instalação dos implantes HE, utilizar as chaves:



HE 3.3: Chave Montadora HE 3.3 (117.145)



HE 4.1: Chave Montadora HE 4.1 (117.146)



Catraca Torquímetro


Torque máximo 60 N.cm

Chave Catraca HE 3.3 Curta (150.211)

Chave Catraca HE 3.3 Longa (150.212)

Chave Catraca HE 4.1 Curta (150.205)

Chave Catraca HE 4.1 Longa (150.206)

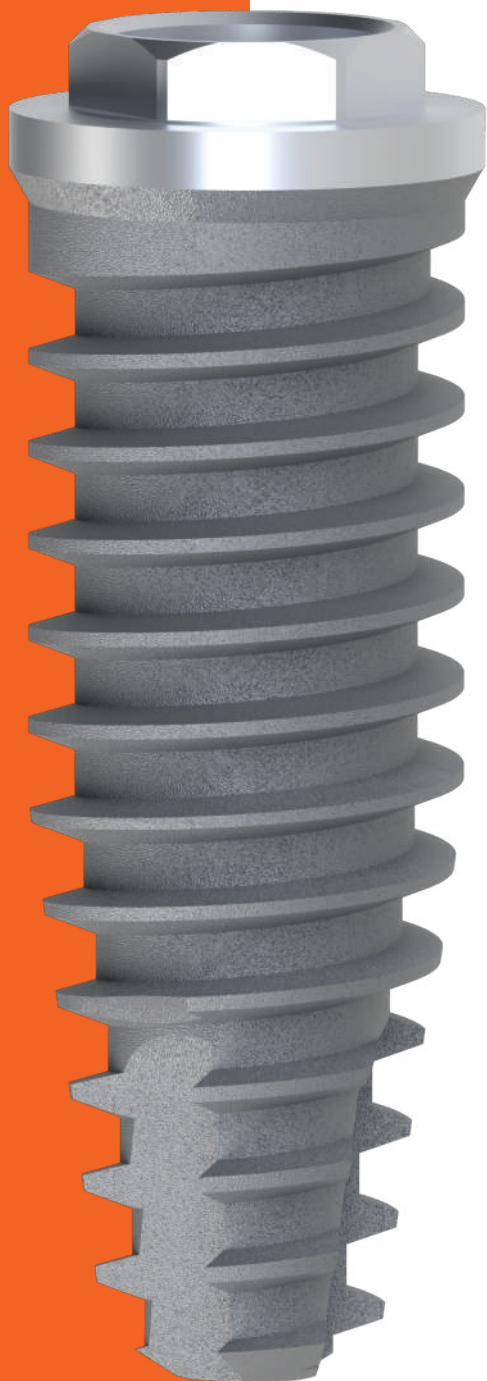

IMPLANTE CÔNICO HE

Descrição do implante:

- Implante cônico com rosca trapezoidal de ápice cônico e conexão de hexágono externo.
- Tratamento de superfície: Duplo ataque ácido.
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Instalação: Nível ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção: Chave HE de contra-ângulo e chave torque HE para finalizar.
- Rosca interna: M 1.8 Para implantes HE 3.3
- * Rosca Interna: M 2.0 Para implantes HE 4.1
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

Indicações / Osteotomia:

- Indicado para ossos tipo III e IV
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência e uso de sequência de brocas
- Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm
- Velocidade de perfuração: 500-800 rpm (ossos tipos III e IV)
- Velocidade de inserção: 30 rpm;
- Torque máximo de inserção: 60 N.cm

IMPLANTE CÔNICO HE



Plataforma	Diâmetro (D)	Comprimento (C)	Código
HEX 2.36	3.5	8	100.409
		10	100.410
		11.5	100.411
		13	100.412
		16	100.413
4.1 UNIV.	3.75	7	100.221
		9	100.222
		11	100.223
		13	100.224
		15	100.225
	4	7	100.227
		9	100.228
		11	100.229
		13	100.230
		15	100.231
	4.3	8	100.427
		10	100.428
		11.5	100.429
		13	100.430
		16	100.431
	5	8	100.439
		10	100.440
		11.5	100.441
		13	100.442
		16	100.443


SEQUÊNCIA DE BROCAS

						
150.022	150.001	150.157	150.120	150.172	150.121	150.122
Lança	Ø2.0	Piloto*	Ø2.7	Ø3.0	Ø3.4	Ø4.0

Ø3.50	✓	✓	✓	✓		
Ø3.75	✓	✓	✓	✓	✓	
Ø4.0	✓	✓	✓	✓	✓	
Ø4.3	✓	✓	✓	✓	✓	
Ø5.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Broca opcional na instrumentação

**Para montar o leito do implante cônico, deve-se usar a broca compatível com o diâmetro do implante previsto, seguindo a sequência indicada, de acordo com o tipo de osso

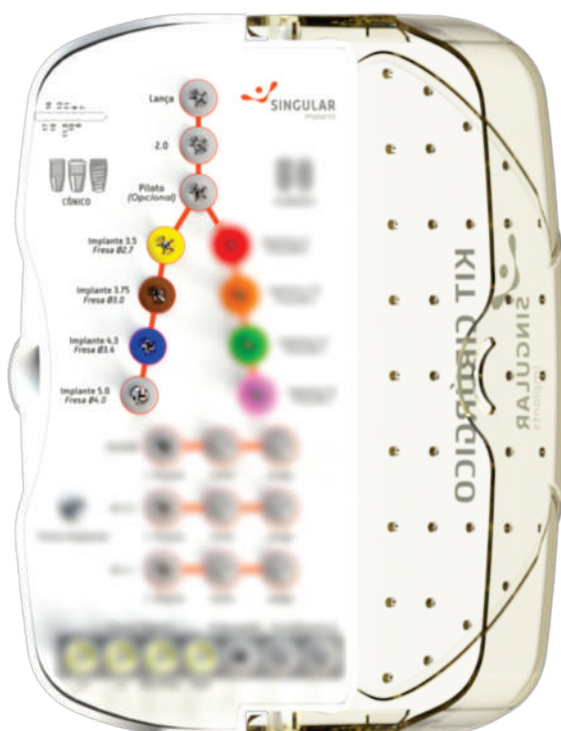

Para instalação dos implantes HE, utilizar as chaves:



HE 3.3: Chave Montadora HE 3.3 (117.145)



HE 4.1: Chave Montadora HE 4.1 (117.146)



Catraca Torquímetro


Torque máximo 60 N.cm

Chave Catraca HE 3.3 Curta (150.211)

Chave Catraca HE 3.3 Longa (150.212)

Chave Catraca HE 4.1 Curta (150.205)

Chave Catraca HE 4.1 Longa (150.206)

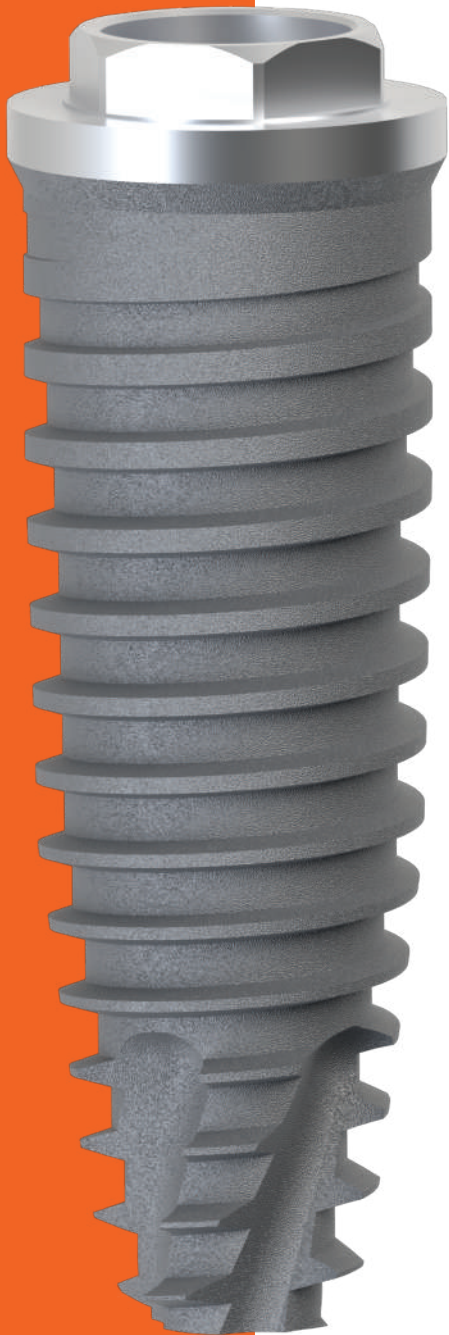

IMPLANTE HYBRIDUS® HE

Descrição do implante:

- Implante com conexão Hexágono externo
- Macrogeometria desenhada para carga imediata em qualquer condição óssea
- BioFusion: Uma superfície com poder hidrofílico que promove osseointegração entre 4 e 5 semanas
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Nível ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave HE de contra-ângulo e chave torque HE para finalizar
- Rosca interna M2.0
- Plataforma 4.1 para todos os diâmetros.
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

Indicações / Osteotomia:

- Indicado para todos os tipos de ossos
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência e uso de sequência de brocas
- Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm
- Velocidade de perfuração: 800-1200 rpm; (ossos tipos I e II)
- Velocidade de perfuração: 500-800 rpm; (ossos tipos III e IV)
- Velocidade de inserção: 30 rpm;
- Torque máximo de inserção: 60 N.cm

IMPLANTE HYBRIDUS®




Plataforma	Diâmetro (D)	Comprimento (C)	Código
4.1	3.5	8	100.720
		10	100.721
		11.5	100.722
		13	100.723
		15	100.724
	3.8	8	100.725
		10	100.726
		11.5	100.727
		13	100.728
		15	100.729
	4.3	8	100.730
		10	100.731
		11.5	100.732
		13	100.733
		15	100.734

SEQUÊNCIA DE BROCAS

							
	150.022	150.001	150.157	150.120	150.172	150.121	150.122
	Lança	Ø2.0	Piloto*	Ø2.7	Ø3.0	Ø3.4	Ø4.0
Ø3.5	✓	✓	✓	✓			
Ø3.8	✓	✓	✓	✓	✓		
Ø4.3	✓	✓	✓	✓		✓	

* Broca opcional na instrumentação

**Para montar o leito do implante cônico, deve-se usar a broca compatível com o diâmetro do implante previsto, seguindo a sequência indicada, de acordo com o tipo de osso

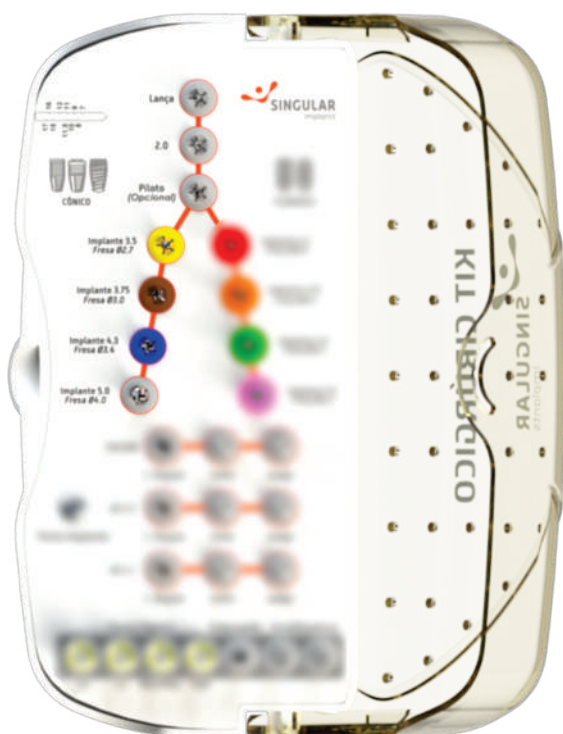

Para instalação dos implantes HE, utilizar as chaves:



HE 3.3: Chave Montadora HE 3.3 (117.145)



HE 4.1: Chave Montadora HE 4.1 (117.146)



Catraca Torquímetro

Torque máximo 60 N.cm

Chave Catraca HE 3.3 Curta (150.211)

Chave Catraca HE 3.3 Longa (150.212)

Chave Catraca HE 4.1 Curta (150.205)

Chave Catraca HE 4.1 Longa (150.206)

COMPONENTES HEXAGONO EXTERNO

CICATRIZADORES HE:



Perfil / Cinta	2mm	3mm	4mm	5mm
Ø3.3	110.001	110.002	110.003	110.004
Ø4.1	110.005	110.006	110.007	110.008
Ø5.0 (Hex 3.3)	110.009	110.010	110.011	110.012

CICATRIZADORES HE DIVERGENTES:



Perfil / Cinta	2mm	3mm	4mm	5mm
Ø3.3	110.049	110.050	110.051	110.052
Ø4.1	110.054	110.055	110.056	110.057
Ø5.0 (Hex 3.3)	110.059	110.060	110.061	110.062
Ø5.0 (Hex 2.7)	110.069	110.070	110.071	110.072

Chave sextavada de 1.2mm
Torque máx.: 10N.cm

TRANSFER MOLDEIRA HE:



	Diâmetro	Código
Aberta	Ø3.3	108.204
	Ø4.1	108.205
	Ø5.0	108.206



	Diâmetro	Código
Fechada	Ø3.3	108.201
	Ø4.1	108.202
	Ø5.0	108.203

ANÁLOGO HE:



Díâmetro	Código
Ø3.3	101.001
Ø4.1	101.002
Ø5.0 (Hex 3.3)	101.003
Ø5.0 (Hex 2.7)	101.008

PARAFUSO HE:



Parafuso	Ø da Rosca	Código
Sextavado	Ø1.8	102.001
	Ø2.0	102.002
	Ø2.5	102.003
Quadrado	Ø1.8	102.006
	Ø2.0	102.007

Chave sextavada de 1.2mm
Chave quadrada de 1.3mm
Torque máx.: 32 N.cm

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO CICATRIZADORES, TRANSFERS E ANÁLOGOS HE:

Implante	Cicatrizador / Provisório	Transfer	Análogo
 Implante HE Cilíndrico Cônico Híbrido	 Provisório Torque 32 N.cm  Cicatrizador HE Torque 10 N.cm	 Moldeira Fechada HE  Moldeira Aberta HE	 Análogo HE

UCLA EM TITÂNIO



Conexão / Tamanho	Mod. Cód.
3.3 Rotacional	103.001
3.3 Anti Rotacional	103.006
4.1 Rotacional	103.003
4.1 Anti Rotacional	103.008
5.0 Rotacional (Hex 2.7)	103.005
5.0 Anti Rotacional (Hex 2.7)	103.010

- **Rotacional:** Indicado para próteses provisórias múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- **Anti-rotacional:** Indicado para próteses provisórias unitárias, parafusadas ou cimentadas
- Embalagem sem parafuso
- Torque máximo indicado: 32 N.cm

UCLA EM CO-CR



Conexão / Tamanho	Mod. Cód.
3.3 Rotacional	103.030
3.3 Anti Rotacional	103.033
4.1 Rotacional	103.031
4.1 Anti Rotacional	103.034
5.0 Anti Rotacional (Hex 2.7)	103.100

- **Rotacional:** Indicado para próteses provisórias múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- **Anti-rotacional:** Indicado para próteses provisórias unitárias, parafusadas ou cimentadas
- Embalagem com parafuso
- Torque máximo indicado: 32 N.cm

UCLA CALCINÁVEL



Conexão / Tamanho	Mod. Cód.
3.3 Rotacional	103.201
3.3 Anti Rotacional	103.200
4.1 Rotacional	103.205
4.1 Anti Rotacional	103.204
5.0 Rotacional (Hex 2.7)	103.207
5.0 Anti Rotacional (Hex 3.3)	103.206

- **Rotacional:** Indicado para próteses definitivas múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- **Anti-rotacional:** Indicado para próteses definitivas unitárias, parafusadas ou cimentadas
- Embalagem com parafuso
- Torque máximo indicado: 32 N.cm

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO DE UCLAS:

Implante	Cicatrizador / Provisório	Transfer	Análogo	Componente	Instalação
 Implante HE Cilíndrico Cônico Hybridus	 Cicatrizador HE Torque 10 N.cm  Provisório Torque 32 N.cm	 Moldeira Aberta HE  Moldeira Fechada HE	 Análogo HE	 Ucla em Co-Cr HE Torque 32 N.cm	 Chave Hexagonal 1.2mm

MINI PILAR HE RETO:



Tamanho	Mod. Cód.
3.3 x 1.0	107.001
3.3 x 2.0	107.002
3.3 x 3.0	107.003
3.3 x 4.0	107.004
3.3 x 5.0	107.005
4.1 x 1.0	107.006
4.1 x 2.0	107.007
4.1 x 3.0	107.008
4.1 x 4.0	107.026
4.1 x 5.0	107.027
5.0 x 1.0	107.033
5.0 x 2.0	107.034
5.0 x 3.0	107.035
5.0 x 4.0	107.036

INDICAÇÕES:

- Prótese múltipla parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo
- Instalação com Chave Mini Pilar
- Toque máximo indicado: 32Ncm

MINI PILAR HE ANGULADO (17° E 30°):



INDICAÇÕES:

- Prótese múltipla parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo
- Embalagem com parafuso
- Instalação com chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: 20 Ncm

Âng.	Tamanhos	Mod. Cód.
17°	3.3 x 2.0mm	114.016
	3.3 x 3.0mm	114.017
	4.1 x 2.0mm	114.019
	4.1 x 3.0mm	114.020
	4.1 x 4.0mm	114.021
	5.0 x 2.0mm	114.022
	5.0 x 3.0mm	114.023
	5.0x 4.0mm	114.024

Âng.	Tamanhos	Mod. Cód.
30°	3.3 x 3.0mm	114.025
	3.3 x 4.0mm	114.026
	4.1 x 3.0mm	114.027
	4.1 x 4.0mm	114.028
	4.1 x 5.0mm	114.041
	5.0 x 3.0mm	114.029
	5.0x 4.0mm	114.030

ANÁLOGO MINI PILAR



Descrição	Código
Análogo Mini Pilar	101.006

CAPA DE PROTEÇÃO



Descrição	Código
Capa de Proteção Mini Pilar	115.001

- Chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: 10 Ncm

CILINDROS



- Chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: 10 Ncm

Descrição	Código
Cilindro Mini Pilar Titânio	109.046
CJTO Lab Cilindro Mini Pilar Calcinável com Parafuso	109.045
Cilindro Mini Pilar CO-CR com Parafuso	109.014

TRANSFER MINI PILAR



- Chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: 10 Ncm

Descrição	Código
Transfer Moldeira Aberta Mini Pilar	108.207
Transfer Moldeira Fechada Mini Pilar	108.208

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO MINI PILAR HE RETO OU ANGULADO:

Implante	Mini Pilar Reto ou Angulado	Proteção / Cilindro	Transfer	Análogo	Componente	Instalação
Implante HE Cilíndrico Cônico Hybridus	Mini Pilar HE Reto Torque 32 N.cm	Cilindro do Mini Pilar Titânio Torque 10 N.cm	Moldeira Fechada Mini Pilar Torque 10 N.cm	Análogo Mini Pilar	Cilindro do Mini Pilar Calcinável Torque 10 N.cm	Chave Hexagonal
	Mini Pilar HE Angulado Torque 20 N.cm	Capa de Proteção Torque 10 N.cm	Moldeira Aberta Mini Pilar Torque 10 N.cm		Cilindro do Mini Pilar CO-CR Torque 10 N.cm	Chave do MP

IMPLANTES GMC

Great Morse Connection





IMPLANTE CILÍNDRICO GMC

Descrição do implante:

- Implante cilíndrico com rosca dupla piramidais, ápice cônico e conexão GMC
- Tratamento de superfície: Duplo ataque ácido.
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Instalação: 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção: Chave CM de contra-ângulo e chave torque CM para finalizar.
- Angulação interna: 16°
- Rosca interna: M 1.6
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

Indicações / Osteotomia:

- Indicado para ossos tipo I, II, III e IV
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência e uso de sequência de brocas
- Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm
- Velocidade de perfuração: 800-1200 rpm (ossos tipos I e II)
- Velocidade de perfuração: 500-800 rpm (ossos tipos III e IV)
- Velocidade de inserção: 30 rpm;
- Torque máximo de inserção: 60 N.cm.

IMPLANTE CILÍNDRICO GMC



Diâmetro (D)	Comprimento (C)	Código
3.5	7	100.600
	9	100.601
	11	100.602
	13	100.603
	15	100.604
3.75	7	100.605
	9	100.606
	11	100.607
	13	100.608
	15	100.609
4	7	100.610
	9	100.611
	11	100.612
	13	100.613
	15	100.614
5	7	100.615
	9	100.616
	11	100.617
	13	100.618
	15	100.619


SEQUÊNCIA DE BROCAS



	150.022	150.001	150.157	150.002	150.003	150.005	150.008
	Lança	Ø2.0	Piloto*	Ø2.8	Ø3.0	Ø3.3	Ø4.3
Ø3.50	✓	✓	✓	✓			
Ø3.75	✓	✓	✓	✓	✓		
Ø4.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ø5.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Broca opcional na instrumentação

**Para montar o leito do implante cilíndrico, deve-se usar a broca compatível com o diâmetro do implante previsto, seguindo a sequência indicada, de acordo com o tipo de osso.

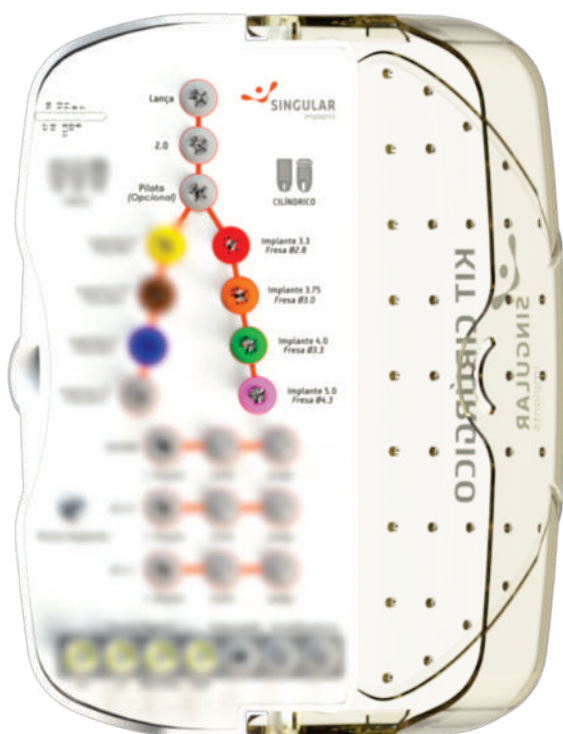

Para instalação dos implantes CM com a Chave:



Chave Montadora CM (117.144)

Torque máximo 30 N.cm

As chaves possuem indicadores de posição do hexágono



Catraca Torquímetro

Torque máximo 60 N.cm

Chave catraca longa (150.199)

Chave catraca curta (150.202)



IMPLANTE CÔNICO GMC

Descrição do implante:

- Implante cilíndrico com rosca trapezoidal de ápice cônico e conexão GMC
- Tratamento de superfície: Duplo ataque ácido.
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Instalação: 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção: Chave CM de contra-ângulo e chave torque CM para finalizar.
- Angulação interna: 16º
- Rosca interna: M 1.6
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

Indicações / Osteotomia:

- Indicado para ossos tipo III e IV
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência e uso de sequência de brocas
- Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm
- Velocidade de perfuração: 500-800 rpm (ossos tipos III e IV)
- Velocidade de inserção: 30 rpm;
- Torque máximo de inserção: 60 N.cm.

IMPLANTE CÔNICO GMC



Diâmetro (D)	Comprimento (C)	Código
3.5	8	100.620
	10	100.621
	11,5	100.622
	13	100.623
	16	100.624
3.75	8	100.625
	10	100.626
	11,5	100.627
	13	100.628
	16	100.629
4	8	100.630
	10	100.631
	11,5	100.632
	13	100.633
	16	100.634
4.3	8	100.635
	10	100.636
	11,5	100.637
	13	100.638
	16	100.639
5	8	100.640
	10	100.641
	11,5	100.642
	13	100.643
	16	100.644


SEQUÊNCIA DE BROCAS

						
150.022	150.001	150.157	150.120	150.172	150.121	150.122
Lança	Ø2.0	Piloto*	Ø2.7	Ø3.0	Ø3.4	Ø4.0

Ø3.50	✓	✓	✓	✓		
Ø3.75	✓	✓	✓	✓	✓	
Ø4.0	✓	✓	✓	✓	✓	
Ø4.3	✓	✓	✓	✓	✓	
Ø5.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Broca opcional na instrumentação

**Para montar o leito do implante cônico, deve-se usar a broca compatível com o diâmetro do implante previsto, seguindo a sequência indicada, de acordo com o tipo de osso.

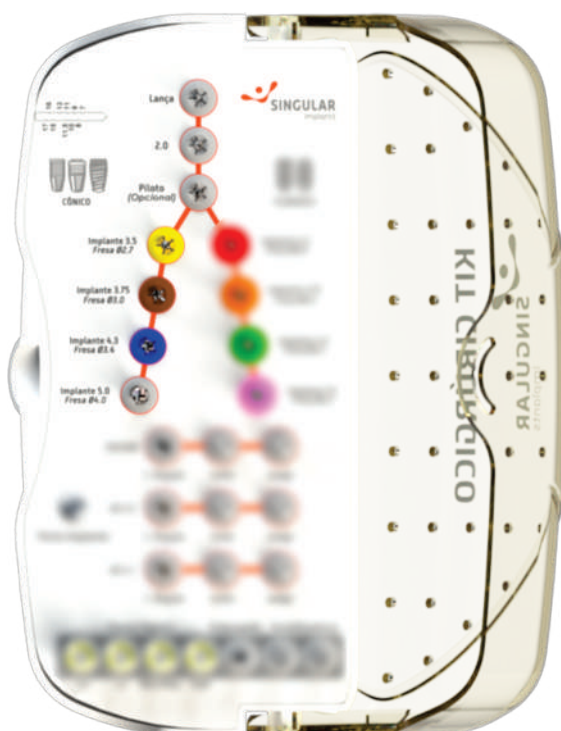

Para instalação dos implantes CM com a Chave:



Chave Montadora CM (117.144)

Torque máximo 30 N.cm

As chaves possuem indicadores de posição do hexágono




Catraca Torquímetro

Torque máximo 60 N.cm

Chave catraca longa (150.199)

Chave catraca curta (150.202)

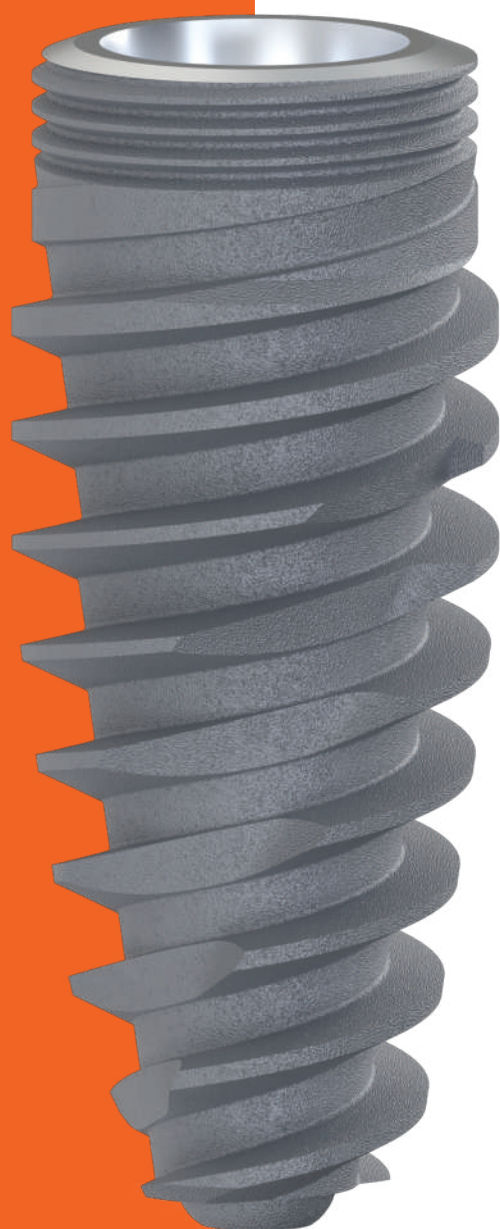

IMPLANTE GO DIRECT GMC

Descrição do implante:

- Implante cônico com rosca dupla e conexão GMC
- Tratamento de superfície: Duplo ataque ácido.
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Instalação: 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção: Chave CM de contra-ângulo e chave torque CM para finalizar.
- Angulação interna: 16°
- Rosca interna: M 1.6
- Acompanha Cover | Parafuso de cobertura

Indicações / Osteotomia:

- Indicado para ossos tipo III e IV
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência e uso de sequência de brocas
- Torque máximo indicado para o Cover: 10 Ncm
- Velocidade de perfuração: 500-800 rpm (ossos tipos III e IV)
- Velocidade de inserção: 30 rpm;
- Torque máximo de inserção: 60 N.cm.

IMPLANTE GO DIRECT GMC



Diâmetro (D)	Comprimento (C)	Código
3.5	8	100.645
	10	100.646
	11,5	100.647
	13	100.648
	16	100.649
4.3	8	100.650
	10	100.651
	11,5	100.652
	13	100.653
	16	100.654
5	8	100.655
	10	100.656
	11,5	100.657
	13	100.658
	16	100.659


SEQUÊNCIA DE BROCAS

						
150.022	150.001	150.157	150.120	150.172	150.121	150.122
Lança	Ø2.0	Piloto*	Ø2.7	Ø3.0	Ø3.4	Ø4.0

Ø3.50	✓	✓	✓	✓		
Ø3.75	✓	✓	✓	✓	✓	
Ø4.0	✓	✓	✓	✓	✓	
Ø4.3	✓	✓	✓	✓	✓	
Ø5.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Broca opcional na instrumentação

**Para montar o leito do implante GoDirect GMC, deve-se usar a broca compatível com o diâmetro do implante previsto, seguindo a sequência indicada, de acordo com o tipo de osso.

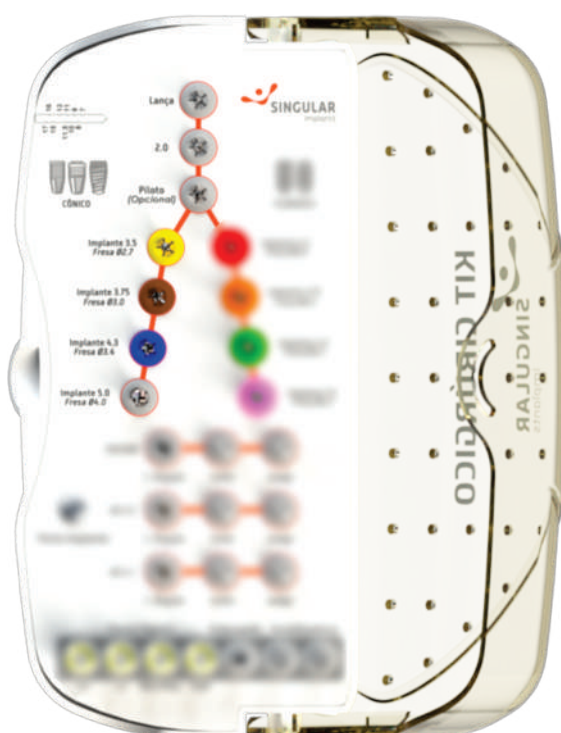

Para instalação dos implantes CM com a Chave:



Chave Montadora CM (117.144)

Torque máximo 30 N.cm

As chaves possuem indicadores de posição do hexágono



Catraca Torquímetro

Torque máximo 60 N.cm

Chave catraca longa (150.199)

Chave catraca curta (150.202)

COMPONENTES GMC

CICATRIZADORES GMC:



Diâmetro (D)	Cinta (C)	Código
3.3	0.8	106.207
	1.5	106.208
	2.5	106.209
	3.5	106.210
	4.5	106.211
	5.5	106.212
4.5	0.8	106.213
	1.5	106.214
	2.5	106.215
	3.5	106.216
	4.5	106.217
	5.5	106.218

Chave Tork 1.2

Toque máximo indicado: 10 Ncm

TRANSFER GMC:



Descrição	Mod. Cód.
Transfer Moldeira Aberta GMC	108.162
Transfer Moldeira Fechada GMC	108.160

Chave Tork 1.2

Toque máximo indicado: 10 Ncm

ANÁLOGO:



Descrição	Código
Análogo Implants GMC	101.200

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO CICATRIZADORES, TRANSFERS E ANÁLOGOS GMC:

Implante	Cicatrizador / Provisório	Transfer	Análogo
 Implants GMC Cilíndrico Cônico Godirect	 Provisório Torque 32 N.cm	 Moldeira Fechada GMC	 Análogo GMC
	 Cicatrizador GMC Torque 10 N.cm	 Moldeira Aberta GMC	

COMPONENTE TEMPORÁRIO GMC:



INDICAÇÕES:

- Rotacional: Indicado para próteses provisórias múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: Indicado para próteses provisórias unitárias, parafusadas ou cimentadas
- Embalagem com parafuso
- Toque máximo indicado: 20 Ncm

Diâmetro		Cinta	Código
3.5	Rotacional	0.8	118.352
		1.5	118.353
		2.5	118.354
		3.5	118.355
	Anti-rotacional	0.8	118.344
		1.5	118.345
4.5	Rotacional	0.8	118.356
		1.5	118.357
		2.5	118.358
		3.5	118.359
	Anti-rotacional	0.8	118.348
		1.5	118.349
		2.5	118.350
		3.5	118.351

UCLA EM CO-CR GMC



Cinta	Mod. Cód.
0.8mm	118.309
1.5mm	118.310
2.5mm	118.311
3.5mm	118.312
4.5mm	118.313
5.5mm	118.314

- Rotacional: Indicado para próteses provisórias múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: Indicado para próteses provisórias unitárias, parafusadas ou cimentadas
- Embalagem com parafuso
- Torque máximo indicado: 20 N.cm

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO DE UCLAS:

Implante	Cicatrizador / Provisório	Transfer	Análogo	Componente	Instalação
 Implante GMC Cilíndrico Cônico GoDirect	 Cicatrizador GMC Torque 10 N.cm	 Moldeira Aberta GMC	 Análogo GMC	 Ucla em Co-Cr GMC Torque 20 N.cm	 Chave Tork
	 Provisório Torque 20 N.cm	 Moldeira Fechada GMC			

MINI PILAR GMC



Cinta	Mod. Cód.
0.8mm	115.243
1.5mm	115.244
2.5mm	115.245
3.5mm	115.246
4.5mm	115.247
5.5mm	115.248

INDICAÇÕES:

- Prótese múltipla parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo
- Instalação com chave mini pilar
- Torque máximo indicado: 32 Ncm

MINI PILAR HE ANGULADO (17° E 30°):



INDICAÇÕES:

- Prótese múltipla parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo
- Embalagem com parafuso
- Instalação com chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: 20 Ncm

Âng.	Cinta	Mod. Cód.
17°	1.5	115.249
	2.5	115.250
	3.5	115.251

Âng.	Cinta	Mod. Cód.
30°	1.5	115.252
	2.5	115.253

ANÁLOGO MINI PILAR



Descrição	Código
Análogo Mini Pilar	101.006

CAPA DE PROTEÇÃO



Descrição	Código
Capa de Proteção Mini Pilar	115.001

- Chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: 10 Ncm

CILINDROS



- Chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: 10 Ncm

Descrição	Código
Cilindro Mini Pilar Titânio	109.046
CJTO Lab Cilindro Mini Pilar Calcinável com Parafuso	109.045
Cilindro Mini Pilar CO-CR com Parafuso	109.014

TRANSFER MINI PILAR



- Chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: 10 Ncm

Descrição	Código
Transfer Moldeira Aberta Mini Pilar	108.207
Transfer Moldeira Fechada Mini Pilar	108.208

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO MINI PILAR RETO OU ANGULADO:

Implante	Mini Pilar Reto ou Angulado	Proteção / Cilindro	Transfer	Análogo	Componente	Instalação
Implante GMC 16° Cilíndrico Cônico GoDirect	Mini Pilar GMC Reto Torque 20 N.cm	Cilindro do Mini Pilar Titânio Torque 10 N.cm	Moldeira Fechada Mini Pilar Torque 10 N.cm	Análogo Mini Pilar	Cilindro do Mini Pilar Calcinável Torque 10 N.cm	Chave Hexagonal 1.2mm
	Mini Pilar GMC Angulado Torque 20 N.cm	Capa de Proteção Torque 10 N.cm	Moldeira Aberta Mini Pilar Torque 10 N.cm		Cilindro do Mini Pilar CO-CR Torque 10 N.cm	Chave do MP 2.0mm

MICRO PILAR GMC



Cinta	Mod. Cód.
0.8mm	115.255
1.5mm	115.256
2.5mm	115.257
3.5mm	115.258
4.5mm	115.259
5.5mm	115.260

INDICAÇÕES:

- Prótese múltipla parafusada
- Espaço interoclusal mínimo: 3.0mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo
- Instalação com chave mini pilar
- Toque máximo indicado: 32 Ncm

ANÁLOGO MICRO PILAR



Descrição	Código
Análogo Micro Pilar	101.097

CILINDRO DO MICRO PILAR:



Chave sextavada de 1.2
Torque máximo indicado: 10 Ncm

Descrição	Mod. Cód.
Cilindro Micro Pilar Titânio	109.131
Cilindro Micro Pilar Calcinável	109.132
Cilindro CO-CR Micro Pilar	109.133

TRANSFER DO MICRO PILAR:



Chave sextavada de 1.2
Torque máximo indicado: 10 Ncm

Descrição	Mod. Cód.
Transfer Moldeira Aberta Micro Pilar	108.209

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO MICRO PILAR:

Implante	Micro Pilar	Proteção / Cilindro	Transfer	Análogo	Componente	Instalação
 Implante GMC 16° Cilíndrico Cônico GoDirect	 Micro Pilar GMC Reto Torque 20 N.cm	 Cilindro do Micro Pilar Titânio Torque 10 N.cm	 Moldeira Aberta Torque 10 N.cm	 Análogo Micro Pilar	 Cilindro do Micro Pilar Calcinável Torque 10 N.cm	 Chave Hexagonal 1.2mm
		 Capa de Proteção Torque 10 N.cm			 Cilindro do Micro Pilar CO-CR Torque 10 N.cm	 Chave do MP 2.0mm

PILAR GMC



Cinta	Mod. Cód.
0.8	115.237
1.5	115.238
2.5	115.239
3.5	115.240
4.5	115.241
5.5	115.242

INDICAÇÕES:

- Prótese unitária parafusada ou cimentada
- Espaço interoclusal mínimo: 4.5mm
- Instalação com Chave Tork
- Toque máximo indicado: 20 Ncm

ANÁLOGO DO PILAR GMC



Descrição	Código
Análogo Pilar GMC	101.201

CAPA DE PROTEÇÃO



Descrição	Código
Capa de Proteção Pilar GMC	106.221

- Chave Tork
- Torque máximo indicado: 10 Ncm

CILINDROS



Descrição	Código
Cilindro Pilar GMC em Titânio	118.300
Cilindro Pilar GMC Calcinável	118.302

- Chave Tork
- Torque máximo indicado: 10 Ncm

TRANSFER DO PILAR GMC



Descrição	Código
Transfer Moldeira Aberta Pilar GMC	108.180
Transfer Moldeira Fechada Pilar GMC	108.179

- Chave Tork
- Torque máximo indicado: 10 Ncm

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO PILAR GMC:

Implante	Pilar GMC	Proteção / Cilindro	Transfer	Análogo	Componente	Instalação
Implante GMC 16° Cilíndrico Cônico GoDirect	Pilar GMC Torque 20 N.cm	Cilindro do Pilar GMC Titânio Torque 10 N.cm Capa de Proteção Pilar GMC Torque 10 N.cm	Moldeira Aberta do Pilar GMC Torque 10 N.cm	Análogo Pilar GMC	Cilindro do Pilar GMC Calcinável Torque 10 N.cm	Chave Tork

MUNHÃO UNIVERSAL GMC



Tamanho	Mod. Cód.
3.3 x 4 - 0.8mm	114.566
3.3 x 4 - 1.5mm	114.567
3.3 x 4 - 2.5mm	114.568
3.3 x 4 - 3.5mm	114.569
3.3 x 4 - 4.5mm	114.570
3.3 x 4 - 5.5mm	114.571
3.3 x 6 - 0.8mm	114.572
3.3 x 6 - 1.5mm	114.573
3.3 x 6 - 2.5mm	114.574
3.3 x 6 - 3.5mm	114.575
3.3 x 6 - 4.5mm	114.576
3.3 x 6 - 5.5mm	114.577

Tamanho	Mod. Cód.
4.5 x 4 - 0.8mm	114.578
4.5 x 4 - 1.5mm	114.579
4.5 x 4 - 2.5mm	114.580
4.5 x 4 - 3.5mm	114.581
4.5 x 4 - 4.5mm	114.582
4.5 x 6 - 0.8mm	114.584
4.5 x 6 - 1.5mm	114.585
4.5 x 6 - 2.5mm	114.586
4.5 x 6 - 3.5mm	114.587
4.5 x 6 - 4.5mm	114.588
4.5 x 6 - 5.5mm	114.589

INDICAÇÕES:

- Prótese unitárias parafusada
- Instalação com chave Tork
- Toque máximo indicado: 20 Ncm

CONJUNTO MUNHÃO UNIVERSAL



Descrição	Código
Conjunto para Munhão Universal 3.3 x 4.0	103.214
Conjunto para Munhão Universal 3.3 x 6.0	103.215
Conjunto para Munhão Universal 4.5 x 4.0	103.216
Conjunto para Munhão Universal 4.5 x 6.0	103.217

ACOMPANHA:

- Transferente para moldagem
- Cilindro provisório
- Cilindro para fundição

ANÁLOGO DO PILAR UNIVERSAL



Descrição	Código
Análogo do Pilar Universal 3.3 x 4.0	101.017
Análogo do Pilar Universal 3.3 x 6.0	101.018
Análogo do Pilar Universal 4.5 x 4.0	101.019
Análogo do Pilar Universal 4.5 x 6.0	101.020

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO PILAR UNIVERSAL:

Implante	Munhão Universal	Cilindro Provisório	Transfer	Análogo	Componente
 Implante GMC 16º Cilíndrico Cônico GoDirect	 Munhão Universal GMC Torque 20 N.cm	 Cilindro do Pilar Universal	 Transfer do Pilar Universal Encaixe Clic	 Análogo do Pilar universal	 Cilindro do Pilar Universal Cimentado

LINHA DIGITAL



TIBASE CM CEREC LARGE



INDICAÇÕES:

- Pilar parafusada ou cimentada para sistema CAD/CAM
- Instalação com chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: 32 Ncm
- Compatibilidade: implantes 11,5° com rosca M1.8
- Material: titânio ASTM F136
- Espaço interoclusal mínimo: 5.5mm

Conexão	Descrição	Mod. Cód.
Rotacional	Base Tibase4 CAD CM N ROT 0.8mm P/ CEREC	126.075
	Base Tibase4 CAD CM N ROT 1.5mm P/ CEREC	126.076
	Base Tibase4 CAD CM N ROT 2.5mm P/ CEREC	126.077
	Base Tibase4 CAD CM N ROT 3.5mm P/ CEREC	126.078
	Base Tibase4 CAD CM N ROT 4.5mm P/ CEREC	126.079
Anti-Rotacional	Base Tibase4 CAD CM N 0.8mm P/ CEREC	126.098
	Base Tibase4 CAD CM N 1.5mm P/ CEREC	126.125
	Base Tibase4 CAD CM N 2.5mm P/ CEREC	126.126
	Base Tibase4 CAD CM N 3.5mm P/ CEREC	126.127
	Base Tibase4 CAD CM N 4.5mm P/ CEREC	126.128

TIBASE CM SMALL:



Conexão	Descrição	Mod. Cód.
Anti-Rotacional	Base Tibase4 CAD CM N 0.8mm Small P/ CEREC	103.102
	Base Tibase4 CAD CM N 1.5mm Small P/ CEREC	103.103
	Base Tibase4 CAD CM N 2.5mm Small P/ CEREC	103.104
	Base Tibase4 CAD CM N 3.5mm Small P/ CEREC	103.105
	Base Tibase4 CAD CM N 4.5mm Small P/ CEREC	103.106

TIBASE CM LARGE LAB



Descrição	Mod. Cód.
Base Tibase4 CAD CM N 0.8mm P/ LAB	126.201
Base Tibase4 CAD CM N 1.5mm P/ LAB	126.143
Base Tibase4 CAD CM N 2.5mm P/ LAB	126.144
Base Tibase4 CAD CM N 3.5mm P/ LAB	126.145
Base Tibase4 CAD CM N 4.5mm P/ LAB	126.146
Base Tibase4 CAD CM N 5.5mm P/LAB	126.147

TIBASE HE CEREC



Conexão	Descrição	Mod. Cód.
Anti-Rotacional	Base Tibase4 CAD HE 3.3 1mm P/ CEREC	126.213
	Base Tibase4 CAD HE 3.3 2mm P/ CEREC	126.073
	Base Tibase4 CAD HE 3.3 3mm P/ CEREC	126.074
	Base Tibase4 CAD HE 4.1 1mm P/ CEREC	126.204
	Base Tibase4 CAD HE 4.1 2mm P/ CEREC	126.205
	Base Tibase4 CAD HE 4.1 3mm P/ CEREC	126.210
	Base Tibase4 CAD HE 4.1 P/ CEREC	126.218
	Base Tibase4 CAD HE 5.0 P/ CEREC (Cinta 1.3mm)	126.221
	Base Tibase4 CAD HE 5.0 HEX 2.7 P/ CEREC (Cinta 0.5mm)	126.222
Rotacional	Base Tibase4 CAD HE 4.1 ROT P/ CEREC	126.124

INDICAÇÕES:

- Pilar parafusada ou cimentada para sistema CAD/CAM
- Instalação com chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: 32 Ncm
- Compatibilidade: HE 3.3, HE 4.1 universal
- Material: titânio ASTM F136
- Espaço interoclusal mínimo: 5.5mm

TIBASE HE LAB



Descrição	Mod. Cód.
Base Tibase4 CAD HE 4.1 P/ LAB	126.185
Base Tibase4 CAD HE 3.3 P/ LAB	126.183
Base Tibase4 CAD HE 5.0 HEX 2.7 P/ LAB (Cinta 0.5mm)	126.188
Base Tibase4 CAD HE 5.0 P/ LAB (Cinta 1.3mm)	126.187

TIBASE TG



Descrição	Mod. Cód.
Base Tibase4 CAD TG P/ CEREC	126.168

INDICAÇÕES:

- Pilar parafusada ou cimentada para sistema CAD/CAM
- Instalação com chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: 32 Ncm
- Compatibilidade: Pilar TG e Pilar GT
- Material: titânio ASTM F136
- Espaço interoclusal mínimo: 5.5mm

TIBASE GMC



INDICAÇÕES:

- Pilar parafusada ou cimentada para sistema CAD/CAM
- Instalação com chave Tork de 1.2
- Torque máximo indicado: 20 Ncm
- Compatibilidade: implantes GMC
- Material: titânio ASTM F136

	Descrição	Mod. Cód.
Large	Tibase GMC ALT 0.8 Large	135.229
	Tibase GMC ALT 1.5 Large	135.230
	Tibase GMC ALT 2.5 Large	135.231
	Tibase GMC ALT 3.5 Large	135.232

	Descrição	Mod. Cód.
Small	Tibase GMC ALT 0.8 Small	135.236
	Tibase GMC ALT 1.5 Small	135.237
	Tibase GMC ALT 2.5 Small	135.238
	Tibase GMC ALT 3.5 Small	135.239

MINI TI



Descrição	Mod. Cód.
Mini TI	115.011

INDICAÇÕES:

- Para uso clínico ou laboratorial em sistemas CAD/CAM
- Instalação com chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: 10 Ncm
- Compatibilidade: Mini pilar
- Material: titânio ASTM F136
- Espaço interoclusal mínimo: 5.0mm

PARAFUSO MINI PILAR 3D



Descrição	Mod. Cód.
Parafuso Mini Pilar 3D	102.034

INDICAÇÕES:

- Indicado para o fluxo digital e próteses parafusadas direto no Mini Pilar, podendo ser confeccionadas em zircônia, PMMA e resina.
- Instalação com chave sextavada de 1.2
- Torque máximo indicado: 20 Ncm
- Compatibilidade: Mini pilar
- Material: titânio ASTM F136
- Espaço interoclusal mínimo: 5.0mm

TIBASE 3D



DIFERENCIAIS:

- Permite angulação de 20° em incisivos
- Área de cimentação com a nova superfície SuperGrip
- Rosca interna facilita remoção do componente
- Anodização dourada mimetiza a cor natural da mucosa em casos estéticos
- Disponível em modelos cone morse 11,5°

Angulação de 20°



Superfície SuperGrip



Rosca Interna



Descrição

Mod. Cód.

Tibase 3D CM 0.8mm

126.709

Tibase 3D CM 1.5mm

126.704


Tibase 3D CM 2.5mm

126.705

Tibase 3D CM 3.5mm

126.706

TRANSFER GOLD

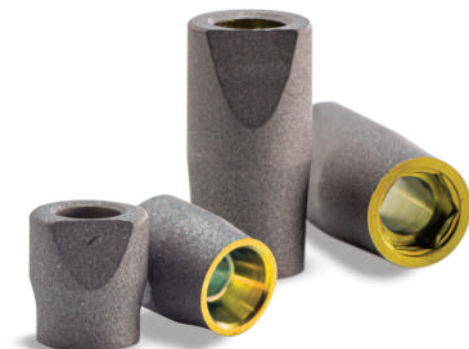

DIFERENCIAIS:

- Fabricado em titânio grau 5
- Superfície de escaneamento opaca
- Compatibilidade ampla: implantes CM, GMC e HE, bem como para intermediários Mini Pilar, TG e Micro Pilar
- Versatilidade de altura: versões para Mini Pilar e Micro Pilar estão disponíveis em duas alturas distintas, permitindo flexibilidade na aplicação em arcadas totais ou parciais, para scanners intraorais ou de bancada



Transfer gold
MP baixo

Transfer gold
MP alto

Descrição

Mod. Cód.

Transfer Digital Gold GMC

125.211

Transfer Digital Gold CM

125.212

Transfer Digital Gold HE 3.3

125.213

Transfer Digital Gold HE 4.1

125.215

Transfer Digital Gold HE 5.0 (HEX 2,7mm)

125.217

Transfer Digital Gold Pilar TG

125.218

Transfer Digital Gold Mini Pilar Baixo

125.220

Transfer Digital Gold Mini Pilar Alto

125.221

Transfer Digital Gold Micro Pilar Baixo

125.222

Transfer Digital Gold Micro Pilar Alto

125.223

TRANSFERS DIGITAIS EM PEEK



INDICAÇÕES:

- Os transfers digitais são indicados como corpo de escaneamento para sistema CAD/CAM, podendo ser usado para escaneamento intraoral ou de bancada.
- Toque máximo indicado: 10 Ncm

Descrição	Mod. Cód.
Transfer Digital Esfera CM	125.074
Transfer Digital Esfera GMC	125.166
Transfer Digital Esfera Para Mini Pilar Alto	125.046
Transfer Digital Esfera Micropilar	125.096
Transfer Digital Esfera Pilar Universal 3.3 X 4.0	125.089
Transfer Digital Esfera Pilar Universal 3.3 X 6.0	125.090
Transfer Digital Esfera Pilar Universal 4.5 X 4.0	125.091
Transfer Digital Esfera Pilar Universal 4.5 X 6.0	125.092
Transfer Digital Esfera Pilar TG	125.093
Transfer Digital Esfera HE 3.3	125.056
Transfer Digital Esfera HE 4.1	125.058
Transfer Digital Esfera HE 5.0	125.059
Transfer Digital Esfera HE 5.0 HEX 2.7	125.060
Transfer Digital Tibase4 Regular	125.050
Cicabody	125.105

ANÁLOGOS DIGITAIS




INDICAÇÕES:

- Componentes utilizados pelo laboratório com o objetivo de simular os pilares, munhões ou implantes nos modelos impressos ou modelos convencionais de gesso. Melhor adaptação e versatilidade do mercado.


Descrição	Mod. Cód.
Análogo Digital Mini Pilar Precision	127.145
Análogo Digital Micro Pilar Precision	127.134
Análogo Digital Para Pilar Tg Precision	127.132
Análogo Digital p/ Pilar Univ 3.3 x 4 Precision	127.128
Análogo Digital p/ Pilar Univ 3.3 x 6 Precision	127.129
Análogo Digital p/ Pilar Univ 4.5 x 4 Precision	127.130
Análogo Digital p/ Pilar Univ 4.5 x 6 Precision	127.131
Análogo Digital CM N Precision	127.125
Análogo Digital HE 3.3 Precision	127.103
Análogo Digital HE 4.1 Precision	127.105
Análogo Digital HE 5.0 Precision HEX 2.7	127.107
Análogo Digital GMC Precision	127.156
Análogo Digital HE 5.0 Precision	127.106
Análogo Digital tibase4 Precision	127.155

FLUXO PROTÉTICO PRÓTESE MÚLTIPLA

MINI PILAR

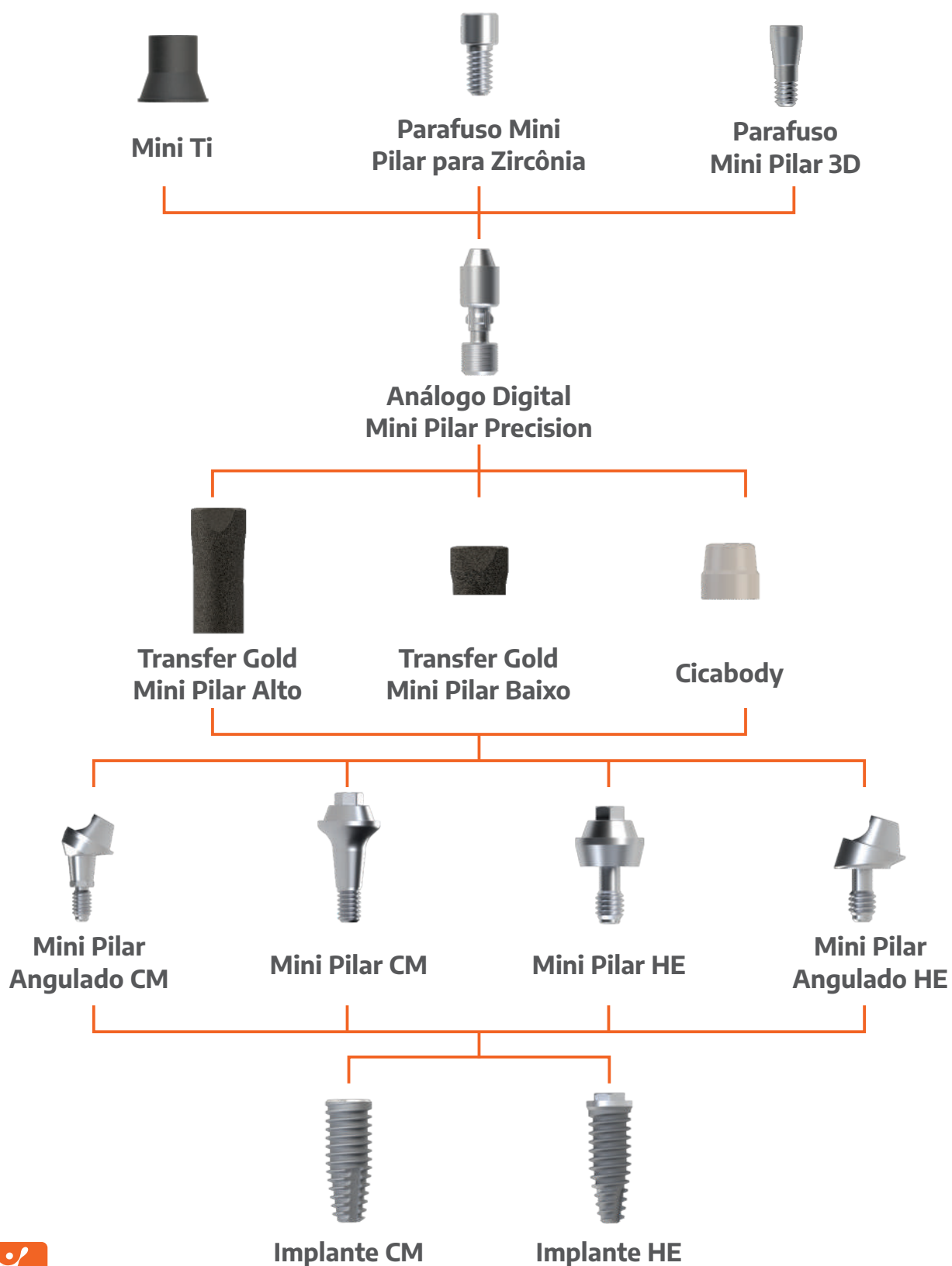


MICRO PILAR

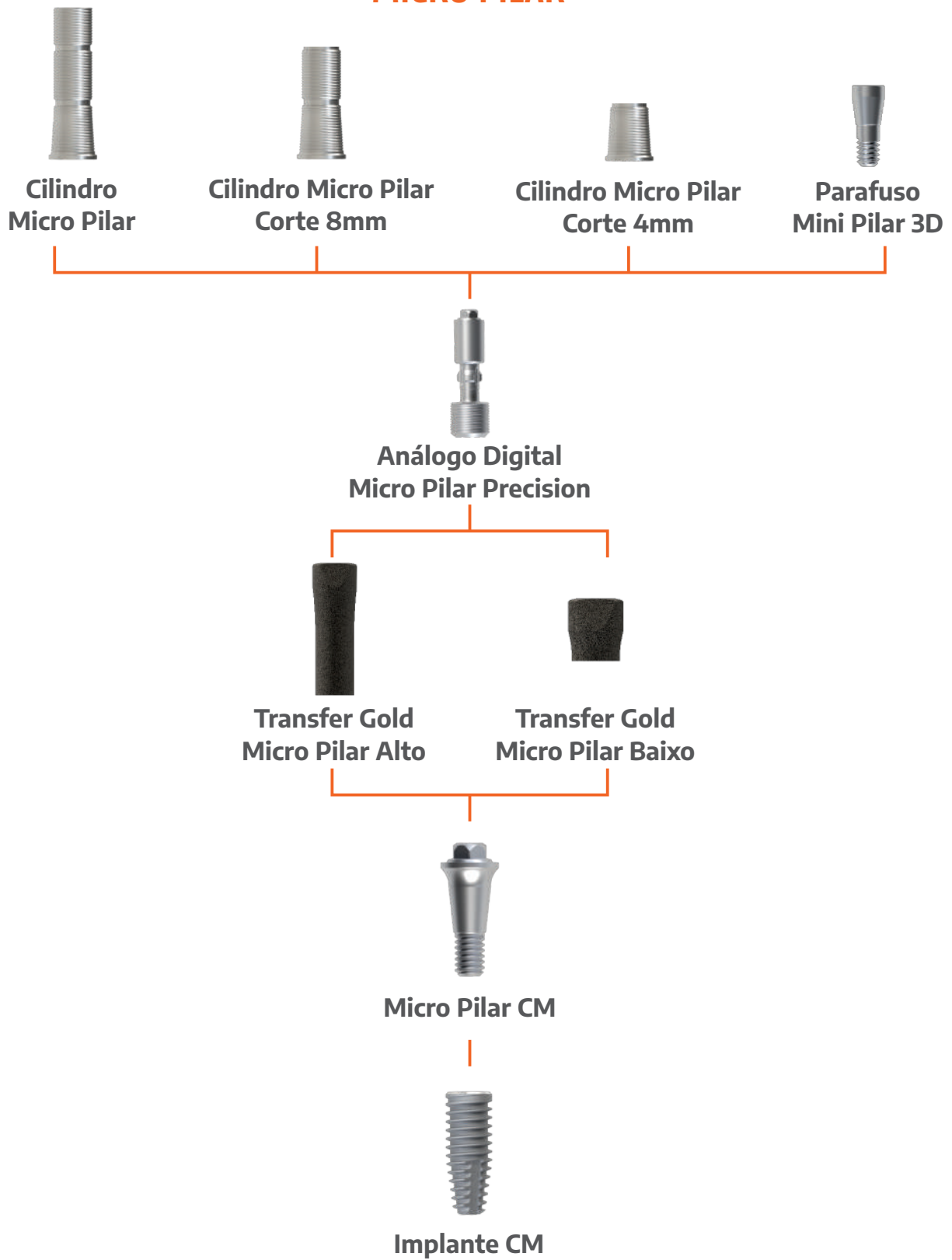

FLUXO PROTÉTICO PRÓTESE UNITÁRIA

TIBASE

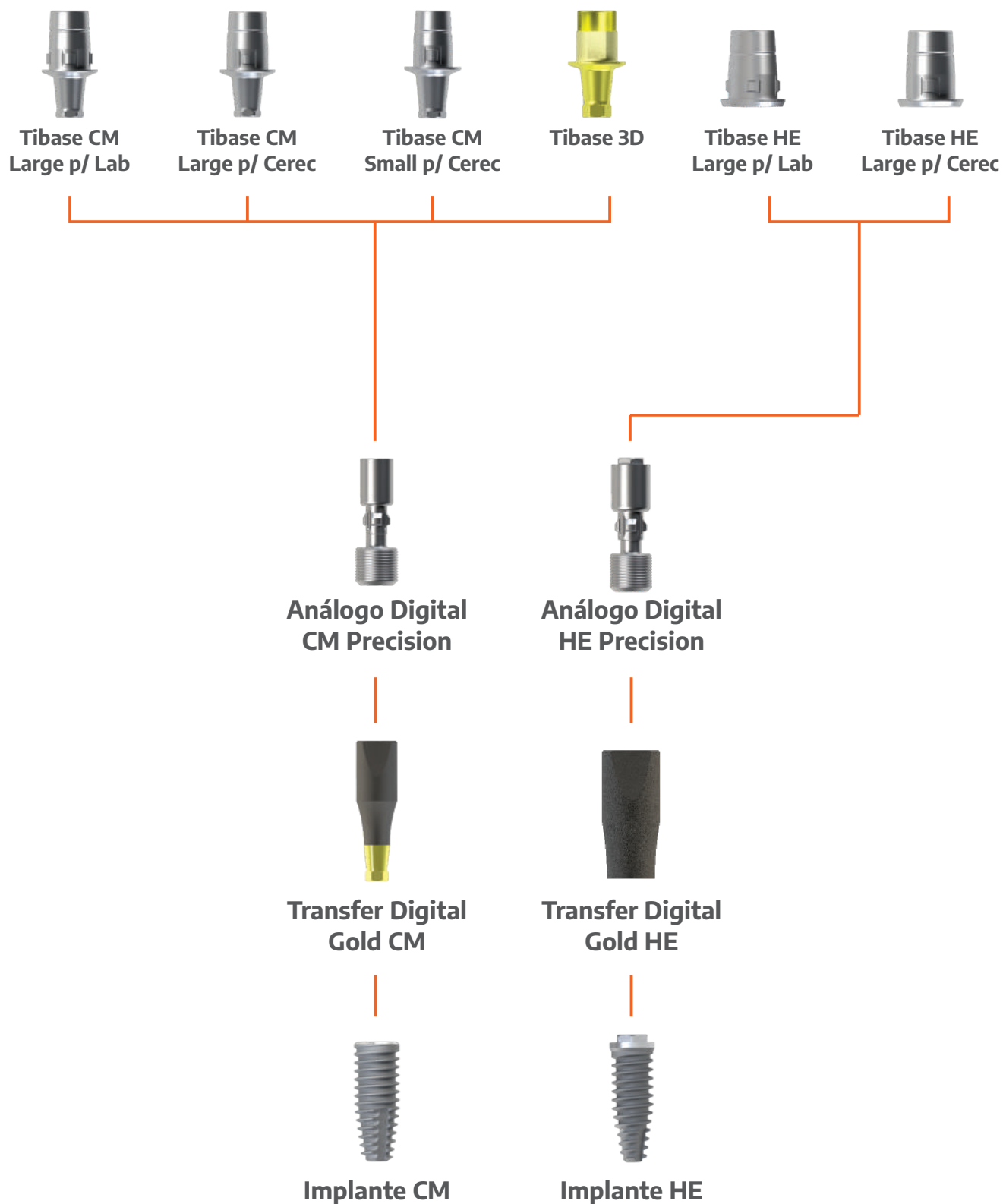

PILAR UNIVERSAL



**Análogo Digital
Precision
PU 3.3 x 4**



**Transfer Digital
Esfera PU 3.3 x 4**



**Pilar Universal
CM 3.3 x 4**



**Análogo Digital
Precision
PU 3.3 x 6**



**Transfer Digital
Esfera PU 3.3 x 6**



**Pilar Universal
CM 3.3 x 6**



**Análogo Digital
Precision
PU 4.5 x 4**



**Transfer Digital
Esfera PU 4.5 x 4**



**Pilar Universal
CM 4.5 x 4**



**Análogo Digital
Precision
PU 4.5 x 6**



**Transfer Digital
Esfera PU 4.5 x 6**



**Pilar Universal
CM 4.5 x 6**



Implante CM

PILAR TG



Tibase Pilar TG



Análogo Digital Pilar TG Precision



Transfer Gold Pilar TG



Pilar TG CM



Implante CM

INSTRUMENTAIS SINGULAR



KIT CIRÚRGICO GUIADO



APLICAÇÃO

O Kit Cirurgia Guiada Singular Implants possui brocas para instalação das linhas de implantes cônico, cilíndrico e Hybridus, de diâmetros Ø3,5 mm, Ø3,75 mm, Ø3,8mm, Ø4,0 mm, e Ø4,3 mm. As brocas estão disponíveis em dois tamanhos, curtas e longas para adequação conforme o caso e/ou região.

Os implantes devem ser instalados com a sequência de instrumentos adequada, de acordo com a cor. Para implantes de Ø3.5mm deve ser utilizada a sequência amarela de guia de broca, brocas, montadores e, se necessário, machos de rosca. Para implantes Ø3.75mm e Ø4.0mm, a sequência azul. Já para implantes Ø4.3mm a sequência roxa.


Brocas e pinos de fixação devem ser utilizados exclusivamente para fixação do guia cirúrgico. Não utilizá-los para instalação de implantes. As anilhas para guia cirúrgico também seguem o mesmo esquema de cores dos implantes.

Os stopdrills são utilizados para orientar a profundidade da perfuração, eles estão rosqueados na bandeja do kit. Para utilizá-los desrosqueie da bandeja do kit e rosqueie na broca a ser utilizada. As medidas para cada componente estão gravadas na bandeja do próprio kit. Para o planejamento cirúrgico, considerar um offset de 9 mm (Imagem A).

As anilhas redutoras podem ser utilizadas para reduzir o diâmetro das anilhas de Ø4,3 mm para Ø3,5 mm, e das anilhas Ø3,75 mm/Ø4.0mm para Ø3,5 mm. Sua utilização varia de acordo com a situação cirúrgica, sendo de responsabilidade do profissional a sua escolha.

Os montadores presentes no kit são compatíveis com a conexão protética Cone Morse. Os montadores devem ser utilizados com o torquímetro e adaptadores para contra ângulo e digital. Cada marcação presente nos montadores longos equivale a 1mm. A primeira marcação representa a mesma medida do montador curto (Imagem B).

O estojo acondiciona os instrumentais cirúrgicos durante a esterilização em autoclave e promove a organização durante os procedimentos odontológicos.

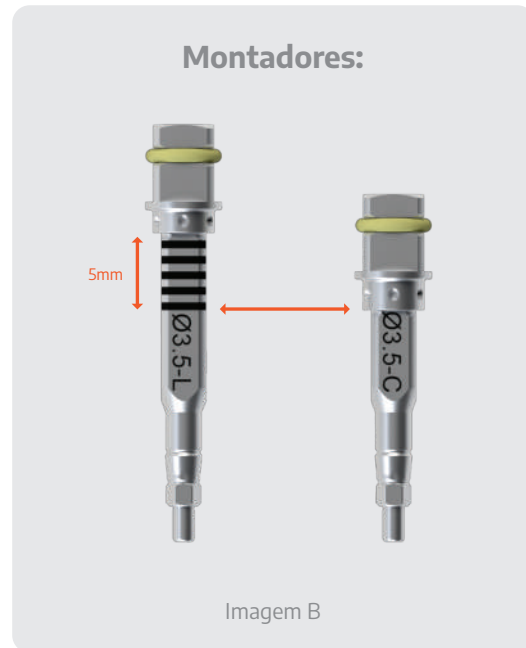


A sequência de instrumentação para cada diâmetro de implante é representada por cores, conforme descrito a seguir:

Amarelo: utilizado para implantes com diâmetro de 3,5 mm;


Azul: destinado aos implantes com diâmetros de 3,75 mm e 4,0 mm;

Roxa: aplicável aos implantes com diâmetro de 4,3 mm.


A mesma indicação de cores é seguida para os montadores e macho de rosca.

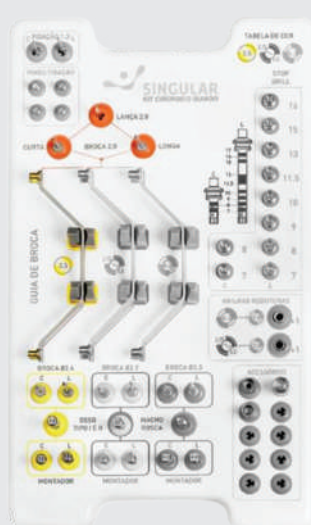

Linha de implantes de 3.5mm

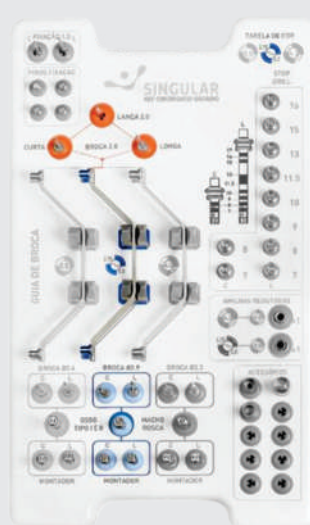

Linha de implantes de 3.75 e 4.0mm

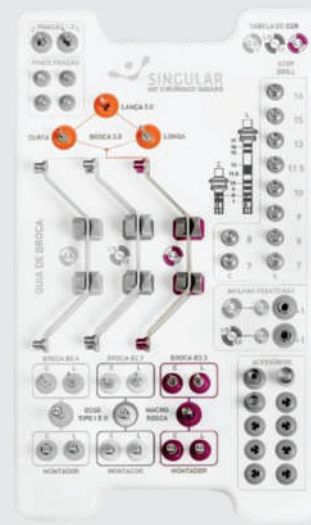

Linha de implantes de 4.3mm


Descrição	Mod. Cód.
CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 1,2MM CURTA	117.010
TORQUIMETRO CIRÚRGICO 80N.cm	117.140
CHAVE EXTENSORA CONTRA-ÂNGULO GUIADA	117.006
SONDA MILIMETRADA GUIADA	117.011
PINÇA DE TITÂNIO P/ KIT CIRURGIA GUIADA	122.009
GUIA DE BROCAS PARA IMPLANTES Ø3.75/4.0	122.016
GUIA DE BROCAS PARA IMPLANTE Ø4.3	122.017
GUIA DE BROCA PARA IMPLANTE Ø3.5	122.022
PINOS DE FIXAÇÃO P/ GUIA CIRÚRGICO	122.024
ANILHA REDUTORA 4.3 PARA 3.5	122.031
ANILHA REDUTORA 3.75/4.0 PARA 3.5	122.034
MONTADOR CM 3.5 LONGO GUIADA	117.136
MONTADOR CM 3.5 CURTO GUIADA	117.316
MONTADOR CM 3.75/4.0 CURTO GUIADA	117.317
MONTADOR CM 3.75/4.0 LONGO GUIADA	117.318
CHAVE EXTENSORA CATRACA GUIADA	150.024
BROCA 3.3mm CURTA GUIADA	150.004
BROCA LANÇA 2.0mm GUIADA	150.071
BROCA 1.3mm CURTA GUIADA	150.079
BROCA 2.0mm CURTA GUIADA	150.094
BROCA 1.3mm LONGA GUIADA	150.106
BROCA 2.0mm LONGA GUIADA	150.175

Descrição	Mod. Cód.
MONTADOR CM 4.3 CURTO GUIADA	117.071
BROCA 2.4mm CURTA GUIADA	150.200
BROCA 2.9mm CURTA GUIADA	150.201
MONTADOR CM 4.3 LONGO GUIADA	117.101
BROCA 2.4 LONGA GUIADA	150.325
BROCA 2.9 LONGA GUIADA	150.327
BROCA 3.3 LONGA GUIADA	150.328
MACHO DE ROSCA 3.5 GUIADA	122.019
MACHO DE ROSCA 3.75/4.0 GUIADA	122.020
MACHO DE ROSCA 4.3 GUIADA	122.021
STOPDRILL 7mm CURTO	155.037
STOPDRILL 7mm LONGO	155.046
STOPDRILL 8mm CURTO	155.061
STOPDRILL 8mm LONGO	155.070
STOPDRILL 9mm LONGO	155.076
STOPDRILL 10mm LONGO	155.085
STOPDRILL 11.5mm LONGO	155.109
STOPDRILL 13mm LONGO	155.133
STOPDRILL 15mm LONGO	155.157
STOPDRILL 16mm LONGO	155.166
PINÇA DE TITÂNIO P/ KIT CIRURGIA GUIADA	122.009
GUIA DE BROCAS PARA IMPLANTES Ø3.75/4.0	122.016

ITENS COMERCIALIZADOS SEPARADAMENTE:

Descrição	Mod. Cód.
ANILHA GUIA PARA PINO DE FIXAÇÃO	122.047
ANILHA GUIA PARA IMPLANTE Ø3.5	122.030
ANILHA GUIA PARA IMPLANTE Ø3.75/4.0	122.032
ANILHA GUIA PARA IMPLANTE Ø4.3	122.029

KIT CIRÚRGICO

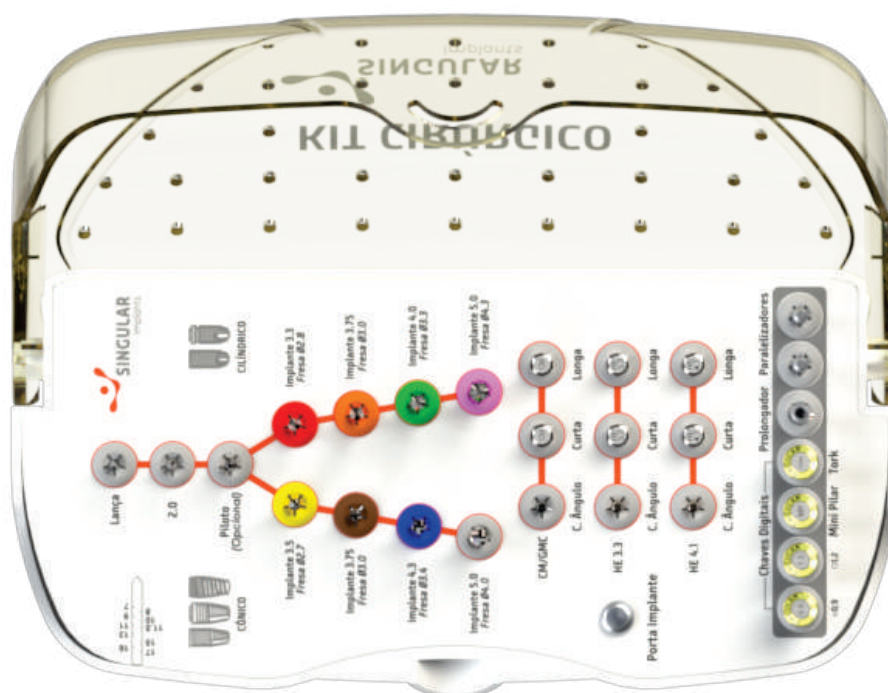

APLICAÇÃO

O Kit Cirúrgico Singular Implants possui brocas para instalação das linhas de implantes cônico e Go-Direct, de diâmetros Ø 3,5 mm, Ø 3,75 mm, Ø 4,0 mm, Ø 4,3 mm e Ø 5,0 mm, e para o modelo cilíndrico, nas dimensões Ø 3,5 mm, Ø 3,75 mm, Ø 4,0 mm e Ø 5,0 mm.

As chaves e montadores presentes no kit são compatíveis com as conexões protéticas CM, GMC, HE 3.3 e HE 4.1. Os montadores devem ser utilizados com o contra ângulo e as chaves podem ser operadas com o torquímetro.

O estojo acondiciona os instrumentais cirúrgicos durante a esterilização em autoclave e promove a organização durante os procedimentos odontológicos. As marcações das brocas são utilizadas para orientar a profundidade da perfuração.

Descrição	Mod. Cód.
CHAVE DIGITAL MINI PILAR	117.002
CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 1,2MM CURTA	117.010
CHAVE MONTADORA CM	117.144
CHAVE MONTADORA HE 3.3	117.145
CHAVE MONTADORA HE 4.1	117.146
CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 0.9MM CURTA	117.114
TORQUIMETRO CIRÚRGICO 80N.cm	117.140
CHAVE EXTENSORA CONTRA-ÂNGULO GUIADA	117.313
SONDA MILIMETRADA CIRÚRGICO	117.314
PARALELIZADOR	122.010
BROCA HELICOIDAL 2.0mm	150.001
BROCA HELICOIDAL 2.8mm	150.002
BROCA HELICOIDAL 3.0mm	150.003
BROCA HELICOIDAL 3.3mm	150.005

Descrição	Mod. Cód.
BROCA HELICOIDAL 4.3mm	150.008
BROCA LANÇA 2.0mm	150.022
BROCA CÔNICA 3.5mm	150.120
BROCA CÔNICA 4.3mm	150.121
BROCA CÔNICA 5.0mm	150.122
BROCA PILOTO 2 e 3mm	150.157
BROCA CÔNICA 3.5mm MAX	150.172
PROLONGADOR DE BROCAS C.A 01	150.180
CHAVE CATRACA CM LONGA	150.199
CHAVE CATRACA CM CURTA	150.202
CHAVE CATRACA HE 4.1 CURTA	150.205
CHAVE CATRACA HE 4.1 LONGA	150.206
CHAVE CATRACA HE 3.3 CURTA	150.211
CHAVE CATRACA HE 3.3 LONGA	150.212

KIT CIRÚRGICO SMART:



APLICAÇÃO

O Kit Cirúrgico Smart Singular Implants possui brocas para instalação das linhas de implantes cônico e GoDirect, de diâmetros Ø 3,5 mm, Ø 3,75 mm, Ø 4,0 mm, Ø 4,3 mm e Ø 5,0 mm.

As chaves e montadores presentes no kit são compatíveis com as conexões protéticas CM, GMC e HE 4.1. Os montadores devem ser utilizados com o contra ângulo e as chaves podem ser operadas com o torquímetro.

O estojo acondiciona os instrumentais cirúrgicos durante a esterilização em autoclave e promove a organização durante os procedimentos odontológicos.

As marcações das brocas são utilizadas para orientar a profundidade da perfuração.

Descrição	Mod. Cód.
BROCA CÔNICA 3.5mm	150.120
BROCA CÔNICA 4.3mm	150.121
BROCA CÔNICA 3.5mm MAX	150.172
BROCA HELICOIDAL 2.0mm	150.001
BROCA LANÇA 2.0mm	150.022
CHAVE CATRACA CM CURTA	150.202
CHAVE CATRACA CM LONGA	150.199
CHAVE CATRACA HE 4.1 CURTA	150.205
CHAVE CATRACA HE 4.1 LONGA	150.206
CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 0.9MM CURTA	117.114

Descrição	Mod. Cód.
CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 1,2MM CURTA	117.010
CHAVE DIGITAL TORK CURTA	117.313
CHAVE DIGITAL MINI PILAR	117.002
TORQUIMETRO CIRÚRGICO 80N.cm	117.140
CHAVE EXTENSORA CONTRA-ÂNGULO GUIADA	150.180
CHAVE MONTADORA CM	117.144
CHAVE MONTADORA HE 4.1	117.146
PARALELIZADOR	122.010
SONDA MILIMETRADA CIRÚRGICO	117.314

KIT PROTÉTICO



APLICAÇÃO

O Kit Protético Singular Implants possui chaves compatíveis com componentes que possuem conexões dos tipos quadrada, fenda, hexagonal, mini pilar e tork. Elas também podem ser operadas com o auxílio do torquímetro ou do adaptador.

O uso do estojo é para acondicionar os instrumentais protéticos durante a esterilização em autoclave e promove a organização durante os procedimentos odontológicos.

Descrição	Mod. Cód.
CHAVE TORQUE HEXAGONAL 0.9MM CURTA	117.008
CHAVE TORQUE QUADRADA 1.3MM CURTA	117.018
CHAVE TORQUE QUADRADA 1.3MM MÉDIA	117.019
CHAVE TORQUE HEXAGONAL 1.2MM MÉDIA	117.037
CHAVE TORQUE HEXAGONAL 1.6MM MÉDIA	117.040
CHAVE TORQUE HEXAGONAL 1.2MM CURTA	117.109
CHAVE TORQUE MINI PILAR	117.135

Descrição	Mod. Cód.
TORQUIMETRO CIRÚRGICO 80N.cm	117.140
CHAVE ADAPTAÇÃO PROTÉTICA	117.141
CHAVE TORQUE HEXAGONAL 0.9MM MÉDIA	117.300
CHAVE TORQUE PILAR O'RING CURTA	117.305
CHAVE TORQUE FENDA	117.306
CHAVE TORK CURTA P TORQUÍMETRO	117.310
CHAVE TORK MÉDIA P/ TORQUÍMETRO	117.311



SINGULAR
Implants

☎ 0800 024 4378

▶ singularimplantsoficial

f @ in singularimplants

singularimplants.com.br

R. Eucaliptos, 36 | Pq. das Nações
Parnamirim/RN - Brasil