



Love & Be loved with

*Love and
Be Loved with !*



CARA
Lidocaine HA filler

Cross-Linked HA Filler with Lidocaine

Seguridad

Seguro de usar en pacientes

El proceso de fabricación está estrictamente controlado para mantener los niveles de endotoxinas y BDDE (reticulante químico) bajos. Por debajo del límite de detección. Se puede minimizar el riesgo de efectos secundarios adversos (reacción alérgica, edema, etc.).

Prueba de rendimiento ¹ | 

	Estándar	Resultado
Apariencia	Sin impurezas, gel transparente e incoloro.	Aprobar
Concentración de HA3	21,6 ~ 26,4 mg	24,1 mg
pH	6,5 ~ 7,5	7.10
BDDE residual	< 2 ppm	No detectado
Endotoxin	< 20 UE	< 0,100 UE
Volumen	> 1,0 ml	Aprobar

* ¿Qué es BDDE (éter diglicidílico de 1,4-butanodiol, agente reticulante)?


El BDDE (éter diglicidílico de 1,4-butanodiol) es un agente de reticulación químico que convierte el ácido hialurónico en gel. La cantidad residual de BDDE está estrictamente regulada a menos de 2 ppm. No se detectó en todos los rellenos CARA.

1. Datos del fabricante en archivo
3. HA: Ácido hialurónico

Superioridad tecnológica


La fuerza de extrusión constante permite una inyección suave

Fuerza de extrusión vs. distancia

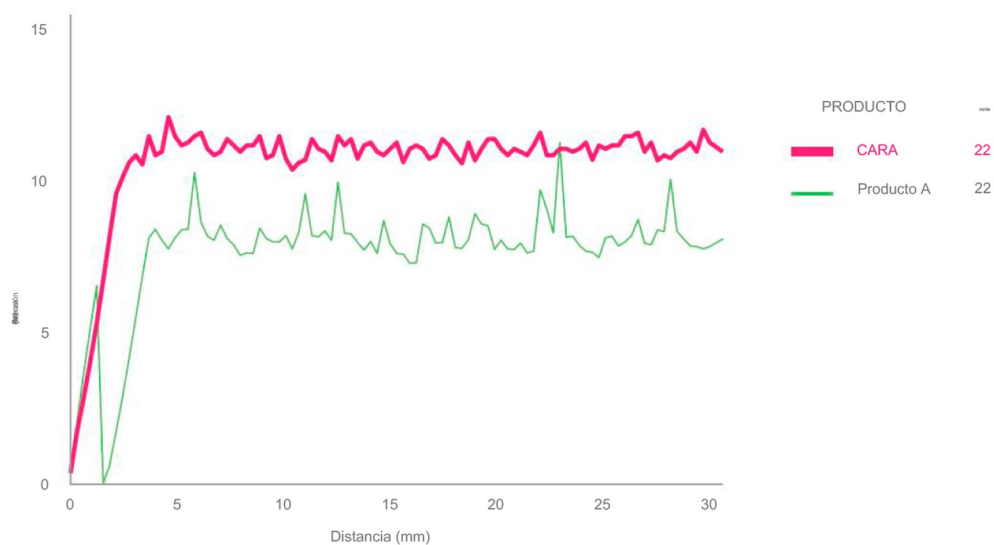


Tasa de reticulación maximizada con modificación minimizada

Ministerio de Defensa, Grado de Modificación

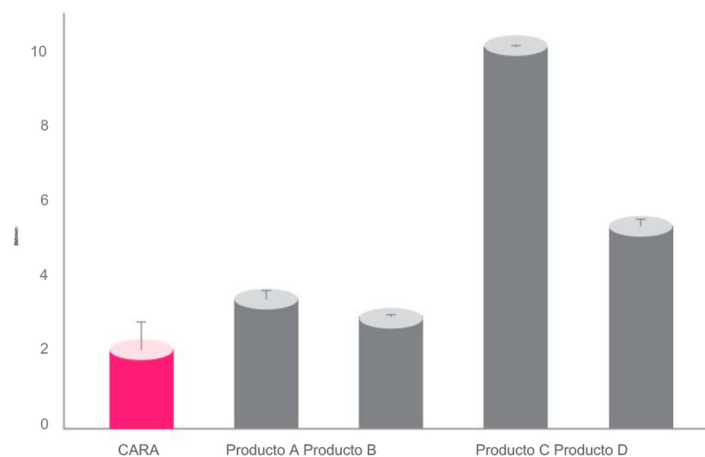


Mayor cohesión, mejores resultados

Cohesión

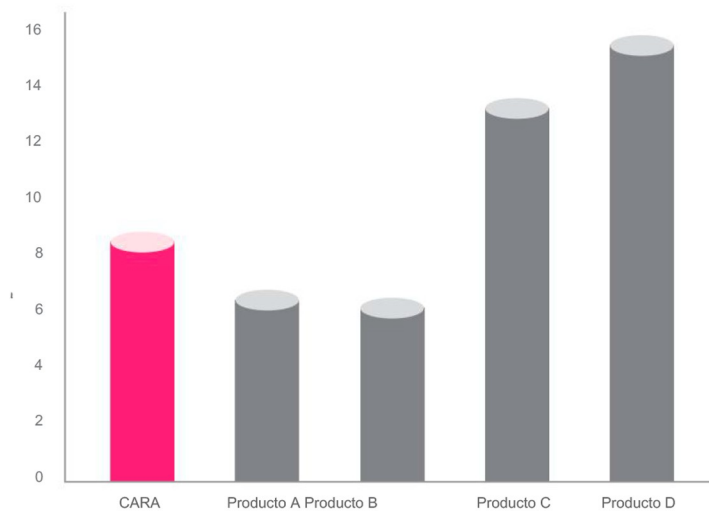

Dispositivo de medición
Reómetro (MalvernPanalytical, KINEXUSlab+)
Condición de medición
Velocidad de separación 0.2 mm/seg.
Espacio inicial 1 mm, espacio final 20 mm

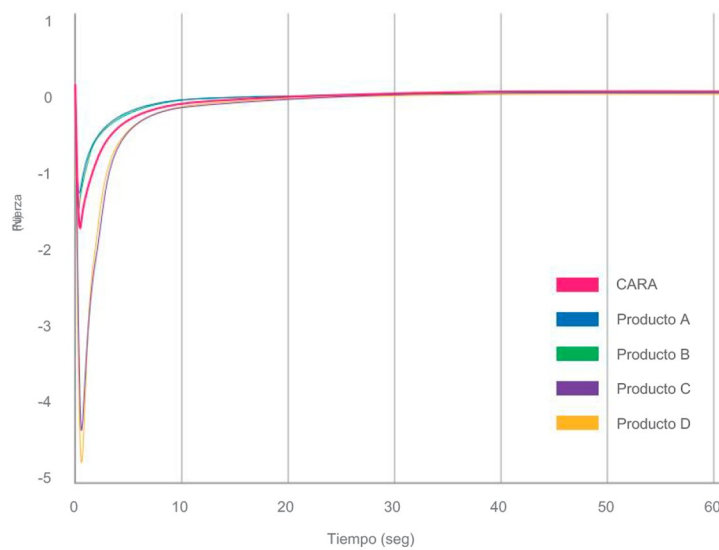


Superioridad tecnológica


Mejor efecto de volumen y retención

Cara Technology puede producir ácido hialurónico en partículas altamente densas y de tamaño uniforme. Esto permite que CARA Filler tenga una viscoelasticidad óptima y un volumen duradero.

Estructura reticular

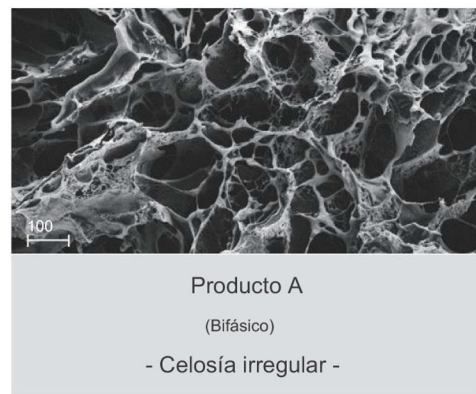

Viscoelasticidad

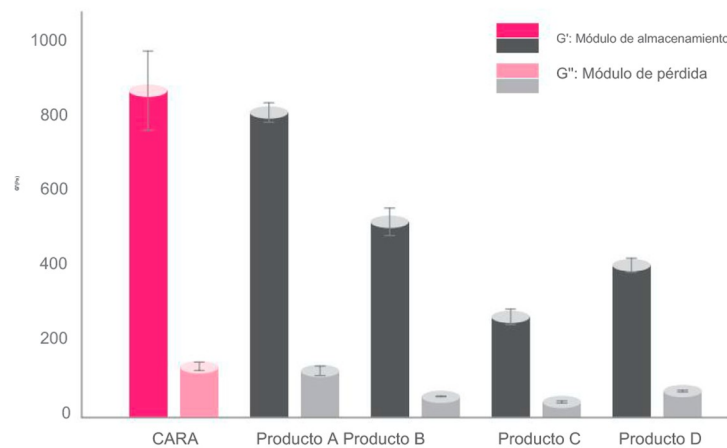


Diseño ergonómico


Fácil operación Las

empuñaduras y varillas de empuje diseñadas ergonómicamente proporcionan un tratamiento preciso y seguro con fuerzas de inyección constantes.


Permite al usuario realizar diversas técnicas de inyección según el sitio de tratamiento.

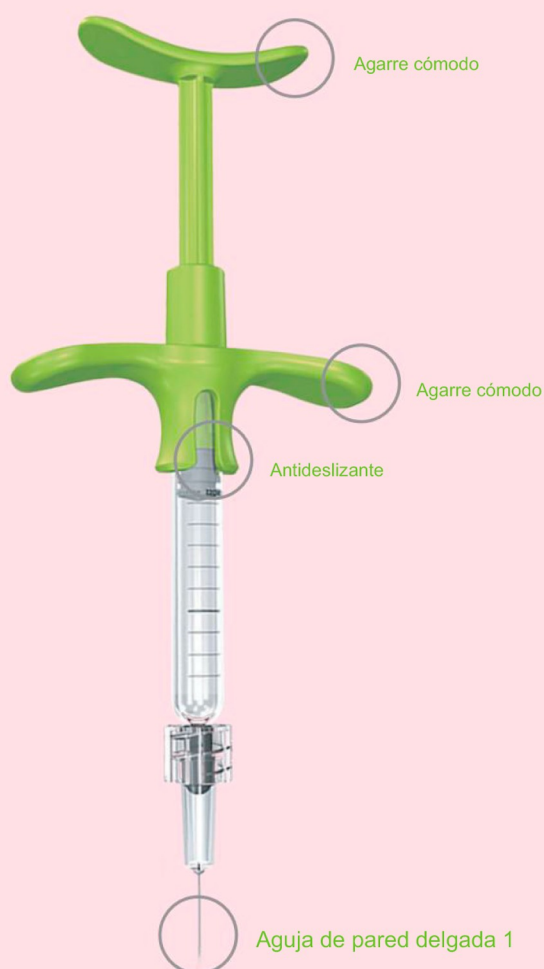

Agarre

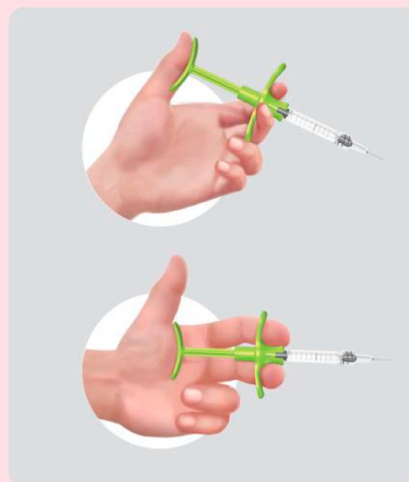

Aguja

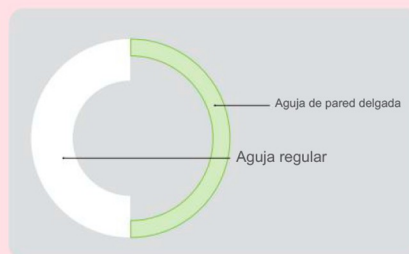

Aguja TW 30G para tipo suave

Aguja TW 27G para tipo suave, duro y ultra


(Aguja TW 25G para tipo Hard, Ultra: depende del usuario)

Gama de productos¹

Relleno dérmico de ácido hialurónico con lidocaína 

	SUAVE	LEVE	DURO	ULTRA
ARBITRO	MPF10S	MPF10M	MPF10H	MPF10U
Concentración	24 mg/ml			
Tamaño de partícula	200 µm	400 µm	600 µm	900 µm
Tamaño de la aguja*	30G TW (2 unidades)	27G TW (2 unidades)	25G TW , 27G TW	25 G de peso total , 27G TW

Uso previsto

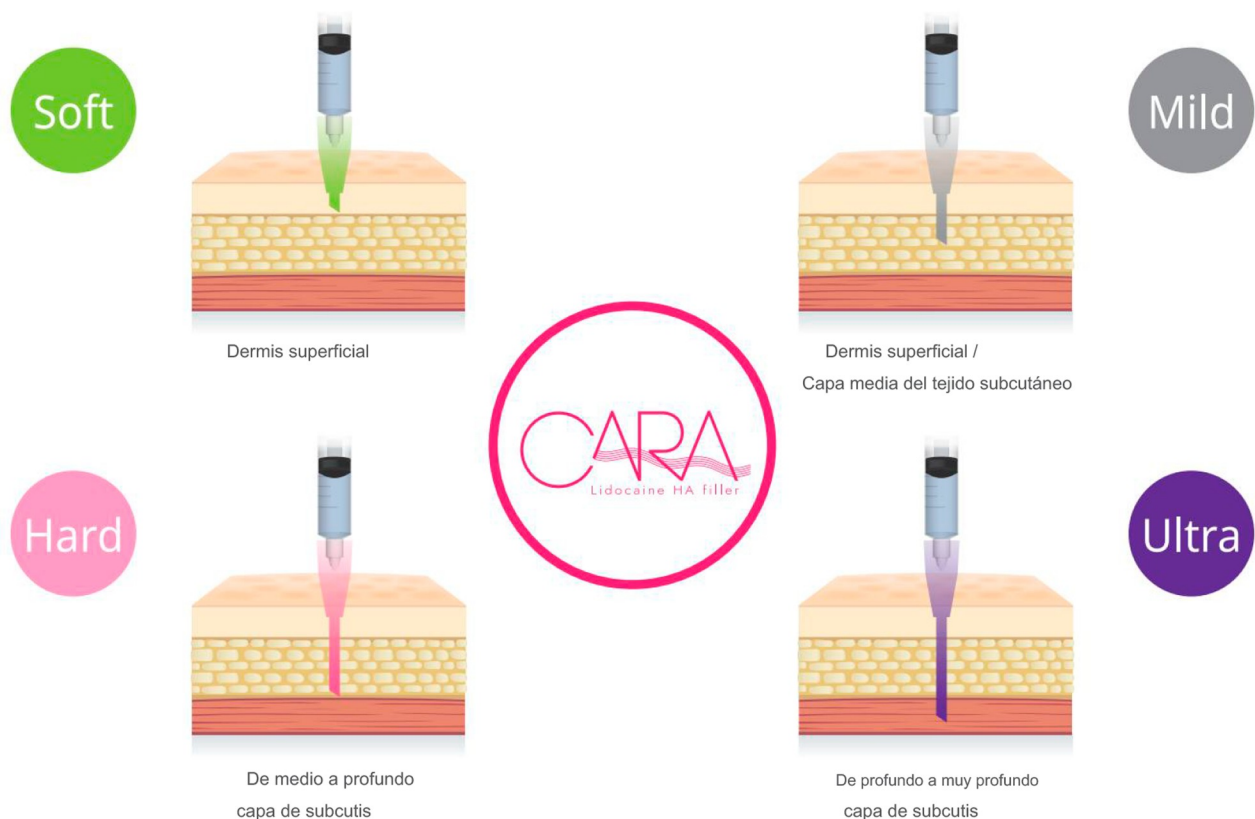

1. Datos del fabricante en archivo

*El tipo de aguja está sujeto a cambios sin previo aviso.

Textura de gel y
Tamaño de partícula



SUAVE

Arrugas faciales
Canal lacrimógeno



LEVE

líneas periorales
Volumen de las mejillas
líneas de la frente



DURO

Volumen de la frente
pliegue nasolabial
Mentón y óvalo facial



ULTRA

Nasal
aumento
Mentón y óvalo facial



Antes y después


Paciente de 35 años - Tratamiento de frente



Antes del tratamiento



Después del tratamiento

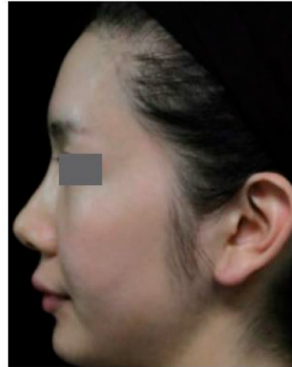

Antes del tratamiento



Después del tratamiento

Paciente de 35 años - Tratamiento de mentón



Antes del tratamiento



Después del tratamiento



Antes del tratamiento



Después del tratamiento

Paciente de 35 años - Tratamiento de frente, mejillas y nariz



Antes del tratamiento



Después del tratamiento



Antes del tratamiento



Después del tratamiento

¿Por qué elegir el relleno de HA de lidocaína CARA?



One-stop Service from Manufacturing to Direct Distribution / Export

- Convenient & prompt product distribution & after service



Strict QA Management System

- Usage and management of strictly selected high-quality components
- Operation of manufactory facility that thoroughly observes domestic and international regulations for medical device



Quality Improvement and Continuous R&D

- Development of new products according to market trend
- Continuous quality evaluation and enhancement of existing products
- **The first launcher of colorless PDO lifting thread in the market**



Glove Box Packing

- Specialized packing system for non-moisture maintenance (under 400 ppm)

CARA es un relleno de ácido hialurónico reticulado. Actualmente está registrado y se vende en 24 países fuera de Asia, Europa, Oriente Medio y Latinoamérica gracias a su certificación internacional.

* Obtuvo el certificado KGMP, ISO 13485, ISO 9001

U

H

METRO

S

Sólo para uso internacional

CARA

Relleno de HA de lidocaína 1,0 ml

Tipo suave

Dermis superficial

Tipo leve

Dermis superficial / Capa media del tejido subcutáneo

Tipo duro

Capa media a profunda del tejido subcutáneo

Ultra Tipo

Capa profunda a muy profunda del tejido subcutáneo

 **trinidat**
aesthetics